
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
ИСО 17966—
2022

**ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
ЛИЦ С ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ**

Требования и методы испытания

(ISO 17966:2016, IDT)

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2022

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский институт стандартизации» (ФГБУ «Институт стандартизации») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 381 «Технические средства и услуги для инвалидов и других маломобильных групп населения»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 ноября 2022 г. № 1361-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 17966:2016 «Вспомогательные средства для личной гигиены лиц с физическими недостатками. Требования и методы испытания» (ISO 17966:2016 Assistive products for personal hygiene that support users — Requirements and test methods, IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных и европейских стандартов соответствующие им межгосударственные и национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© ISO, 2016

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2022

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины и определения	3
4 Общие требования и методы испытаний	5
4.1 Анализ рисков	5
4.2 Предполагаемая производительность	5
4.3 Клиническая оценка и исследование	5
4.4 Вспомогательные средства для личной гигиены, которые можно демонтировать	6
4.5 Крепеж	6
4.6 Средства для предотвращения выпадения	6
4.7 Масса пользователя/максимальное усилие	6
4.8 Устройство	6
4.9 Условия проведения испытаний	15
5 Материалы	16
5.1 Общие положения	16
5.2 Воспламеняемость	16
5.3 Биосовместимость и токсичность	16
5.4 Инфекция и микробиологическое загрязнение	16
5.5 Устойчивость к коррозии	17
6 Издаваемый звук и вибрация	17
6.1 Шум и вибрация	17
6.2 Уровни звукового давления и частоты звуковых сигнализаторов	17
7 Электромагнитная совместимость	17
7.1 Общие положения	17
7.2 Излучение	18
7.3 Помехозащищенность	18
7.4 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	18
8 Электробезопасность	18
8.1 Общие положения	18
8.2 Электрические системы	18
8.3 Безопасное расположение	19
8.4 Безопасность при одной неисправности	19
8.5 Устройство активации с автоматическим возвратом в исходное положение	19
8.6 Функция аварийной остановки	19
8.7 Непрерывность электроснабжения	19
8.8 Вспомогательные средства на батарейках для личной гигиены	20
8.9 Защита цепи	20
8.10 Одеяла, подушки с электрическим подогревом и аналогичные адаптивные нагревательные приборы	21
8.11 Попадание жидкостей	21
9 Переполнение, утечка и попадание жидкостей	21
9.1 Попадание жидкостей	21
9.2 Переполнение и утечка	21
10 Температуры деталей, соприкасающихся с кожей человека	22

11	Безопасность движущихся и складывающихся деталей	23
11.1	Сжатие	23
11.2	Скорость механизированных движений подъема и опускания	23
11.3	Механический износ	24
11.4	Зоны захвата ног по отношению к движущимся частям	24
12	Предотвращение ловушек для частей тела человека	25
12.1	Отверстия и клиренс	25
12.2	Клинообразные отверстия	25
13	Складные и регулировочные механизмы	25
13.1	Общие положения	25
13.2	Блокировочное устройство	26
14	Подъемно-транспортные средства	26
14.1	Общие положения	26
14.2	Требования	26
14.3	Метод испытания	26
15	Портативные и ручные средства для личной гигиены или ручные детали	27
16	Статическая прочность, ударопрочность и долговечность	27
16.1	Общие положения	27
16.2	Формулы	28
16.3	Количество циклов испытаний на долговечность	28
16.4	Статическая прочность опоры для лежания, опор для рук и ног, поверхностей сиденья и спинки	29
16.5	Долговечность	35
16.6	Ударное воздействие	39
17	Устойчивость	42
17.1	Требования к статической устойчивости	42
17.2	Метод испытания на статическую устойчивость	42
18	Поверхности, углы, кромки и выступающие части	43
19	Мелкие детали	43
20	Усилия в мягких тканях человеческого тела	43
21	Эргономические принципы	43
22	Мобильные APHs	44
22.1	Общие положения	44
22.2	Средства, уменьшающие подвижность	44
22.3	Электробезопасность для мобильных APHs	45
22.4	Грубое обращение и перемещение	45
22.5	Эксплуатационные требования к мобильному APH	46
22.6	Движущее усилие	46
23	Стационарные APHs	47
23.1	Общие положения	47
23.2	Требования	47
23.3	Сиденья для душа (09 33 03)	47
23.4	Лежаки для ванны, столы для душа и пеленальные столики (09 33 12)	49
23.5	Кресла для ванны/душа (без колесиков), доски для ванны, табуретки, спинки и сиденья (09 33 03)	50

23.6 Туалетные поднимающиеся сиденья (09 12 18)	51
23.7 Поручни, опорные перила и фиксаторы (18 18 03 и 18 18 06).	52
23.8 Съёмные фиксаторы и поручни для временного использования (18 18 10)	54
23.9 Поручни и подлокотники, установленные на шарнирах (18 18 11)	54
23.10 Опоры и кронштейны, регулируемые по высоте (18 15 06)	55
24 Статические АРРNs	56
24.1 Общие положения	56
24.2 Испытания на устойчивость и прочность статических АРРNs	56
24.3 Сиденья туалетные, вставные (09 12 15)	56
24.4 Туалетные сиденья со встроенным подъемным механизмом для облегчения вставания и посадки (приставные) (09 12 21)	59
24.5 Стулья для ванны/душа (без колесиков), банные доски, табуреты, опоры для спинок и сиденья (09 33 03)	59
25 Требования к информации, предоставляемой производителем	67
25.1 Общие положения	67
25.2 Инструкции по эксплуатации	68
25.3 Этикетка	69
26 Упаковка	70
27 Протокол испытаний	70
Приложение А (справочное) Когнитивное расстройство	71
Приложения В (справочное) Общие рекомендации	72
Приложение С (справочное) Экологические и потребительские требования	77
Приложение D (справочное) Периодический контроль	81
Приложение ДА (обязательное) Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов межгосударственным и национальным стандартам	82
Библиография	84

Предисловие

Международная организация по стандартизации (ИСО) является Всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации (комитетов — членов ИСО). Разработку международных стандартов обычно осуществляют технические комитеты ИСО. Каждый комитет-член, задействованный в деятельности, для которой создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные правительственные и неправительственные организации, взаимодействующие с ИСО, также принимают участие в работах. Что касается стандартизации в области электротехники, то ИСО работает в тесном сотрудничестве с Международной электротехнической комиссией (МЭК).

Процедуры, использованные для разработки настоящего стандарта, и процедуры, предназначенные для его дальнейшего ведения, описаны в Директивах ИСО/МЭК, часть 1. В частности, следует отметить различные критерии утверждения, необходимые для различных типов документов ИСО. Настоящий стандарт подготовлен в соответствии с редакционными правилами Директив ИСО/МЭК, часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Следует обратить внимание на возможность того, что некоторые элементы настоящего стандарта могут быть предметом патентных прав. ИСО не несет ответственности за идентификацию каких-либо или всех таких патентных прав. Подробная информация о любых патентных правах, выявленных в ходе разработки стандарта, приведена во Введении и/или в списке полученных патентных деклараций ИСО (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое наименование, используемое в настоящем стандарте, является информацией, предоставленной для удобства пользователей, и не служит рекомендацией.

Разъяснение значения специфических терминов и выражений ИСО, связанных с оценкой соответствия, а также информацию о соблюдении ИСО принципов ВТО в области технических барьеров в торговле (ТБТ) можно найти по URL-адресу: Предисловие — Дополнительная информация

Комитет, ответственный за разработку настоящего стандарта, — ISO/TC 173 «Вспомогательные продукты для людей с ограниченными возможностями».

Введение

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний, относящиеся к вспомогательным средствам личной гигиены, которые помогают пользователям в домашнем уходе, а также в учреждениях и общественных местах. Некоторые устройства могут быть использованы более чем в одной среде. Это означает, что к одному и тому же средству могут быть применены различные требования и методы испытаний в зависимости от окружающей среды. Разделы 1—21 и раздел 25 содержат общие требования ко всем видам продукции, включенным в раздел «Область применения». В разделах 22—24 перечислены конкретные требования к мобильным, стационарным и статическим продуктам. Эти требования указывают на дополнительные требования к общим положениям. Для того чтобы продукт мог претендовать на соответствие настоящему стандарту, необходимо выполнить все соответствующие положения в зависимости от типа продукта. Например, некоторые продукты не включают электрические компоненты, поэтому положения, относящиеся к электрическим компонентам, могут быть неприменимы.

В дополнение к требованиям настоящего стандарта в приложении В приведены общие рекомендации.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ
ЛИЦ С ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ

Требования и методы испытания

Assistive products for personal hygiene that support users. Requirements and test methods

Дата введения — 2023—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и связанные с ними методы испытаний вспомогательных средств личной гигиены (АППН), которые оказывают поддержку пользователям и предназначены производителям для облегчения или компенсации ограничения физических возможностей гражданам. Также в него включены аспекты рабочей среды и безопасности для помощников. Настоящий стандарт устанавливает требования к безопасности и производительности АППН при нормальном использовании, а также при прогнозируемом неправильном применении и выходе АППН из строя. Настоящий стандарт также определяет методы измерения усилий для контроля управления и ограничения сил, необходимые для некоторых операций.

Настоящий стандарт устанавливает требования и методы испытаний вспомогательных средств в следующих подразделах ИСО 9999:2011:

09 12 03 кресла-стулья туалетные.

Примечание — Распространяется на мобильные и стационарные средства;

09 12 06 туалеты со встроенным механизмом подъема и регулировки высоты.

Примечание — В их состав не входят туалеты со встроенным душем и сушилками для воздуха;

09 12 09 сиденья туалетные;

09 12 12 сиденья туалетные, поднимающиеся, монтируемые на раме;

09 12 15 сиденья туалетные, вставные;

09 12 18 сиденья туалетные, поднимающиеся, фиксируемые на унитазах;

09 12 21 сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом для облегчения вставания и посадки;

09 12 24 подлокотники и спинки туалетные, монтируемые на унитазах;

09 12 25 подлокотники и спинки туалетные, не закрепленные на унитазах;

09 12 36 души и воздушные сушилки, встраиваемые в унитаз;

09 33 03 кресла для ванны/душа (на колесиках или без них), доска для ванны, табуретки, спинки и сиденья;

09 33 12 лежаки для ванны, столы для душа и столы туалетно-пеленальные;

18 15 06 опоры и кронштейны, регулируемые по высоте.

Примечание — Относится к регулируемым по высоте бортикам и кронштейнам при использовании в качестве вспомогательного средства личной гигиены (АППН). Могут быть включены регулируемые по высоте механизмы для других предметов, таких как раковины;

18 18 03 поручни и опорные перила;

18 18 06 фиксаторы и поручни;

18 18 10 съемные фиксаторы и поручни для временного использования.

Примечание — Исключает съемные поручни и фиксаторы, которые являются статическими, как определено в 3.27;

18 18 11 перила и подлокотники складные.

Настоящий стандарт не содержит требований, касающихся:

- безопасного крепления в строительных конструкциях;
- стационарных строительных установок, например водоснабжения и электроснабжения;
- подъемников для ванн, на которые распространяется ИСО 10535;
- 09 33 21 ванны по ИСО 9999:2011;
- устойчивости и трения по отношению к скользким поверхностям в случае использования мыла;
- тех продуктов, которые настроены или изготовлены на заказ для отдельного пользователя.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — последнее издание (включая все изменения)]:

CISPR 11, Industrial, scientific and medical equipment — Radio-frequency disturbance characteristics — Limits and methods of measurement (Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы измерений)

ISO 3746, Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure. Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью)

ISO 8191-1, Furniture; Assessment of the ignitability of upholstered furniture; Part 1: Ignition source: smouldering cigarette (Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 1. Источник воспламенения: тлеющая сигарета)

ISO 8191-2, Furniture; assessment of ignitability of upholstered furniture; Part 2: ignition source: match-flame equivalent (Мебель. Оценка воспламеняемости мягкой мебели. Часть 2. Источник воспламенения: эквивалент пламени спички)

ISO 9227, Corrosion tests in artificial atmospheres — Salt spray tests (Испытания на коррозию в искусственной атмосфере. Испытания в солевом тумане)

ISO 9999:2011, Assistive products Classification and terminology (Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология)

ISO 10993-1, Biological evaluation of medical devices — Part 1: Evaluation and testing within a risk management process (Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска)

ISO 12100, Safety of machinery — General principles for design — Risk assessment and risk reduction (Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска)

ISO 13850, Safety of machinery — Emergency stop function — Principles for design (Безопасность машин. Аварийный останов. Принципы проектирования)

ISO 14155, Clinical investigation of medical devices for human subjects — Good clinical practice (Клинические исследования. Надлежащая клиническая практика)

ISO 14971, Medical devices — Application of risk management to medical devices (Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям)

ISO 15223-1, Medical devices Symbols to be used with information to be supplied by the manufacturer — Part 1: General requirements (Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования)

ISO 22442-1, Medical devices utilizing animal tissues and their derivatives — Part 1: Application of risk management (Изделия медицинские, использующие ткани и их производные животного происхождения. Часть 1. Менеджмент риска)

IEC 60335-1, Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements (Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования)

IEC 60529, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) [Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)]

IEC 60601-1:2005+A1:2012, Medical electrical equipment — Part 1: General requirements for basic safety and essential performance (Медицинское электрическое оборудование. Часть 1. Общие требования к базовой безопасности и основным характеристикам)

IEC 60601-1-2:2014, Medical electrical equipment — Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance — Collateral Standard: Electromagnetic disturbances — Requirements and tests (Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания)

IEC 60601-2-35, Medical electrical equipment — Part 2-35: Particular requirements for the basic safety and essential performance of heating devices using blankets, pads and mattresses and intended for heating in medical use (Изделия медицинские электрические. Часть 2-35. Частные требования безопасности к одеялам, подушкам и матрацам медицинским электрическим)

IEC 61000-3-2, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-2: Limits — Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase) [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонических составляющих тока (оборудование с входным током не более 16 А в одной фазе)]

IEC 61000-3-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3-3: Limits — Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных систем]

IEC 61000-4-3, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measurement techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному]

IEC 61000-4-8, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-8: Testing and measurement techniques — Power frequency magnetic field immunity test [Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты]

IEC 60695-11-10, Fire hazard testing — Part 11-10: Test flames — 50 W horizontal and vertical flame test methods (Испытания на пожароопасность. Часть 11-10. Испытательное пламя. Метод испытания пламенем мощностью 500)

EN 614-1, Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles (Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы)

EN 1041, Information supplied by the manufacturer of medical devices (Информация, предоставляемая производителем медицинских изделий)

EN 12527:1998, Castors and wheels — Test methods and apparatus (Ролики и колеса. Методы испытаний и аппарата)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 **рабочая часть** (applied part): Часть оборудования, которая при обычном использовании обязательно вступает в физический контакт с пользователем для выполнения своей функции.

3.2 **вспомогательное средство для личной гигиены**; APFH (assistive product for personal hygiene, APFH): Вспомогательное средство (3.3), предназначенное для поддержания личной гигиены.

3.3 **вспомогательное средство** (assistive product): Любое средство (включая устройства, оборудование, инструменты и средства программного обеспечения), специально изготовленное или общедоступное для людей с ограничениями жизнедеятельности:

- для участия;
- защиты, поддержки, тренировки, измерения или замены функций тела (организма)/структур и видов деятельности, или
- предотвращения повреждений, ограничений деятельности или ограничений участия (общения).

[ИСО 9999:2011, определение 2.3]

3.4 **помощник** (assistant): Лицо, управляющее вспомогательным средством, если оно не является инвалидом.

3.5 **обратный** (backward): 180° к прямому направлению движения.

3.6 **очистка** (cleaning): Удаление посторонних веществ с поверхности.

3.7 **дезинфекция** (disinfection): Процесс дезинфекции с использованием специальных методов очистки, которые уничтожают или предотвращают рост микроорганизмов, способных вызвать заражение.

3.8 **основные характеристики** (essential performance): Характеристики, необходимые для достижения отсутствия недопустимого риска.

Примечание 1 — Основные характеристики легче всего оценить, если учесть, приведет ли их отсутствие или понижение к недопустимому риску.

3.9 **стационарное изделие** (fixed product): Изделие, предназначенное для крепления к опоре или иного закрепления в определенном месте.

Пример 1 — Фиксируется конструкцией крепления, а не с помощью трения.

Пример 2 — Изделия, прочно закрепленные сваркой.

Пример 3 — Изделия, прикрепленные с помощью крепежных элементов, таких как винты, гайки, вакуум и т. д.

Примечание 1 — Стационарное изделие может иметь подвижные части.

Примечание 2 — Фрикционные бортики для ванн и фрикционные сиденья для унитазов исключены из этого определения.

3.10 **направление** (forward): Предполагаемое направление движения, указанное производителем в инструкции по эксплуатации.

3.11 **прогнозируемое ошибочное использование** (foreseeable misuse): Ошибочное использование, которое можно рационально прогнозировать.

3.12 **передвижное изделие** (hand-held product): Вспомогательное изделие, предназначенное для поддержки рукой при обычном использовании.

3.13 **уход на дому** (home care): Уход, оказываемый в домашних условиях, в которых вспомогательное средство используется для облегчения или компенсации травмы, инвалидности или заболевания.

Примечание 1 — См. МЭК 60601-2-52:2010, пункт 201.3.204.

3.14 **учреждение** (institution): Созданное или организованное общество, как правило, при наличии собственных помещений.

Пример — Больница, реабилитационное учреждение, интернатное учреждение или учебное заведение.

3.15 **предполагаемое использование; предполагаемая цель** (intended use, intended purpose): Использование продукта, процесса или услуги, предназначенных для медицинских целей, в соответствии со спецификациями, инструкциями и информацией, предоставленными производителем.

[ИСО 14971:2007, определение 2.5, пересмотрено]

3.16 **максимальное усилие** (maximum load): Максимальное допустимое усилие, указанное изготовителем.

3.17 **максимальная масса пользователя** (maximum user mass): Максимально допустимая масса пользователя, указанная изготовителем и предназначенная для поддержки вспомогательным изделием.

3.18 **передвижное изделие** (mobile product): Переносное оборудование, предназначенное для перемещения из одного места в другое при помощи собственных колес или аналогичных средств.

3.19 **нормальное использование** (normal use): Использование изделия, процесса или услуги в соответствии со спецификациями, инструкциями и информацией, предоставленными производителем, не только для медицинского применения, но и для технического обслуживания, транспортирования и т. д.

3.20 **пользователь** (occupant): Человек внутри или на вспомогательном изделии с опорной поверхностью.

3.21 **оператор** (operator): Лицо, управляющее вспомогательным средством.

Примечание 1 — Оператором может быть либо лицо с ограничением жизнедеятельности или помощник.

3.22 **постоянная деформация** (permanent deformation): Изменение формы или структуры ранее нормально сформированной детали, которая останется измененной по завершении испытания.

3.23 **передвижное средство** (portable product): Переносное изделие, предназначенное для перемещения из одного места в другое во время транспортирования.

3.24 **общественное использование** (public use): Использование изделия в среде, доступной для всех.

Примечание 1 — Общественное пользование включает зоны для купания, общественные туалеты и т. д.

3.25 **риск** (risk): Сочетание вероятности причинения вреда и тяжести этого вреда.

3.26 **состояние одиночной неисправности** (single fault condition): Состояние, при котором одно средство снижения риска неисправно или присутствует одно ненормальное состояние.

3.27 **статическое средство** (static product): Изделие, предназначенное для стационарного использования с пассажиром на месте по назначению и не предназначенное для крепления к опоре или иного закрепления в определенном месте.

Примечание 1 — Статическое изделие может быть портативным при обычном использовании. Во время применения по назначению у него могут быть движущиеся части.

Примечание 2 — В комплект входят доски для ванны и сиденья для унитаза, закрепленные с помощью трения.

3.28 **система** (system): Набор или серия взаимосвязанных или взаимозависимых частей или объектов, действующих совместно для достижения общей цели или обеспечивающих те результаты, которые невозможны при действии человека в одиночку.

3.29 **цикл испытания** (test cycle): Полный цикл для намеченного действия.

3.30 **пользователь** (user): Лицо, использующее/занимающее устройство.

Примечание 1 — Пользователем может быть либо лицо с ограничением жизнедеятельности, либо помощник.

4 Общие требования и методы испытаний

4.1 Анализ рисков

Оценку безопасности АРРН следует осуществлять путем выявления опасностей и оценки рисков, связанных с ними, с использованием процедур, указанных в ИСО 14971 и, при необходимости, в ИСО 12100.

Если АРРН предназначено производителем для использования в сочетании с устройством, которое не является медицинским устройством, АРРН должно вести себя безопасным образом, как система.

Примечание — В случае определенных нарушений может возникнуть необходимость в более высоких уровнях безопасности оборудования, используемого для компенсации последствий таких ограничений.

4.2 Предполагаемая производительность

АРРН должно обладать достаточной прочностью и долговечностью для того, чтобы выдерживать все усилия, ожидаемые при использовании по назначению. Это должно быть подтверждено применением, при необходимости, ссылок на соответствующую клиническую и научную литературу в дополнение к требованиям настоящего стандарта, расчетам прочности и/или долговечности, к соответствующим стандартам испытаний и к результатам их испытаний.

Предполагаемые характеристики, включая, при необходимости, прочность, долговечность и устойчивость к опрокидыванию, должны быть описаны в информации, предоставляемой производителем, в которой изложены его функциональные характеристики, область(и) применения и условия использования.

Информация, предоставляемая производителем, должна включать, при необходимости, ссылки на определенную клиническую и научную литературу, любые расчеты прочности и/или срока службы, соответствие установленным стандартам испытаний и результаты их испытаний.

4.3 Клиническая оценка и исследование

Если управление рисками демонстрирует необходимость клинической оценки, то клиническая оценка должна быть проведена для всех АРРН. Если в рамках оценки соответствия продукции клини-

ческая оценка требует проведения клинического исследования, то клиническое исследование должно соответствовать требованиям ИСО 14155. Клиническую оценку всегда следует проводить перед клиническим исследованием.

4.4 Вспомогательные средства для личной гигиены, которые можно демонтировать

Если предполагается, что АРРН может быть демонтировано для хранения или транспортирования, то должна быть исключена возможность его сборки таким образом, чтобы это представляло угрозу.

4.5 Крепеж

Крепежные элементы, которые ослаблены или сняты для обеспечения такого демонтажа, не должны быть крепежными элементами одноразового использования.

Пример — Крепежных элементов одноразового использования включают шурупы для дерева и саморезы. Болты являются примерами тех крепежных элементов, которые можно использовать более одного раза.

Все несущие крепежные детали должны быть либо самоблокирующимися, либо снабжены блокирующим устройством для предотвращения случайного отсоединения.

4.6 Средства для предотвращения выпадения

Если существует риск выпадения пользователя из изделия во время обычного использования, должны быть предусмотрены средства предотвращения выпадения пользователя, например боковые поручни, ремень безопасности или ремни безопасности.

4.7 Масса пользователя/максимальное усилие

Должна быть объявлена максимальная масса пользователя. Если максимальное усилие различное, то это должно быть заявлено производителем.

Все изделия, предназначенные для поддержки пассажира/пользователя в сидячем или лежащем положении, должны быть способны поддерживать человека массой тела не менее 100 кг.

Если производитель предназначил изделие для использования лицом массой тела менее 100 кг, в конструкции изделия должно быть предусмотрено ограничение для предотвращения возможного неправильного использования лицом большей массой тела, чем указано производителем.

Максимальную массу пользователя и максимальное усилие, указанные производителем, следует использовать в соответствующих методах испытаний настоящего стандарта.

Когда при проведении испытания задействована загрузочная площадка, ее массу следует учитывать при определении испытательной величины усилия.

4.8 Устройство

4.8.1 Средство для приложения усилия от 25 до 2000 Н с точностью плюс 5 % и скоростью приложения менее 5 Н/с.

4.8.2 Означает измерение усилия с точностью плюс 5 % с шагом 1 Н в диапазоне от 0 до 2000 Н (иногда может потребоваться большее усилие, чем 2000 Н).

4.8.3 Означает измерение расстояния в диапазоне от 0 до 3 м с точностью ± 5 мм или ± 2 % в зависимости от того, что больше.

4.8.4 Средство для измерения углов с точностью плюс $0,25^\circ$.

4.8.5 Средства измерения крутящего момента с точностью плюс 5 % с шагом 1 Нм в диапазоне от 0,5 до 10 Нм.

4.8.6 Средства измерения уровней и частот звука, откалиброванные в соответствии с инструкциями производителя, с использованием акустического калибратора класса 1, как описано в ИСО 3746, с точностью плюс 3 дБ(А).

4.8.7 Твердая горизонтальная и наклонная испытательная плоскость достаточного размера для поддержки АРРН во время испытания, чтобы вся поверхность находилась между двумя воображаемыми параллельными плоскостями на расстоянии 5 мм друг от друга. Можно использовать нерегулируемую испытательную плоскость, если она установлена под правильным углом.

Примечание — Доска из твердой древесины (например, > 600 кг/м³) является примером используемого материала.

4.8.8 **Стопоры** для мобильных приложений должны быть не меньше половины диаметра колеса и не больше диаметра колеса. См. рисунок 1.

Для статического АРРН стопор должен быть сконструирован таким образом, чтобы предотвращать скольжение АРРН, а не его опрокидывание. Высота стопора должна быть не более 12 мм. В том случае, когда из-за конструкции АРРН требуется стопор размером более 12 мм, он должен быть минимальной высоты, необходимой для предотвращения скольжения АРРН.

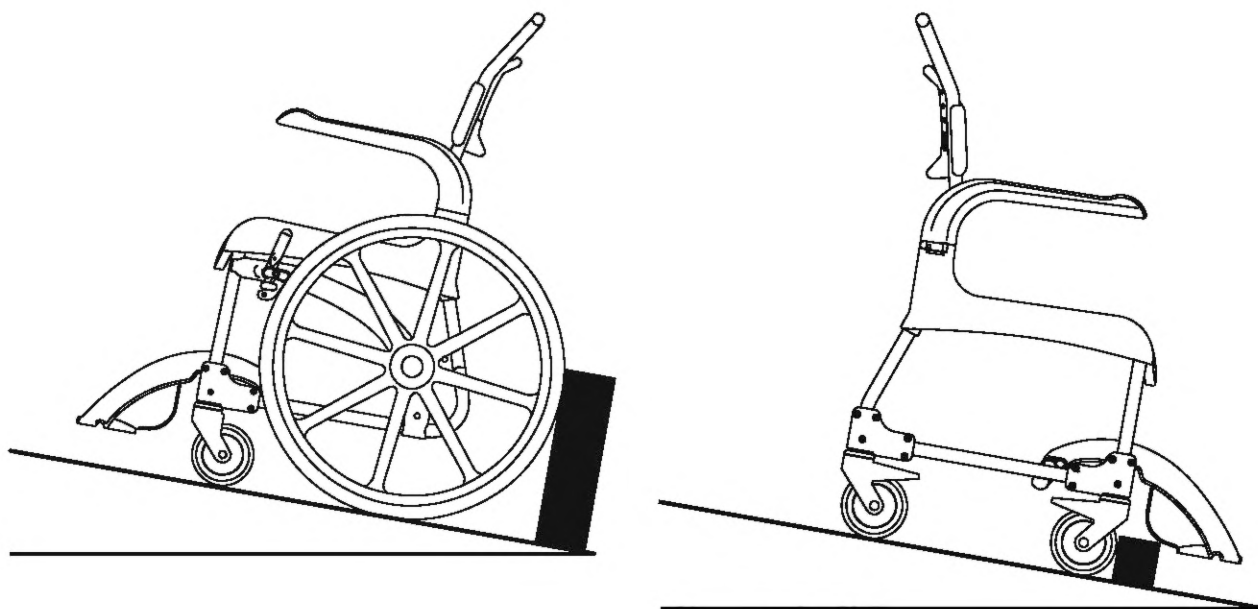


Рисунок 1 — Стопор колеса

4.8.9 **Оборудование, способное имитировать части человеческого тела**, используемые на практике (например, испытательные пальцы).

4.8.10 **Оборудование для приложения усилия** с незначительным динамическим коэффициентом.

Примечание — Незначительное динамическое усилие — это небольшое усилие, которое не оказывает существенного влияния.


4.8.11 **Оборудование для измерения давления воды, масла и воздуха** с точностью плюс 5 %.

4.8.12 **Загрузочные площадки, как показано ниже**

4.8.12.1 Вогнутая загрузочная площадка

Загрузочное устройство должно быть способным прикладывать усилия (сжимающие или растягивающие) в диапазоне от 15 до 1000 Н с точностью плюс 3 %.

Вогнутая загрузочная площадка для статических усилий должна быть изготовлена из металла или твердой древесины, как показано на рисунке 2.

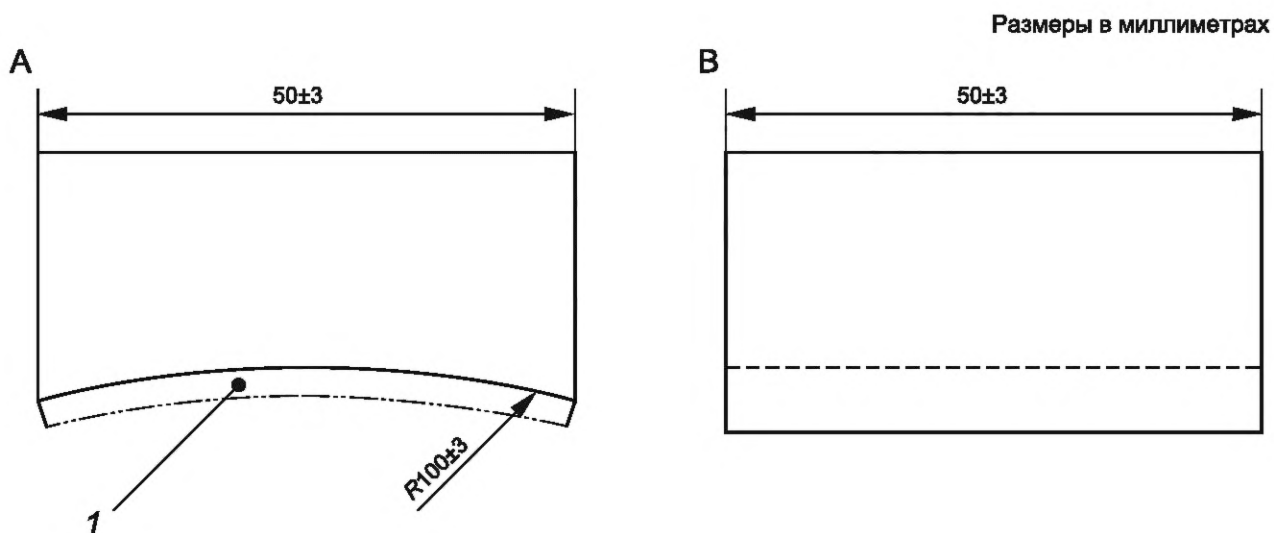

А — вид спереди; В — вид сбоку; 1 — погрузочная поверхность


Примечание — Погрузочная поверхность может быть покрыта нескольким материалом толщиной не более 3 мм, например пенопласт.

Рисунок 2 — Вогнутая площадка для статических усилий

4.8.12.2 Выпуклая загрузочная площадка

Загрузочное устройство должно быть способным прикладывать усилия (сжимающие или растягивающие) в диапазоне от 15 до 1000 Н с точностью плюс 3 %.

Выпуклая загрузочная площадка должна быть круглой и изготовлена из металла или твердой древесины, как показано на рисунке 3.

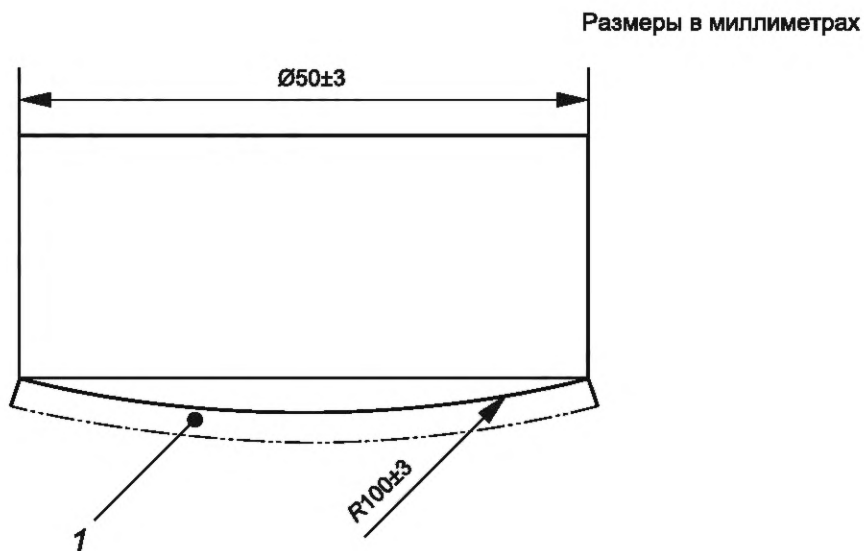

1 — загрузочная поверхность

Примечание — Погрузочная поверхность может быть покрыта нескольким материалом толщиной не более 3 мм, например пенопласт.

Рисунок 3 — Выпуклая загрузочная площадка для статических усилий

4.8.12.3 Загрузочная площадка для задней опоры

Загрузочное устройство должно быть способным прикладывать усилия (сжимающие или растягивающие) в диапазоне от 15 до 2000 Н с точностью плюс 3 %.

Загрузочная площадка должна быть изготовлена из металла или твердой древесины и иметь форму и размеры, как показано на рисунке 4.

Размеры в миллиметрах


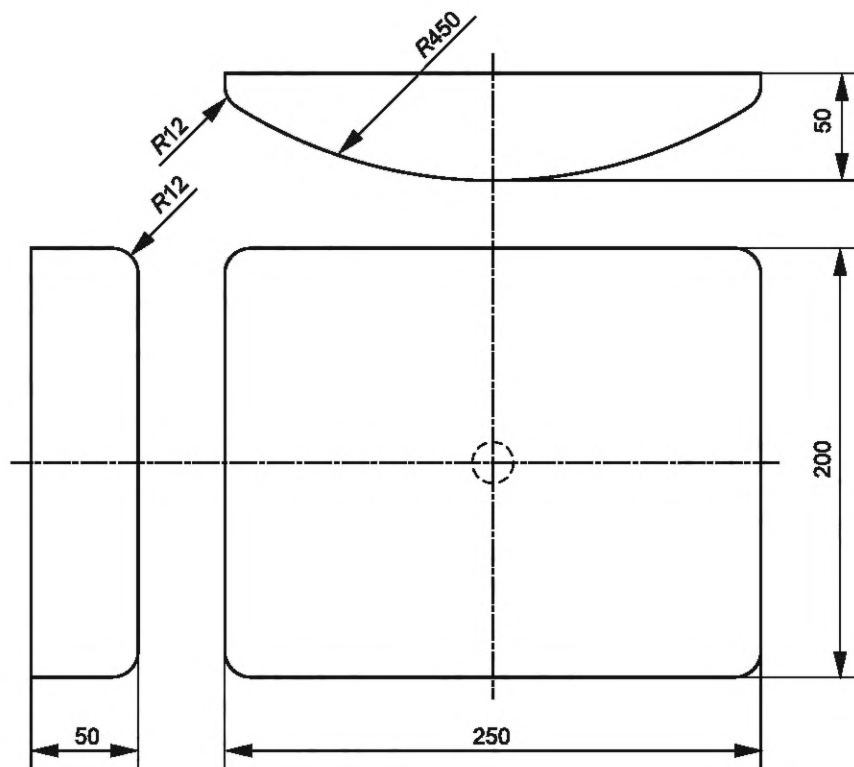


Рисунок 4 — Загрузочная площадка для поддержки спины

4.8.12.4 Площадка для загрузки сиденья

Загрузочная площадка должна быть изготовлена из металла или твердой древесины и иметь форму и размеры, как показано на рисунке 5, с закругленными краями, различными диаметрами в зависимости от испытуемого изделия.

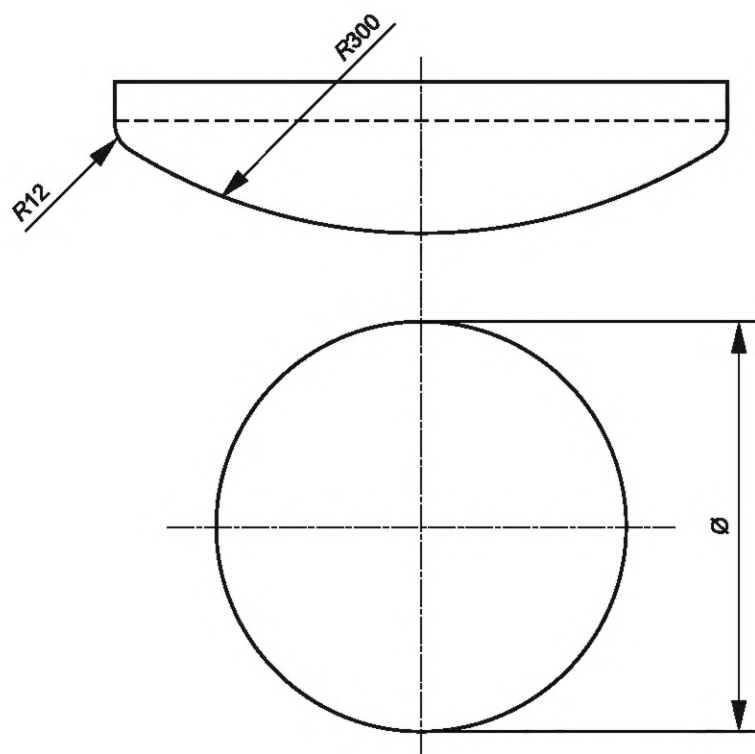


Ø — 350, 250 или 200 мм

Рисунок 5 — Загрузочная площадка для опоры сиденья

4.8.13 **Маятник для испытания на удар задней опоры**, который должен соответствовать требованиям, показанным на рисунках 6 или 7.


Общая масса мяча должна составлять $(25 \pm 0,5)$ кг.

Размеры в миллиметрах

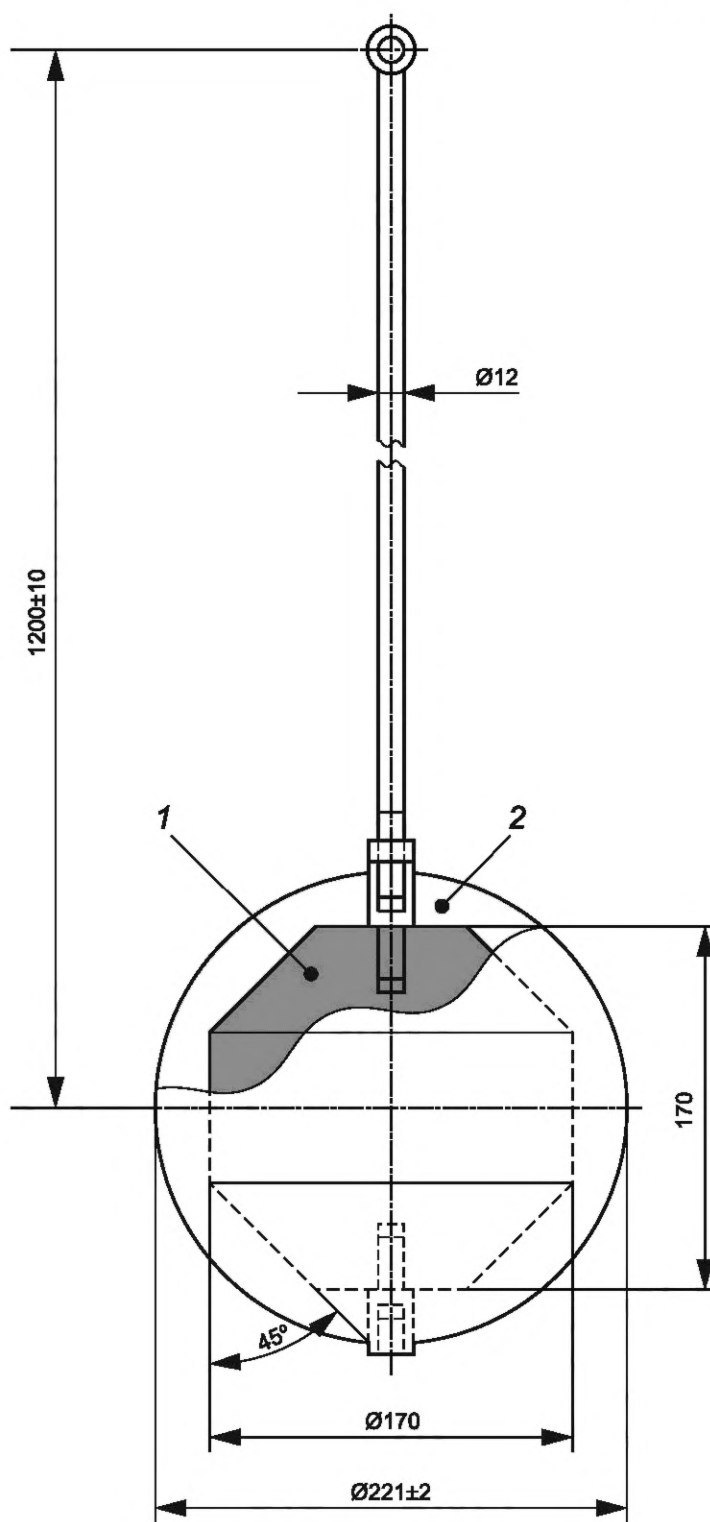

1 — стальной блок; 2 — полиуретан со следующими характеристиками: плотность — 1150 кг/м^3 ; твердость — 80+ по шору А; упругость — 20 %

Рисунок 6 — Маятник для испытания на удар задней опоры

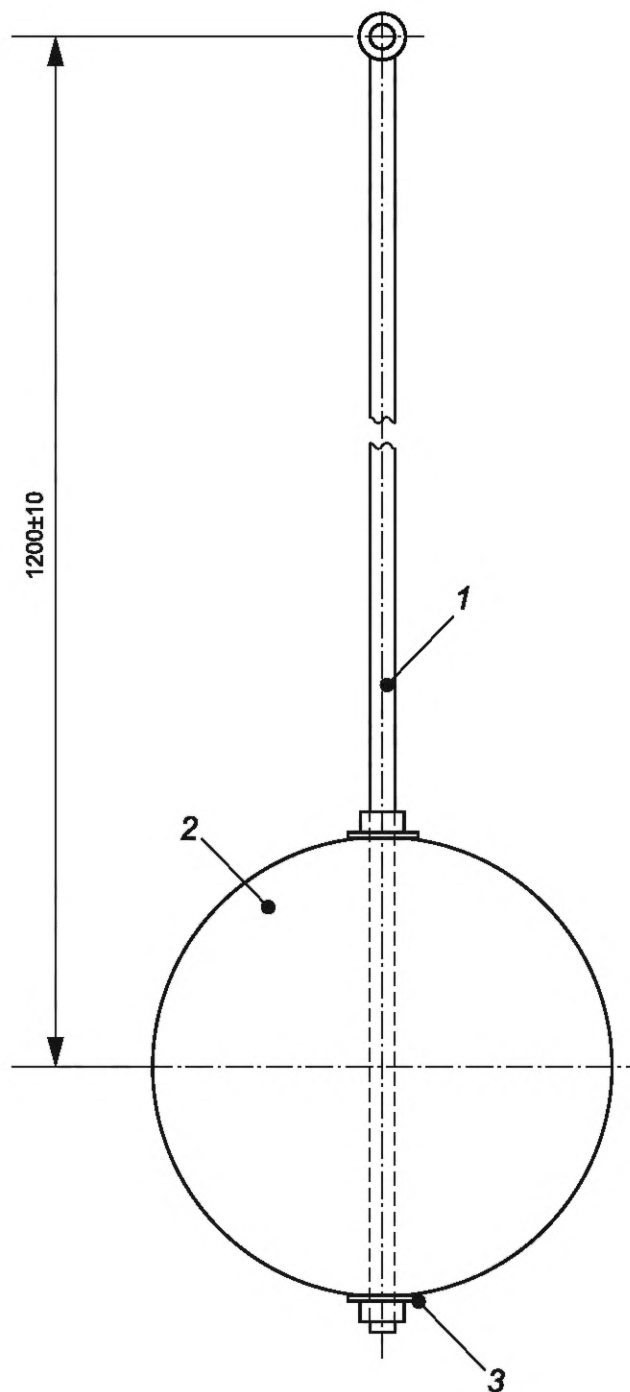

1 — резьбовой стержень; 2 — футбольный мяч ассоциации регулирования (футбольный мяч) размером 5, диаметром 220 мм, заполненный свинцовой дробью диаметром $(3,5 \pm 1)$ мм и пенопластом высокой плотности с закрытыми ячейками плотностью (75 ± 15) кг/м³ (ИСО 845); твердость (325 ± 60) Н (ИСО 2439); 3 — стиральная машина

Рисунок 7 — Альтернативный маятник поддержки спины

4.8.14 Маятник для испытания сиденья унитаза на удар со следующими свойствами:

- а) общая масса $(10 \pm 0,25)$ кг;
- б) расстояние d от оси вращения до центра удара $(1000 \pm 0,005)$ м.

Можно использовать маятник для испытания на удар, показанный на рисунке 8, хотя для различных компоновок и размеров могут потребоваться другие формы.

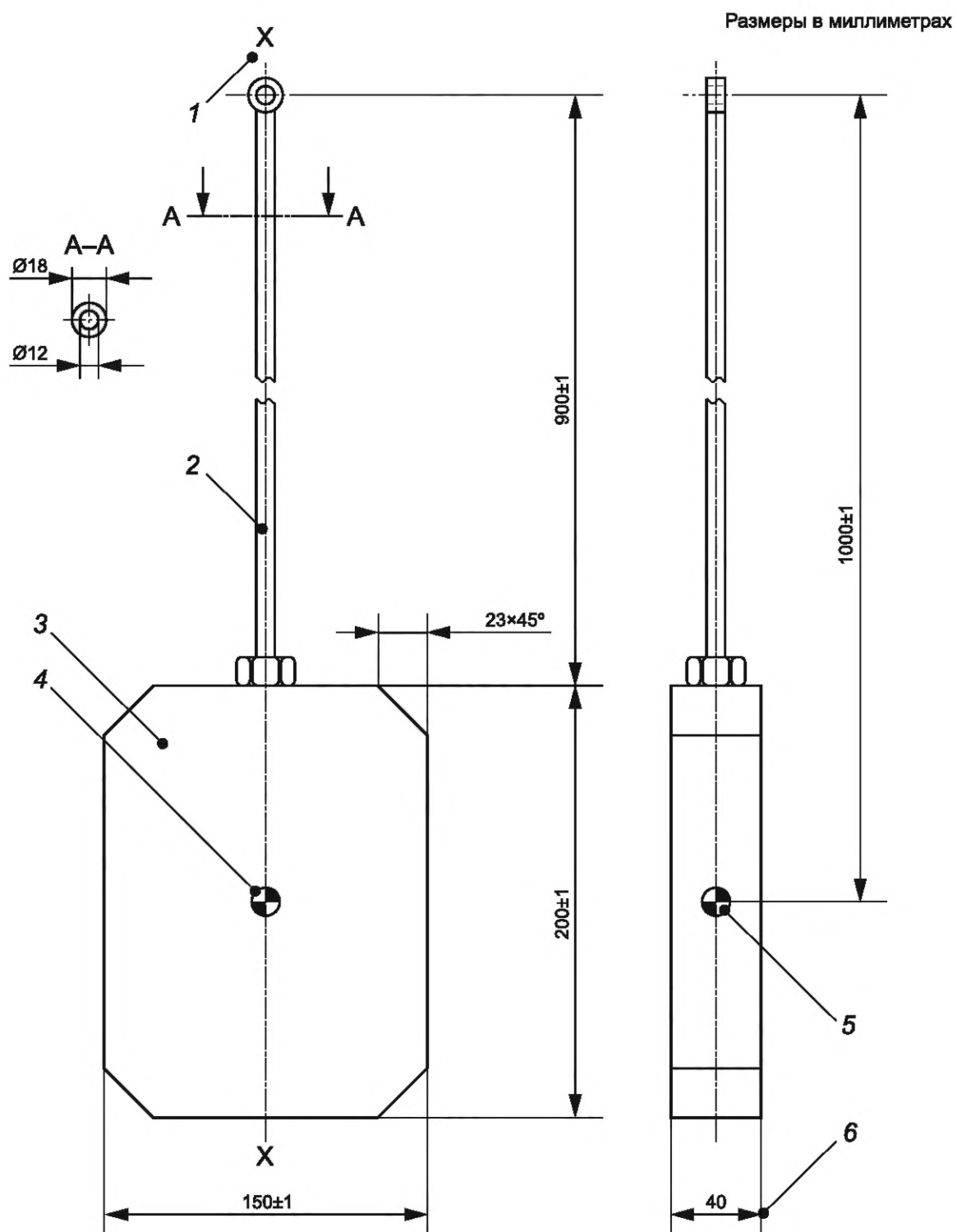



Рисунок 8 — Пример маятника для испытания туалетного сиденья на удар

4.8.15 **Опорные стойки**, плоские, из соответствующих материалов. Высота должна составлять $(1 \pm 0,1)$ м; ширина верхней поверхности — (50 ± 5) мм, а боковая стенка должна быть перпендикулярной верхней поверхности (см. рисунок 9). Стойки должны иметь регулируемую ширину и угол наклона (см. издавелека снизу и сверху), чтобы обеспечить возможность размещения различных конструкций.

Должна быть предусмотрена возможность регулировки верхней поверхности таким образом, чтобы она всегда оставалась горизонтальной при использовании под разными углами.

Пример — Ванна может иметь наклонные стороны, которые могут имитировать опорные стойки.

Размеры в миллиметрах

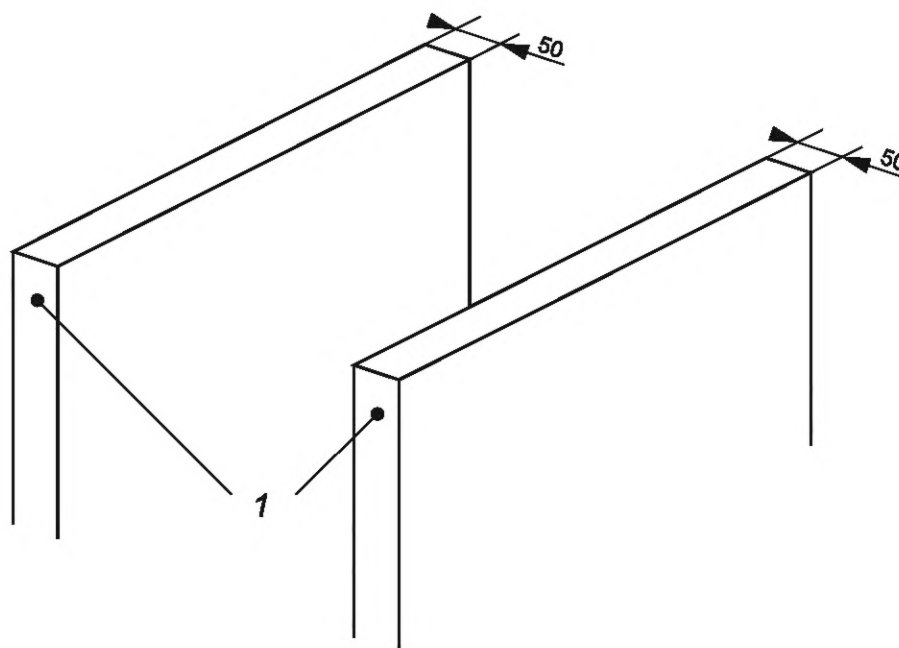

1 — опорная стойка


Рисунок 9 — Опорная стойка

4.8.16 **Ударный элемент для опоры лежачего** с нижеприведенными свойствами.

а) Корпус ударного элемента имеет диаметр приблизительно 200 мм и отделен от ударной поверхности спиральными пружинами сжатия. Тело свободно перемещается по линии, перпендикулярной плоскости центральной области поражающей поверхности.

б) Общая масса узла должна составлять $(25 \pm 0,1)$ кг, а корпус и связанные с ним детали (за вычетом пружин) должны иметь массу $(17 \pm 0,1)$ кг.

с) Суммарная сила пружины (для системы) должна составлять $(6,9 \pm 1)$ Н/мм, а общее сопротивление трению движущихся частей — от 0,25 до 0,45 Н. Когда пружинная система сжимается до усилия (1040 ± 5) Н, оставшееся расстояние сжатия должно быть не менее 60 мм. Поражающая поверхность должна представлять собой жесткий круглый предмет диаметром (200 ± 5) мм, поверхность которого имеет выпуклую сферическую кривизну радиусом 300 мм с радиусом передней кромки 12 мм. См. рисунок 10.

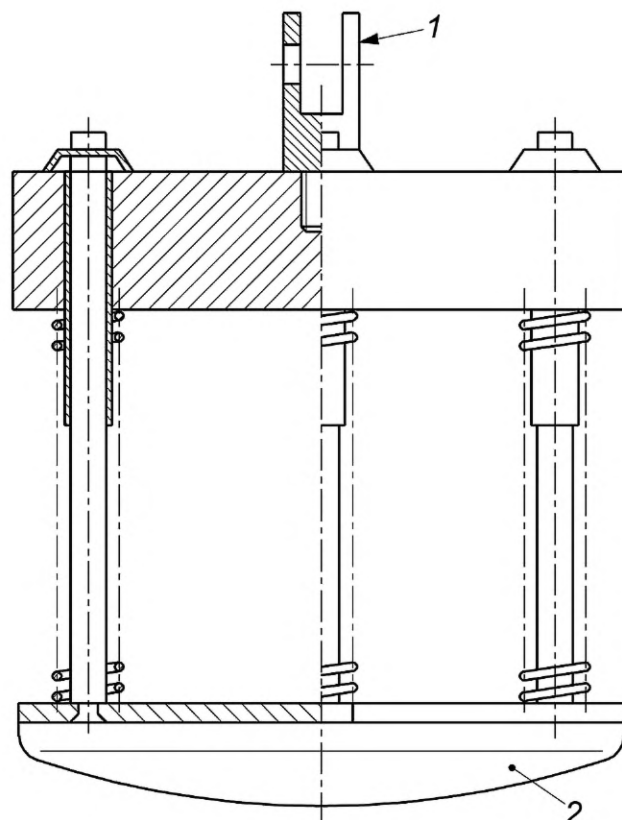

1 — шарнир подъемного устройства, не препятствующий свободному падению; 2 — поражающая поверхность

Рисунок 10 — Ударный элемент лежащей опоры

4.9 Условия проведения испытаний

Продукт должен быть протестирован в состоянии поставки (заказчику). Однако, если изделие имеет многоцелевую конструкцию, которая может быть собрана в различных форматах, оно должно быть собрано в соответствии с инструкциями производителя. Если продукт предназначен для использования в различных комбинациях, то должна быть протестирована наиболее неблагоприятная комбинация. Если изделие поставляют в разобранном виде, перед испытанием оно должно быть собрано в соответствии с инструкциями производителя.

Пример — Сиденье для душа, превращенное в сиденье для унитаза.

Если не указано иное, испытания следует проводить в нормальных условиях внутри помещений:

- при температуре от 15 °C до 30 °C;
- при относительной влажности от 20 % до 85 %.

Все испытания должны быть проведены на одном изделии. Новый продукт выбирают, если исходный тестовый объект выходит из строя и не подлежит ремонту. Некоторые тесты, имеющие отношение к безопасному функционированию продукта, возможно, придется повторить на новом продукте. Это зависит от производителя продукта, который должен учитывать в каждом отдельном случае.

Если продукт тестируют в испытательном центре, решение о его пригодности следует принимать в сотрудничестве между третьей стороной и производителем.

Если иное не указано в конкретном пункте, порядок проведения испытаний не имеет значения.

5 Материалы

5.1 Общие положения

Производителям следует, по возможности, использовать те материалы, которые могут быть переработаны для дальнейшего использования. В инструкции по эксплуатации должно быть указано, какие детали могут быть переработаны.

5.2 Воспламеняемость

5.2.1 Общие положения

Производители должны учитывать условия и методы использования, которым будет подвергнуты АРРН или любые материалы, которые обычно используют в сочетании с этим АРРН, и принимать соответствующие меры для минимизации любой пожарной опасности.

Производитель должен включить в инструкции по эксплуатации предупреждение о безопасных сочетаниях огнестойких и негорючих материалов.

Примечание — См. руководящие указания в В.5.2.

5.2.2 Литые детали, используемые в качестве корпусов для электрооборудования

Если опасность потенциально может быть вызвана электрическим компонентом, испытание корпуса формованной детали должно быть проведено в соответствии с FV-1 МЭК 60695-11-10 или выше. Если изделие относится к тому типу, от которого инвалид не может убежать или определить как опасную ситуацию, оно должно быть согласно FV-0.

5.2.3 Детали с мягкой обивкой и формованные детали

Если производитель утверждает, что детали с мягкой обивкой устойчивы к воспламенению от сигареты, то при испытании материалов, используемых для деталей с мягкой обивкой вспомогательного изделия, в соответствии с ИСО 8191-1 и ИСО 8191-2 не должно происходить постепенного тлеющего воспламенения и воспламенения пламенем.

Если производитель утверждает, что формованные детали устойчивы к воспламенению от небольшого пламени, например от спички, при испытании в соответствии с МЭК 60695-11-10 не должно происходить постепенного тлеющего воспламенения и воспламенения пламенем.

5.3 Биосовместимость и токсичность

Материалы, которые вступают в контакт с человеческим телом, должны быть оценены на биосовместимость в соответствии с рекомендациями ИСО 10993-1.

Оценка должна также учитывать предполагаемое использование и контакты тех, кто занимается обслуживанием пользователей. Результаты оценки должны быть включены в анализ рисков (см. 4.1).

Вспомогательные изделия должны быть спроектированы и изготовлены таким образом, чтобы свести к минимуму риски, связанные с утечкой веществ из вспомогательного изделия. Особое внимание следует уделять тем веществам, которые являются канцерогенными, мутагенными или токсичными для репродукции, а также другим веществам подобного рода (БВНЧСЗ).

Оценка материалов должна быть проведена в соответствии с указаниями, приведенными в приложении С.

5.4 Инфекция и микробиологическое загрязнение

5.4.1 Очистка и дезинфекция

Если АРРН предназначено для очистки и/или дезинфекции, то метод и подходящие чистящие или дезинфицирующие материалы должны быть описаны в информации, предоставленной производителем.

Примечание — См. руководящие указания в В.5.4.1.

Если АРРН предназначено для очистки с помощью автоматических систем мойки или ручной струйной/паровой промывки, то компоненты процедуры, такие как температура, давление, расход и значение pH чистящего/ополаскивающего раствора, должны быть описаны в инструкциях по применению. При возможности применения на практике АРРН должно быть маркировано соответствующими символами, обозначающими метод очистки. См. примеры маркировки и пример тестирования АРРН для машинной стирки в В.5.4.1.

5.4.2 Устойчивость к колебаниям температуры

Если АРРН предназначено для нагрева в процессе дезинфекции или промывки, оно должно пройти нижеприведенное испытание.

Испытуемый образец подвергают воздействию максимальной температуры плюс 2 °С во время процесса промывки и дезинфекции, как описано производителем, а затем охлаждают до температуры 30 °С. Этот цикл чередования температур повторяют десять раз.

Для продуктов, предназначенных для дезинфекции с помощью тепла, можно использовать одну из следующих трех температур и продолжительности экспозиции:

- а) температура 90 °С в течение 1 мин;
- б) температура 85 °С в течение 3 мин;
- с) температура 80 °С в течение 10 мин.

Испытание следует проводить перед любыми испытаниями изделия на прочность и/или долговечность.

После испытания изделие должно соответствовать следующим требованиям: покрытие или любая надлежащая маркировка на изделии не должны отрываться от основного листового металла, иметь пузыри или другие изменения, снижающие качество.

5.4.3 Животная ткань

Если устройство изготовлено с использованием тканей животного происхождения или их производных, должна быть проведена оценка риска и задокументирована в соответствии с ИСО 22442-1.

Примечание — См. руководящие указания в В.5.4.3.

5.5 Устойчивость к коррозии

Риск коррозии, влияющий на безопасность пользователя или помощника, должен быть оценен в ходе анализа рисков. Вспомогательные изделия, которые, как установлено, подвержены риску коррозии, должны быть достаточно защищенными от коррозии, что может быть подтверждено с помощью испытания продолжительностью 72 ч солевым распылением в соответствии с ИСО 9227.

6 Издаваемый звук и вибрация

6.1 Шум и вибрация

Если шум и вибрация не являются частью предполагаемой деятельности АРРН, оценка опасностей и помех, связанных с шумом и вибрацией, должна быть осуществлена в ходе анализа рисков (см. 4.1).

Измерения шума от АРРН с питанием должны проводить в соответствии с ИСО 3746, а результат измерения отражают в предпродажной информации в инструкции по эксплуатации.

Примечание — См. руководящие указания в В.6.1.

6.2 Уровни звукового давления и частоты звуковых сигнализаторов

Частота должна находиться в пределах от 500 до 3000 Гц.

Примечание — Нормальный слух обычно находится в диапазоне частот от 500 до 16 000 Гц. Для людей с нарушениями слуха диапазон будет меньше, а в тяжелых случаях — от 500 до 3000 Гц.

А-взвешенные уровни звукового давления должны составлять не менее 65 дБ для звуковых сигналов тревоги.

Сигнал тревоги или сигнал обратной связи должен отличаться от шума самого устройства либо по частоте, либо по уровню звука.

7 Электромагнитная совместимость

7.1 Общие положения

АРРН, содержащее электрические или электронные устройства/компоненты, должно соответствовать МЭК 60601-1-2 и, кроме того, требованиям 7.2, 7.3 и 7.4.

7.2 Излучение

При испытании в соответствии с CISPR 11 оборудование должно соответствовать пределам выбросов излучения, указанным в CISPR 11 для группы 1, оборудование класса В.

АППН должно соответствовать требованиям МЭК 61000-3-2 и МЭК 61000-3-3, если применимо.

7.3 Помехозащищенность

В дополнение к требованиям МЭК 60601-1-2:2014 АППН также должно быть испытано при напряженности поля 10 В/м (среднеквадратичное значение немодулированной несущей) в диапазоне частот от 800 МГц до 2,5 ГГц. Испытание проводят в соответствии с МЭК 61000-4-3.

Если в результате применения этого испытания АППН представляет опасность или происходит непреднамеренная работа АППН, то АППН признают не прошедшим испытание.

Примечание 1 — Может потребоваться оценить риск, связанный с устройством, при использовании в непосредственной близости от мобильного(ых) телефона(ов) или других форм передатчика. В этом случае можно применять более высокие значения напряженности поля в более широком диапазоне частот.

Примечание 2 — АППН используют в разных средах и могут быть применены совместно с другим электронным оборудованием. Электромагнитная совместимость (ЭМС) должна быть тщательно подобрана в соответствии с предполагаемым использованием АППН.

7.4 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты

При испытании оборудования в соответствии с МЭК 61000-4-8 уровень испытания 4 при любом напряжении с использованием либо 50 или 60 Гц:

- а) оборудование должно вести себя безопасно в присутствии применяемого поля;
- б) устройства с электрическим приводом или функции с электрическим приводом не должны перемещаться в присутствии приложенного поля.

Проводят непрерывное испытание на помехозащищенность в полевых условиях, указанное в МЭК 61000-4-8, на оборудовании в качестве настольного оборудования. Испытание оборудования выполняют в течение не менее 1 мин для каждой ориентации применяемого поля.

Примечание — См. руководящие указания в В.7.4.

8 Электробезопасность

8.1 Общие положения

АППН должно соответствовать требованиям в отношении электробезопасности, изложенным в таблице 1. АППН, подключенное к сети, должно быть либо класса I (защитное заземление), либо класса II (двойная изоляция). Для АППНs, которые реализованы производителем как медицинское электрооборудование и предназначены для использования в условиях домашнего обслуживания и которые не устанавливают постоянно, допускается только класс II в соответствии с МЭК 60601-1-11.

Примечание — Национальные строительные нормы могут иметь более четкие требования.

Таблица 1 — Применимые стандарты электробезопасности

Испытания АППНs, подпадающих под действие МЭК 60601-1:2005	Испытания АППНs, подпадающих под действие МЭК 60335-1
По МЭК 60601-1 По МЭК 60601-1-11 По МЭК 60601-2-xx	По МЭК 60335-1 По МЭК 60335-2-xx

8.2 Электрические системы

Электрическая система может состоять из нескольких компонентов, каждый из которых испытан в соответствии с различными стандартами.

Применимость стандартов к компонентам электрических систем приведена в таблице 1.

8.3 Безопасное расположение

Возможность установки АРРН в положение, обеспечивающее безопасное перемещение пользователя в случае единичного сбоя или потери питания, должна быть обеспечена на постоянной основе.

8.4 Безопасность при одной неисправности

АРРН должно быть спроектировано и изготовлено таким образом, чтобы оно оставалось безопасным в случае возникновения одной неисправности, или риск должен оставаться приемлемым, как определено в процессе анализа рисков в соответствии с МЭК 60601-1:2005, 4.7.

8.5 Устройство активации с автоматическим возвратом в исходное положение

Электрически управляемые движения должны быть возможны только при активации устройства (устройств) управления, которые иницируют и поддерживают работу устройства только до тех пор, пока приводится в действие ручное управление, и когда ручное управление автоматически возвращается в положение «Стоп» или «Выключено» при отпуске.

Примечание — Движения, не приводимые в действие электричеством (например, рукой или ногой), считают соответствующими этому пункту, если масса и скорость позволяют адекватно контролировать, например, позиционирование, не создавая неприемлемого риска.

8.6 Функция аварийной остановки

Если анализ рисков показывает, что существует риск для пользователя или другого лица, связанного с АРРН, при сжатии или появлении единичной неисправности, которая может создать угрозу безопасности, должна быть произведена аварийная остановка, как указано в МЭК 13850, совместно со следующими требованиями:

- АРРН должно быть сконструировано таким образом, чтобы предотвратить случайное повреждение. Если это невозможно, АРРН должно прекратить движение;
- устройство аварийной остановки должно быть легкодоступным для оператора и предотвращать опасную ситуацию одним действием;
- стопорное устройство должно поддерживать оборудование в безопасном положении, но не мешать каким-либо основным рабочим функциям, как определено производителем;
- устройство аварийной остановки должно удерживать АРРН в остановленном положении до тех пор, пока оно не будет освобождено в соответствии с установленной процедурой;
- при анализе рисков следует учитывать безопасный тормозной путь;
- предусмотренная процедура отключения аварийной остановки должна отличаться от движения, необходимого для активации аварийной остановки.

8.7 Непрерывность электроснабжения

Если безопасность пользователя АРРН, работающего от электросети, зависит от бесперебойного питания, АРРН должно быть обеспечено следующим уровнем защиты:

- в случае отключения питания должна быть возможность вернуть АРРН в положение, гарантирующее безопасное перемещение, с использованием вспомогательного источника питания, или обеспечить достаточную мощность для принятия дальнейших действий;
- при отключении питания к АРРН автоматически подключается вспомогательный источник питания и помощнику передается сигнал о том, что произошел перебой в подаче питания. Вспомогательный источник питания должен обеспечивать достаточную мощность для выполнения дальнейших действий;
- если предполагаемый оператор способен самостоятельно разумно и своевременно отреагировать на отключение питания, так как вспомогательный источник питания и средства для подачи сигнала передали оператору информацию о том, что произошел сбой в подаче питания, вспомогательный источник питания должен обеспечивать достаточную мощность для принятия дальнейших действий;
- при возможности, следует предусмотреть неэлектрический метод работы, который снижает риск для пользователей до приемлемого уровня до тех пор, пока их не разрешено перемещать из АРРН или пока не будет восстановлено электропитание вместе со средством сигнализации об отключении электроэнергии оператору/помощнику, назначенному для таких аварийных операций.

Если при сбое в сети имеется резервная батарея, она должна начать незамедлительно функционировать и иметь время работы, достаточное для того, чтобы пользователь смог обеспечить безопасное реагирование.

Примечание 1 — Своевременной реакцией может быть обеспечение доступа к питающей сети без прерывания бесперебойного питания.

Если безопасность человека, использующего АРПН с внутренним питанием, зависит от непрерывности источника питания, должны быть предусмотрены средства информирования оператора о критическом заряде источника питания. В момент достижения критического заряда должен быть доступен либо вспомогательный источник достаточной мощности, либо достаточный резервный заряд внутреннего источника питания для обеспечения своевременного реагирования.

Пример — Средства информирования оператора о критическом заряде могут быть визуальными или слуховыми (например, символы/индикаторы и/или звуковые сигналы).

Примечание 2 — Своевременной реакцией может быть либо подзарядка/замена внутреннего источника питания без прерывания бесперебойного питания, либо возврат в безопасное место, обеспечивающее возможность подзарядки/замены внутреннего источника питания.

8.8 Вспомогательные средства на батарейках для личной гигиены

8.8.1 Корпус аккумулятора

Корпуса аккумуляторных батарей должны обеспечивать защиту, исключающую возникновение нижеприведенных рисков для безопасности.

а) Необходимость и конструкция корпусов аккумуляторных батарей должны быть основаны на анализе рисков (см. 4.1) и должны определять опасности и оценивать риски, связанные:

- 1) с утечкой кислоты и/или других веществ из батареи(ей);
- 2) вентиляцией газов, образующихся во время зарядки и/или использования;
- 3) коротким замыканием батареи(ей),

при эксплуатации в соответствии с условиями эксплуатации.

б) Корпуса, содержащие батареи, из которых во время зарядки или разрядки могут выходить газы, должны вентилироваться.

Примечание — Вентиляция сводит к минимуму риск накопления и воспламенения легковоспламеняющихся газов.

с) Если короткое замыкание батареи может привести к угрозе безопасности, батарея должна находиться в корпусе/отсеке, который предотвращает риск случайного короткого замыкания батареи(ей).

д) Любой корпус/отсек батареи должен собирать и хранить любые жидкости и/или вещества (кроме газов), которые могут вытекать из батареи(ей), указанной(ых) производителем.

е) Материалы, используемые при изготовлении корпусов аккумуляторных батарей, должны быть устойчивы к тем веществам, которые могут вытекать из батареи(ей), указанной(ых) производителем.

8.8.2 Соединение

Если из-за неправильного подключения или замены батареи может возникнуть угроза безопасности, АРПН должно быть оснащено средствами предотвращения неправильной полярности.

8.8.3 Индикатор уровня заряда

Если безопасность человека, использующего АРПН с внутренним питанием, зависит от источника питания, должны быть предусмотрены средства информирования оператора о состоянии заряда источника питания. Во время индикации критического заряда должен быть в наличии достаточный резервный заряд внутреннего источника питания, чтобы обеспечить своевременную реакцию.

Примечание — Своевременной реакцией может быть либо перезарядка, либо замена источника питания без прерывания подачи питания, либо разрешение возврата в безопасное место, обеспечивающее возможность перезарядки/замены внутреннего источника питания.

Должна быть индикация состояния батареи, адаптированная ко всем потребностям операторов с различными функциональными ограничениями, например лиц с нарушением зрения или слуха.

Пример — Звуковая, визуальная или тактильная индикация, четко указывающая на состояние батареи.

Примечание — См. руководящие указания в ИСО/МЭК Руководство 71:2001, таблицы 5 и 6.

8.9 Защита цепи

АРПН должно соответствовать требованиям и методам испытаний для защиты цепи согласно МЭК 60601-1+A1:2012:2005.

Примечание — См. руководящие указания в В.8.9.

8.10 Одежда, подушки с электрическим подогревом и аналогичные адаптивные нагревательные приборы

Одеяло с электрическим подогревом, коврик или аналогичные гибкие нагревательные приборы должны соответствовать требованиям МЭК 60601-2-35 с максимальной температурой согласно таблице 2.

8.11 Попадание жидкостей

Корпуса должны быть классифицированы в соответствии со степенью защиты от вредного проникновения воды, как указано в МЭК 60529.

Соответствие проверяют испытаниями по МЭК 60529 с АРРН, расположенным в наименее благоприятном положении для нормального использования.

АРРНs, не находящиеся в контакте с водой при нормальном использовании или разумно прогнозируемом неправильном применении (например, во время процесса очистки), должны быть защищены, как минимум, до уровня IPX2.

АРРНs, обычно находящиеся в контакте с водой или биологическими жидкостями, должны быть защищены, как минимум, до уровня IPX4, а в общественных местах — как минимум, до уровня IPX5.

АРРНs, временно погружаемые в воду при обычном использовании, должны быть защищены, как минимум, до уровня IPX7.

АРРНs, как правило, погружаемые в воду при обычном использовании, должны быть защищены, как минимум, до уровня IPX8.

Если вода может непреднамеренно попасть в кожух, у жидкостки должен быть способ выйти из кожуха, или жидкость не должна представлять какой-либо опасности.

Проверяют АРРН в течение 5 мин после испытания водой и через 1 ч, чтобы проверить его функции.

9 Переполнение, утечка и попадание жидкостей

9.1 Попадание жидкостей

9.1.1 Требования

Если жидкость может непреднамеренно попасть в корпус, должен быть предусмотрен способ вывода жидкости из корпуса, или жидкость должна быть безопасной.

Оценка опасности, которая может быть вызвана попаданием жидкостей в приложения с неэлектрическим питанием, должна быть осуществлена в ходе анализа рисков (см. 4.1).

Примечание 1 — См. В.9.1.

Примечание 2 — Требования к АРРН с электрическим питанием см. в 8.11.

Примечание 3 — Опасности могут быть вызваны риском возникновения коррозии или размножением бактерий.

9.1.2 Метод испытания

Проверяют наличие способа вывода жидкости из корпуса, с помощью процедур, аналогичных обычным при использовании и обращении с изделием. При возможности наклоняют изделие в разные стороны для того, чтобы убедиться в этом.

9.2 Переполнение и утечка

9.2.1 Общие положения

Требования, приведенные в 9.2.2, не применяют к жидкостям организма, которые могут собираться в АРРН (например, в кресле-туалете), а только к тем веществам, которые являются неотъемлемой частью АРРН или необходимы для его функционирования (например, масло и смазка).

9.2.2 Вещества, которые могут вытекать из АРРН при использовании по назначению и при неисправностях

АРРН должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы свести к минимуму риски, связанные с утечкой веществ из АРРН. Особое внимание должно быть уделено тем веществам, кото-

рые являются канцерогенными, мутагенными или токсичными для репродукции, и веществам, вызывающим предельную озабоченность (BVC8). Оценка следует проводить в соответствии с указаниями, приведенными в приложении С.

Вещества, которые могут вытекать из АРРН, должны быть либо:

- оцененными на биосовместимость в соответствии с рекомендациями, приведенными в МЭК 10993-1 (оценка должна учитывать предполагаемое использование и контакт пользователя, а также тех, кто участвует в уходе за пользователем, в транспортировании и хранении); или
- обеспеченными той защитой, которая сводит к минимуму вероятность того, что такие вещества вызовут биологическую опасность.

Примечание 1 — Вещества, которые могут протекать, включают смазочные материалы и гидравлические жидкости.

Примечание 2 — Примером метода защиты от опасного вещества является помещение батарей в контейнер, изготовленный из кислотостойкого материала.

10 Температуры деталей, соприкасающихся с кожей человека

Анализ рисков (см. 4.1) должен выявлять опасности и оценивать риски, связанные с температурой поверхности деталей, которые могут соприкасаться с кожей человека в предполагаемых условиях эксплуатации.

При анализе рисков следует учитывать:

- а) диапазон температур окружающей среды, ожидаемый при использовании по назначению и предполагаемом неправильном применении.

Примечание — Эти температуры могут включать прямое воздействие солнечных лучей, горячую воду, горячий воздух, сильный холод, сауны и т. д.;

- б) температуры, которые могут возникнуть в результате единичных неисправностей;

с) эргономические данные о допустимых температурах осязаемых поверхностей согласно МЭК 60601-1:2005+A1:2012, таблица 24, адаптированные для использования АРРН людьми с нечувствительной кожей (например, не чувствительной к теплу) и/или поврежденной кожей в течение 10 мин или более. В этом случае максимальная температура не должна превышать 41 °C (см. таблицу 2) при измерении методами испытаний, приведенными в МЭК 60601-1:2005+A1:2012.

Если производитель не может выполнить требование по перечислению с) без ущерба для предполагаемой производительности АРРН, каждое вспомогательное изделие должно быть снабжено предупреждением, указывающим на то, какие поверхности могут нагреваться до более высокой температуры в отличие от приведенных в таблице 2, и описанием мер предосторожности, необходимых для компенсации повышенного риска.

Таблица 2 — Допустимые максимальные температуры при контакте с кожей АРРН (выступающие детали)

Прикладные части АРРН		Максимальная температура ^а , °C		
		Металлы и жидкости	Стекло, фарфор, стекловидный материал	Формованный материал, пластик, резина, дерево
Прикладная часть, имеющая контакт с человеком в течение времени t	$t < 1$ мин	51	56	60
	$1 \text{ мин} \leq t < 10 \text{ мин}$	48	48	48
	$10 \text{ мин} \leq t$	41	41	41
^а Эти предельные значения температуры применимы для здоровой кожи взрослых, но при ограничении температуры на продолжительность более 10 мин также учитывались лица с ограниченными возможностями с чувствительной кожей или без чувствительности. Они неприменимы, когда большие участки кожи (10 % от общей поверхности тела или более) могут соприкасаться с горячей поверхностью, а также в случае контакта кожи с более чем 10 % поверхности головы. В этом случае соответствующие лимиты должны быть определены и задокументированы в файле управления рисками.				

11 Безопасность движущихся и складывающихся деталей

11.1 Сжатие

Если предназначение АРРН или части АРРН не состоит в том, чтобы захватывать, резать, сжимать и т. д., или если предполагаемое использование не может быть достигнуто без такой опасности, как риск сдавливания:

- а) любые движущиеся части, представляющие опасность для безопасности, должны быть снабжены защитными ограждениями, которые могут быть сняты только с помощью инструмента; или
- б) зазор между открытыми частями вспомогательного средства, которые перемещаются относительно друг друга, должен поддерживаться во всем диапазоне перемещения на уровне меньше минимального значения или больше максимального значения, указанного в таблице 3.

Эти измерения следует проводить до и после любых соответствующих испытаний на прочность, долговечность и ударопрочность.

Т а б л и ц а 3 — Безопасные расстояния между движущимися частями

Избегание	Безопасные расстояния для взрослых	Безопасные расстояния для детей ^а
Ловушки для пальцев	Менее 8 или более 25 мм	Менее 4 или более 25 мм
Ловушки для ног	Менее 35 или более 120 мм	Менее 25 или более 120 мм
Ловушки для головы	Менее 120 или более 300 мм	Менее 60 или более 300 мм
Ловушки для гениталий	Менее 8 или более 75 мм	Менее 8 или более 75 мм
^а Включает взрослых ростом менее 146 см, массой менее 40 кг, индексом массы тела (ИМТ) менее 17.		

с) если использованы провода (тросы), цепи и приводные ремни, то они должны либо быть замкнутыми, чтобы не сбегать или выпрыгнуть из своих направляющих устройств, или опасности должны быть предотвращены другими способами (механическими средствами, которые применены для этой цели и могут быть смещены только за счет использования инструментов); или

д) АРРН должно включать устройство управления, которое инициирует движение при его срабатывании и останавливает движение при его отпускании (например, подпружиненное устройство управления, которое возвращается в положение остановки при отпускании); или

е) АРРН должно включать средство для определения того, что человеку угрожает опасность оказаться в ловушке, и автоматически активировать средство предотвращения травм (например, путем остановки движения).

Для движущихся частей, которые могут вызвать сдавливание, производители должны учитывать те части кузова, которые подвержены риску. Необходимо указать пользователя/группу пользователей, чтобы можно было определить правильные безопасные расстояния.

П р и м е ч а н и е — АРРН, предназначенное для ребенка, может также управляться взрослым.

Во избежание опасности, при которой части тела могут оказаться в ловушке при сложении АРРН, необходимо оценить следующее:

- АРРН должно включать средства защиты пользователя от опасностей захвата и/или сдавливания; или
- зазор между открытыми частями АРРН, которые перемещаются относительно друг друга, должен поддерживаться во всем диапазоне перемещения на уровне меньше минимального значения или больше максимального значения, указанного в таблице 3; или
- если предназначение АРРН не может быть выполнено без такой опасности, как сжатие, в инструкциях по использованию должны быть указаны предупреждение и инструкции о том, как безопасно управлять АРРН.

Если применены ограждения, то конструкция ограждения должна учитывать усилие, которое может быть приложено при нормальном использовании.

11.2 Скорость механизированных движений подъема и опускания

11.2.1 Требования

Требования к скорости механизированных движений по подъему/опусканию:

- а) скорость подъема или опускания не должна превышать 0,15 м/с при загрузке;
- б) скорость подъема или опускания не должна превышать 0,25 м/с при разгрузке.

11.2.2 Метод испытания

При измерении с максимальным усилием скорость подъема и опускания не должна превышать скорость, указанную в 11.2.1, перечисление а).

При измерении без усилия скорость подъема и опускания не должна превышать скорость, указанную в 11.2.1, перечисление б).

11.3 Механический износ


Детали, подверженные механическому износу, который может привести к угрозе безопасности, должны быть доступны для осмотра, если только они не предназначены для замены в течение интервала обслуживания, указанного производителем.

11.4 Зоны захвата ног по отношению к движущимся частям

Места, указанные на рисунках 11 и 12, следует рассматривать как зоны захвата для ног.

Для области на рисунке 11, где расстояние $B = 130$ мм, расстояние A всегда должно быть ≥ 120 мм.


Для области на рисунке 12, где расстояние B_1 и B_2 составляет от 130 до 180 мм; расстояние C всегда должно быть ≥ 50 мм.

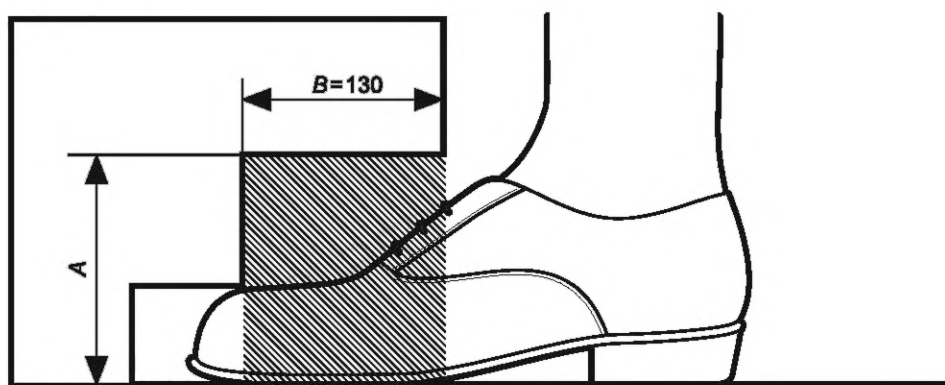

A — расстояние измеряют только от пола;

B — расстояние, измеренное от внешнего края АРРН, включая любые постоянно закрепленные аксессуары

Рисунок 11 — Зона зазора стопы и носка между движущимися частями и полом

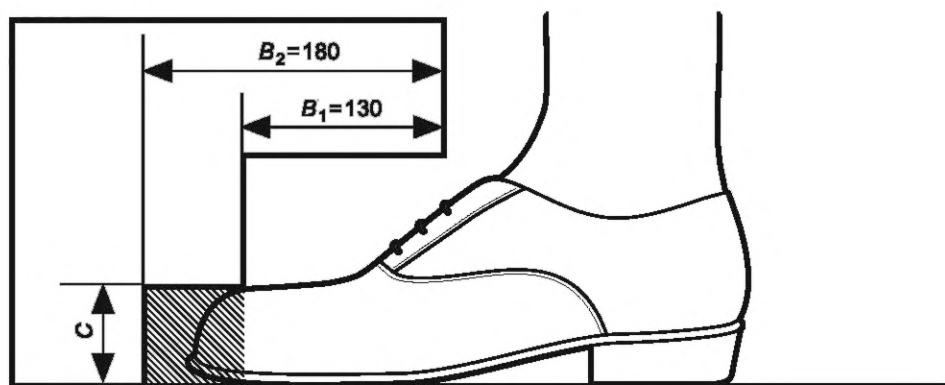

B_1, B_2 — расстояние, измеренное от внешнего края АРРН, включая любые постоянно закрепленные аксессуары;

C — расстояние измеряют только от пола

Рисунок 12 — Площадь зазора между подвижными частями и полом

12 Предотвращение ловушек для частей тела человека

12.1 Отверстия и клиренс

Отверстия и зазоры между неподвижными частями, которые доступны пользователю и/или помощнику во время предполагаемого использования АРПН, должны соответствовать указанным в таблице 4.

Эти измерения следует проводить до и после любых соответствующих испытаний на прочность, долговечность и ударопрочность.

Т а б л и ц а 4 — Безопасные расстояния между неподвижными частями

Избегание	Безопасные расстояния для взрослых	Безопасные расстояния для детей ^a
Ловушки для пальцев	Менее 8 или более 25 мм	Менее 5 или более 12 мм
Ловушки для ног	Менее 35 или более 100 мм	Менее 25 или более 45 мм
Ловушки для головы	Менее 120 или более 250 мм	Менее 60 или более 250 мм
Ловушки для гениталий	Менее 8 или более 75 мм	Менее 8 или более 75 мм
^a Также включает взрослых с ростом менее 146 см, или массой менее 40 кг, или с индексом массы тела (ИМТ) менее 17.		

Если предназначение АРПН не может быть выполнено без опасности, вызванной размером отверстий и зазором между неподвижными частями, в инструкциях по эксплуатации должны быть указаны предупреждение и инструкции по безопасной эксплуатации АРПН.

Для тех неподвижных деталей, которые могут привести к образованию ловушки, производители должны учитывать части кузова, являющиеся источником риска. Необходимо указать пользователя/группу пользователей, чтобы можно было применять правильные безопасные расстояния.

Примечание 1 — АРПН, предназначенное для использования ребенком, может также управляться взрослым.

Конструкция деталей, ограничивающих отверстие или зазор, должно учитывать усилие, которое может быть приложено при нормальном использовании.

Примечание 2 — Усилие может привести к расширению отверстия/зазора. Это может быть причиной сбоя, что указано в таблице 4.

На отверстия в форме замочной скважины или клинообразные отверстия нижний предел не применяют. При проверке АРПН на наличие ловушек для частей тела следует учитывать любую гибкость/эластичность смежных частей.

Метод испытания для измерения зазора между опорами для ног указан в 16.4.2.4.

12.2 Клинообразные отверстия

Производитель должен оценить риск защемления в клинообразных отверстиях. Клинообразные отверстие должно быть не менее 75 градусов. Это снизит риск того, что пользователь окажется зажатым головой в любом положении.

13 Складные и регулировочные механизмы

13.1 Общие положения

Механизмы складывания и регулировки могут представлять опасность, если части корпуса могут попасть в зазор между деталями и оказаться в ловушке при закрытии зазора. Дополнительные требования см. в разделе 11.

Если АРПН включает в себя механизмы складывания и/или регулировки, оно должно соответствовать приложениям 13.2.

Если изделие может регулироваться по высоте, то приращения не должны превышать 25 мм.

13.2 Блокировочное устройство

Механизмы должны быть надежно заблокированы, когда АРРН находится в любой фиксированной рабочей конфигурации. Он также должен быть надежно заблокирован в сложенном состоянии, если это представляет опасность для пользователя или помощника, а также защищен от непреднамеренного высвобождения.

14 Подъемно-транспортные средства

14.1 Общие положения

Производителям следует учитывать, что национальные или другие требования могут требовать испытательные усилия, отличные от приведенных ниже.

Если АРРН или часть АРРН имеет массу 10 кг или более и предполагается, что они должны быть портативными или с ручкой в соответствии с инструкциями производителя:

а) они должны иметь одну или несколько подходящих ручек для переноски, которые позволяют переносить портативные АРРН или устройства двумя или более лицами, или быть снабженными подходящими устройствами для переноски (например, ручками, подъемными проушинами) или

б) в инструкциях по эксплуатации должны быть указаны точки, в которых АРРН или его часть могут быть безопасно подняты, и описано, каким образом с ними следует обращаться во время подъема, сборки и/или переноски. Если это целесообразно, АРРН или составные части должны быть маркированы, чтобы указать, где их можно безопасно поднять и/или как с ними можно обращаться во время сборки и/или переноски.

14.2 Требования

Если АРРН оснащено ручками или захватами для переноски, то они не должны отсоединяться от АРРН, и при испытании не должно быть постоянных искажений, трещин или других признаков сбоя, как указано в 14.3.

После завершения испытания АРРН должно работать по назначению производителя.

14.3 Метод испытания

Если АРРН имеет одну (один) ручку или захват или если АРРН можно легко переносить или поднимать с помощью одной(го) из нескольких ручек или захватов, то определяют усилие на каждой(ом) ручке или захвате при переноске или подъеме.


Если АРРН имеет более одной(го) ручки или захвата, то определяют усилие на каждой(ом) ручке или захвате, когда АРРН переносят или поднимают надлежащим образом.

На каждой(ом) ручке или захвате определяют усилие, необходимое для переноски АРРН надлежащим образом, с допуском $\pm \frac{5}{0} \%$. Если существует более одного предполагаемого способа, определяют наибольшее усилие.

Не следует допускать поднятия или перемещения АРРН во время следующего испытания. Прикладывают усилие к каждой(ому) ручке или захвату, равное удвоенному значению, определенному выше, с допуском $\pm \frac{5}{0} \%$, равномерно распределенным по длине (70 ± 5) мм в центре рукоятки или рукоятки, чтобы избежать ударов (см. рисунок 13).

Поддерживают усилие в течение 60—70 с.

Снимают усилие и ограничители и приводят осмотр АРРН на предмет повреждений и удовлетворительной работы.

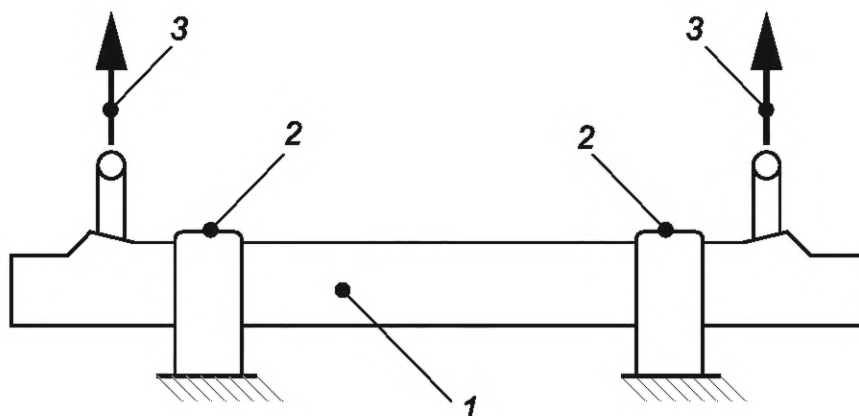

1 — АРПН; 2 — ограничители; 3 — испытательное усилие

Рисунок 13 — Испытание ручки для переноски (пример)

15 Портативные и ручные средства для личной гигиены или ручные детали

Портативное или ручное АРПН или любая из его частей, которая является портативной или ручной во время использования по назначению, должно(а) выдерживать усилие, вызванное свободным падением с высоты на твердую поверхность (см. таблицу 5).

Таблица 5 — Высота падения

Масса m портативного АРПН или его частей, кг	Высота падения, см
$m \leq 0,2$	100
$0,2 < m \leq 1$	20
$1 < m \leq 10$	5
$10 < m \leq 50$	3
$m > 50$	2

Соответствие проверяют нижеприведенным испытанием.

Чтобы избежать падения и иметь эргономичный захват, портативные АРПН должны быть оценены на предмет захвата, массы, размера и формы. После испытания изделие должно быть проверено на наличие любых повреждений, которые приводят к неприемлемому риску или потере функциональности. Повреждение подобного рода представляет собой неисправность.

Образец, подлежащий испытанию, поднимают на высоту, указанную в таблице 5, над испытательной плоскостью (4.8.7), расположенной горизонтально. Образец сбрасывают три раза из каждой ориентации, в которой он может быть помещен во время предполагаемого использования.

Портативные устройства управления для АРПН с питанием должны выдерживать 1000 падений на твердую поверхность с высоты 100 см без повреждений и при этом нормально функционировать.

Производителям следует рассмотреть возможность проведения соответствующих испытаний согласно МЭК 60068-2-31:2008.

16 Статическая прочность, ударопрочность и долговечность

16.1 Общие положения

Статическая прочность, долговечность и ударопрочность являются критическими испытаниями, подтверждающими безопасность продукта. Формулы для расчета усилий при различных испытаниях рассмотрены в 16.2. Каждый подпункт начинается с собственных требований, за которыми следуют методы испытаний.

16.2 Формулы

16.2.1 Формулы для расчета усилия

Формулы, приведенные в таблице 6, следует использовать для расчета усилия F в методах испытаний в соответствии с настоящим стандартом.

Т а б л и ц а 6 — Формулы для расчета усилий

Испытание	Формула	Максимальное усилие (расчет на основе m_d 130 кг)
Статическая прочность на поверхности сиденья	$F = m \cdot g \cdot S$	
Статическая прочность лежащей опорной поверхности	$F = m \cdot g \cdot S$	
Прочность поверхности сиденья	$F = m_d \cdot g$	
Статическая прочность опоры для спины	$F = 0,5 m \cdot g$	
Статическое усилие при опоре руки вниз ^a	$F = \frac{m_d \cdot g \cdot S}{2 \cdot \cos 15^\circ}$	950 Н
Долговечность опоры руки, направленная вниз ^a	$F = \frac{m_d \cdot g}{2 \cdot \cos 15^\circ}$	635 Н
Статическая прочность при опоре стопы, направленная вниз ^a	$F = m_d \cdot g$	1200 Н
Статическое усилие на оставшемся зазоре опоры стопы	$F = 0,125 m_d \cdot g$	200 Н
Где m_d — максимальная масса пользователя, кг; m — максимальное усилие (максимальная масса пользователя, кг, плюс любое дополнительное усилие, где это применимо); S — коэффициент безопасности, равный 1,5; F — усилие, которое нужно приложить в ньютонах; g — гравитационная постоянная, равная 9807 м/с². ^a Результат расчета или максимальное усилие в зависимости от того, что меньше.		

16.3 Количество циклов испытаний на долговечность

Количество циклов испытаний, которым подвергают изделие, зависит от предполагаемой среды и должно быть рассчитано в соответствии со следующей формулой:

$$n_{TC} = u_{UC} \cdot u_{TD} \cdot 365 \cdot t_{DL},$$

где n_{TC} — количество испытательных циклов;

u_{UC} — количество применений за пользовательский цикл;

u_{TD} — количество стандартных применений в сутки;

t_{DL} — расчетный срок службы, выраженный в годах.

Ожидаемый срок службы должен быть не менее трех лет. Если предполагаемый срок службы меньше, это должно быть указано в инструкции по эксплуатации и на этикетке.

Минимальные значения факторов окружающей среды предполагаемого использования следует применять, как указано в таблицах 7 и 8.

Предполагаемый срок службы должен быть указан производителем.

Производитель должен указать в инструкциях по эксплуатации предполагаемый срок службы и условия окружающей среды предполагаемого использования.

Таблица 7 — u_{uc} для различных функций

Опора для руки	2
Опора для сиденья	1
Опора для лежания	1
Опора для захвата	1
Опора для ног	1
Тормоза	2

Таблица 8 — u_{td} для различных сред

Вид деятельности	Уход на дому	Учреждения	Общественное использование
Посещение туалета	5	10	10
Посещение душа/ванной	2	10	5

16.4 Статическая прочность опоры для лежания, опор для рук и ног, поверхностей сиденья и спинки

16.4.1 Требования

Во время и после испытаний на статическую прочность по 16.4.2 части АРРН не должны:

- становиться нестабильными;
- иметь какие-либо трещины;
- иметь какие-нибудь незакрепленные соединения;
- иметь видимые деформации или зазоры, нарушающие функционирование;
- отрываться.

Далее в зависимости от АРРН:

- не должно быть постоянного наклона;
- все регулируемые части должны функционировать по назначению;
- отклонение опоры рычага во время испытания не должно нарушать функционирования в отношении передачи;
- опора для ног должна либо иметь средства, предотвращающие скольжение ног в зазор между ними, либо иметь зазор, меньший, чем указано в таблице 4;
- во время испытания допускается отклонение опоры для ног до упора в пол (после испытания оставшееся отклонение не должно превышать 10 мм);
- если АРРН предназначено для складывания для транспортирования и/или хранения, оно не должно складываться непреднамеренно;
- после испытания АРРН должно работать так, как предусмотрено производителем.

Все критерии прохождения/непрохождения должны быть выполнены после или во время испытания, когда бы оно ни проводилось.

16.4.2 Методы испытаний

16.4.2.1 Статическая прочность лежащей опорной поверхности

Испытания следует проводить на горизонтальной поверхности с приложенным усилием в течение 20 мин.

При наличии каких-либо тормозов, их необходимо активировать.


АРРН должно оставаться стабильным в течение всего испытания.

Первое испытание. Прикрепляют усилие в соответствии с таблицей 6 к лежащей опорной поверхности согласно схеме, указанной на рисунке 14.

Второе испытание. Это(и) испытание(ия) следует проводить на наиболее критической части поверхности, где пользователь может приложить максимальное усилие при переносе в соответствии с рисунком 15. Если возможна передача как на концах, так и вдоль боковой поверхности лежащей опоры, каждое испытание следует проводить отдельно.

Удаляют испытательное усилие и проверяют АРРН на наличие повреждений.

Примечание — Лежащая опорная поверхность включает изделия в пределах 09 33 12 и 18 15 06.

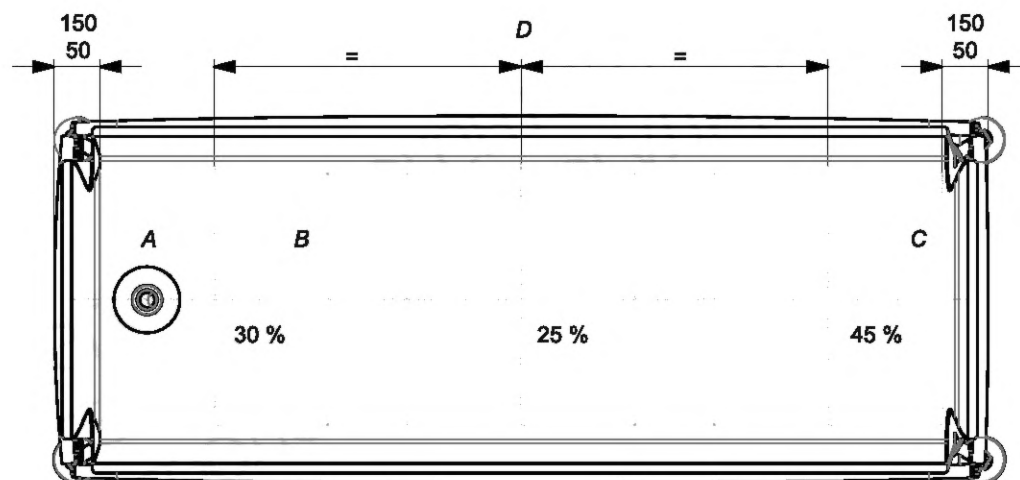


Примечание — Показанные значения представляют собой процент от максимального усилия.

A — дренажное отверстие; *B* — ноги; *C* — голова; *D* — центральная линия

Рисунок 14 — Размещение усилий на лежащей опорной поверхности

Размеры в миллиметрах

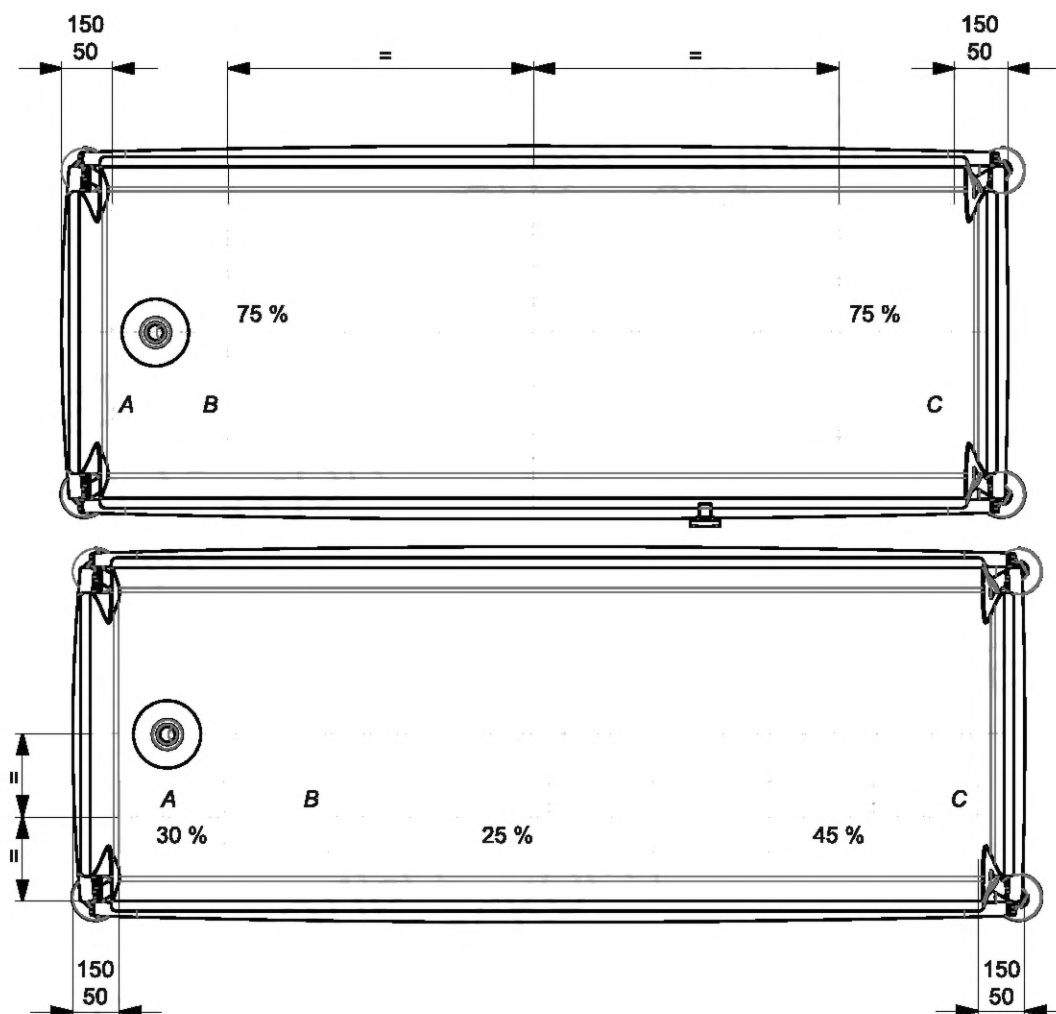

A — дренажное отверстие; B — ноги; C — голова

Примечание — Показанные значения представляют собой процент от максимального усилия.

Рисунок 15 — Размещение усилия на лежащей опорной поверхности.

Максимальная передача усилия

16.4.2.2 Статическая прочность опоры для рук вниз

Рассчитывают усилие, направленное вниз, которое должно быть приложено к опоре для рук, используя формулы, приведенные в таблице 6.

Каждую опору рычага нагружают в течение как минимум 60 с в точке на расстоянии 50 мм от переднего края.

Когда АРРН стоит на горизонтальной испытательной плоскости, прикладывают максимальное усилие, определенное по формуле из таблицы 6, или любое большее усилие, указанное производителем, так, чтобы ее линия действия пересекала опорную поверхность опоры для рук, как показано на рисунке 18 и 19, используя загрузочную площадку, выбранную в соответствии с 4.8.12.1 и 4.8.12.2.

Примечание — На рисунке 18 показана конфигурация погрузочного оборудования в начале испытания. Эта конфигурация будет меняться по мере отклонения опоры рычага во время испытания.

Перед установкой испытательного оборудования применяют средства для предотвращения опрокидывания вспомогательного изделия и средства для предотвращения перемещения вспомогательного изделия назад и вперед.

При наличии двух опор для рук половина усилия должна быть приложена к каждой из них одновременно или по одной в отдельности.

Медленно увеличивают усилие до тех пор, пока усилие F_1 не достигнет значения, в соответствии с формулой из таблицы 6, или большего значения, указанного производителем.

16.4.2.3 Статическая прочность опоры сиденья и спинки

Устанавливают АРРН в соответствии с инструкциями производителя.

АРРН должно быть закреплено таким образом, чтобы во время испытания оно не перемещалось и не повлияло тем самым на результаты испытания.


Для испытания сиденья на статическую прочность прикладывают максимальное усилие F_1 в соответствии с таблицей 6, используя загрузочную площадку, как указано в 4.8.12.4, в течение 20 мин к части опорной поверхности сиденья АРРН в соответствии с рисунком 16.

Если АРРН имеет крышку сиденья, усилие следует располагать на верхней поверхности крышки из-за предполагаемого неправильного использования.

Для испытания задней опоры на статическую прочность прикладывают максимальное усилие F_2 в соответствии с таблицей 6, используя загрузочную площадку, как указано в 4.8.12.3, в течение 20 мин к части поверхности задней опоры АРРН в соответствии с рисунком 16. Тормоза (при наличии) должны быть активированы, и приложение АРРН не должно наклоняться во время испытания.

Испытание следует проводить с опорой для спины в наиболее неблагоприятном положении, если она имеет функцию регулируемого откидывания.

Размеры в миллиметрах

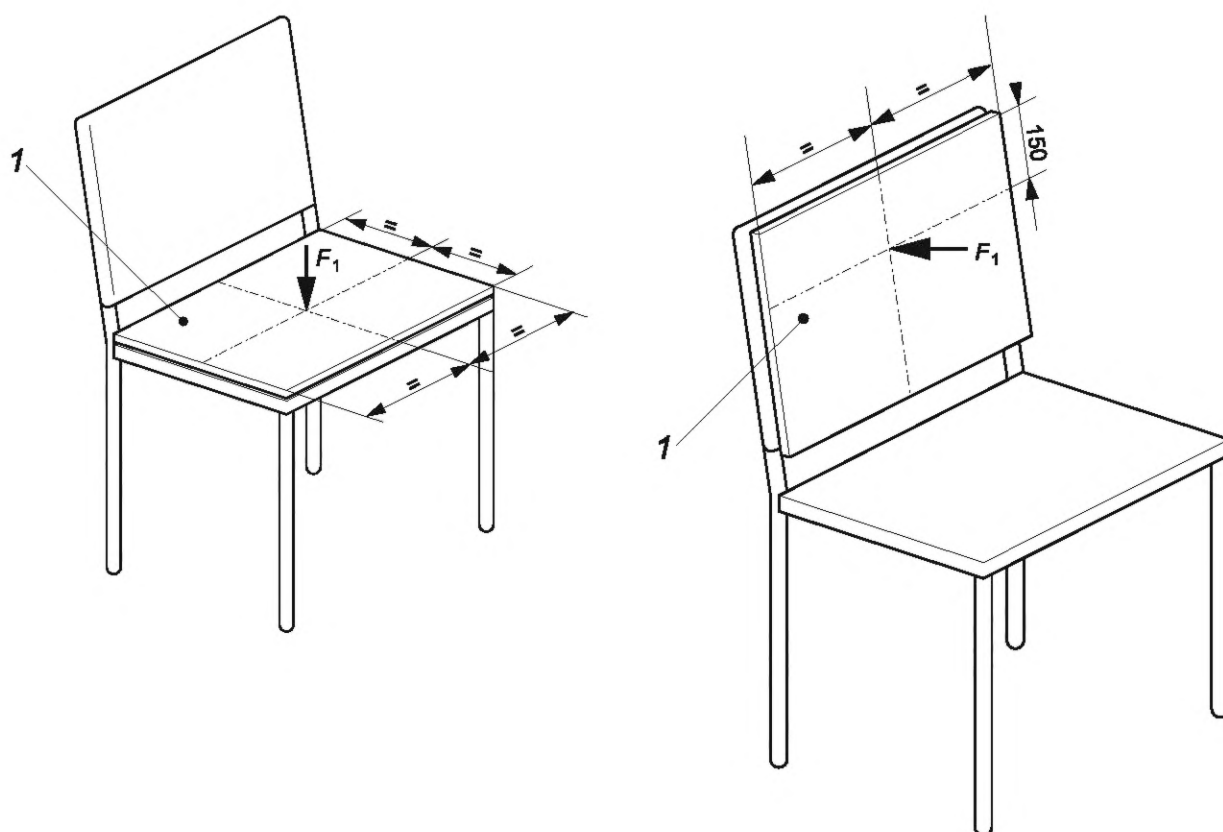

1 — загрузочная площадка

Рисунок 16 — Размещение усилия на опорной поверхности сиденья/спинки

16.4.2.4 Статическая прочность опор для ног

Перед началом проведения испытания применяют средства предотвращения опрокидывания АРРН и средства предотвращения перемещения АРРН вперед и назад.

Рассчитывают направленные вниз усилия, которые должны быть приложены к опоре для ног, используя формулы из таблицы 6. К АРРН, стоя на горизонтальной испытательной плоскости, прикладывают усилие F , определенные в таблице 6, «Статическое усилие на опоре стопы вниз» и «Статическое усилие на оставшемся зазоре опоры стопы» или любое большее указанное производителем усилие, в местах опор для ног, показанных на рисунке 17.

Используют выпуклую нагрузочную площадку (см. рисунок 3) для передачи усилия на плоские опоры для ног и на опоры для ступней, состоящие из двух или более трубок, и вогнутую цилиндрическую нагрузочную площадку (см. рисунок 2) на опоры для ступней, состоящие из одной трубы.

Примечание — В некоторых случаях, когда это можно сделать, не ослабляя опору для стопы, может потребоваться просверлить отверстие в опорной пластине для крепления привода загрузки.

Если опоры для ног регулируют по высоте, она должна быть расположена в наиболее неблагоприятном положении для предполагаемого использования.

Если применены трубчатые подставки для ног или другие конструкции, не имеющие плоской опорной поверхности для ног, прикладывают усилие под углом $(25 \pm 5)^\circ$ к вертикали, наклоненной в сторону сиденья.

Если опоры для ног имеют открытую конструкцию, так что стандартная нагрузочная площадка не может передавать усилие на конструкции, устанавливают подходящую жесткую пластину на опору для ног, чтобы усилие приходилось на части опоры для ног, ближайшие к точке усилия.

Если используют две отдельные опоры для ног, поочередно прикладывают половину усилия к каждой опоре для ног.

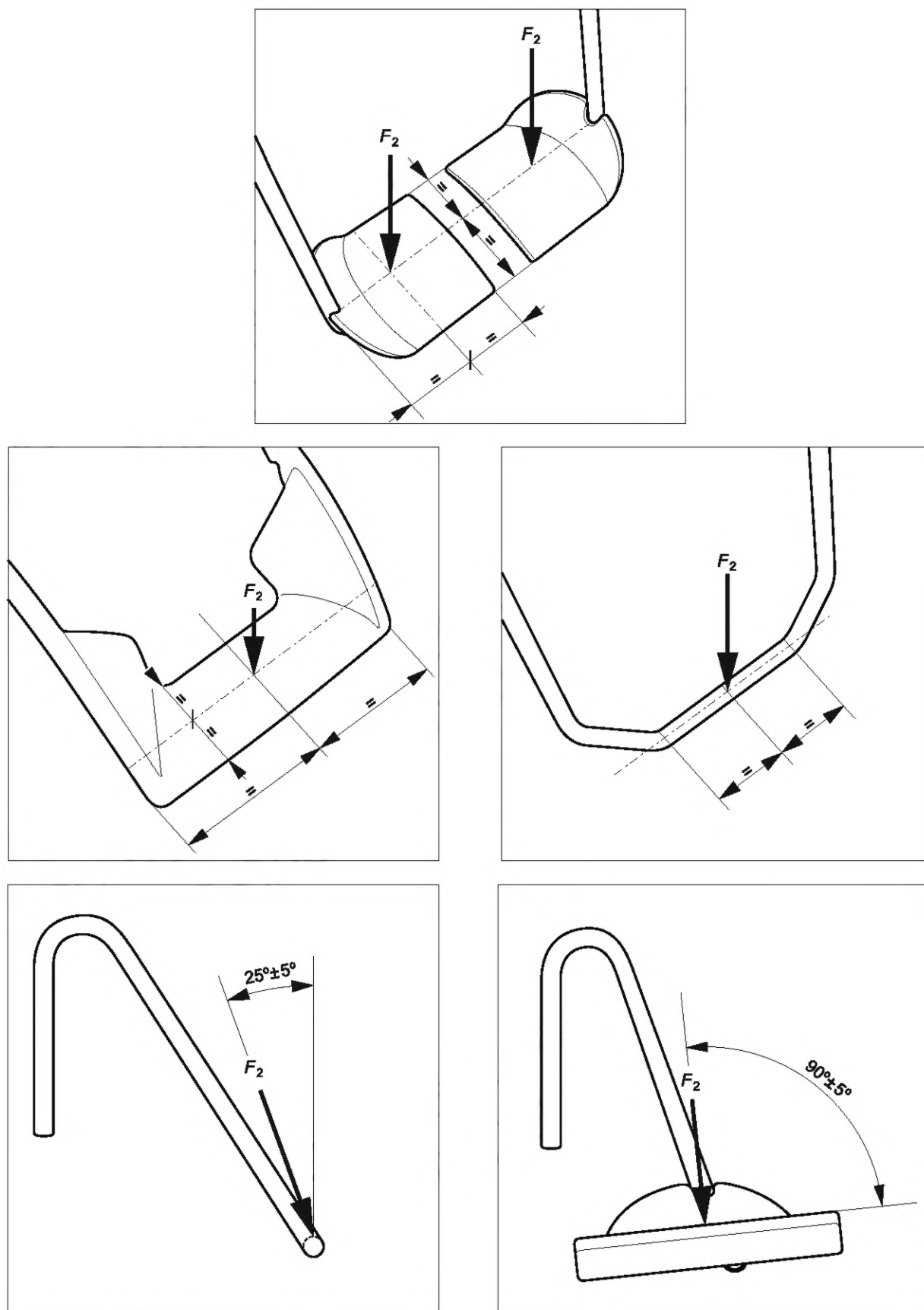


Рисунок 17 — Расположение опорного усилия для стопы

Медленно увеличивают усилие до тех пор, пока усилие F_2 не достигнет значения, указанного в формуле таблицы 6, или большего усилия, указанного производителем. Поддерживают усилие в течение от 5 до 10 с.

Снимают усилие.

16.5 Долговечность

16.5.1 Требования

Во время и после испытаний на долговечность, описанных в 16.5.2, части АРРН не должны:

- становиться нестабильными;
- иметь трещины;
- иметь незакрепленные соединения;
- иметь видимые деформации или зазоры, нарушающие функционирование;
- отрываться.

Далее в зависимости от АРРН:

- не должно быть постоянного наклона;
- все регулируемые части должны функционировать по назначению;
- отклонение опоры рычага во время испытания не должно нарушать функционирования в отношении передачи;
- опора для ног должна либо иметь средства, предотвращающие скольжение ног в зазор между ними, меньший, чем указано в таблице 4;
- во время испытания допускается отклонение опоры для ног до упора в пол (после испытания оставшееся отклонение не должно превышать 10 мм);
- если АРРН предназначено для складывания при транспортировании и/или хранении, оно не должно складываться непреднамеренно (после испытания АРРН должно работать так, как задумано производителем).

Все критерии прохождения/непрохождения должны быть выполнены после или во время испытания, когда бы оно ни проводилось.

Во время испытания применяются нижеприведенные условия.

- 1) Допускается регулировка опор для осанки.
- 2) Допускаются повторная затяжка, перенастройка или установка компонентов, которые указаны в инструкциях производителя для использования в качестве компонентов, регулируемых оператором. Компоненты, идентифицированные как регулируемые оператором, могут потребовать использования инструментов, если поставку инструментов осуществляют совместно с вспомогательным изделием. При наличии компонентов, регулируемых оператором, оборудование для испытаний на долговечность может останавливаться с интервалом 25 % плюс или минус 5 % для проверки компонентов, регулируемых оператором, для того чтобы определить, требуется ли повторная затяжка, перенастройка или установка компонентов, регулируемых оператором. Вначале затягивают, затем выполняют настройку или установку в соответствии с процедурами, изложенными в инструкциях по использованию АРРН. Продолжают испытания на долговечность после проведения повторных затяжек, регулировки или установки.

- 3) Повторные затягивание, перенастройка или установка другого компонента не допускаются.

- 4) Во время испытания на долговечность допускается замена предметов обычного износа в соответствии с инструкциями производителя.

- 5) Для АРРНs с электрическим приводом рабочий цикл должен быть заявлен производителем.

16.5.2 Методы испытаний

Прикладывают максимальное усилие, предусмотренное производителем (включая любые принадлежности), к опорной поверхности в наиболее неблагоприятном положении таким образом, чтобы обеспечить незначительное динамическое усилие. Цикл испытаний следует рассчитывать в соответствии с 16.3 (см. таблицы 7 и 8) в отношении предполагаемой области применения и указанного срока службы изделия, если иное не определено в настоящем стандарте.

АРРН должно быть защищено от скольжения или перемещения с помощью стопора.

16.5.2.1 Долговечность опоры для рук

Когда АРРН стоит на горизонтальной испытательной плоскости, прикладывают усилие ± 3 %, определяемое по формуле в таблице 6, или любое большее усилие, указанное производителем, таким образом, чтобы его линия действия пересекала опорную поверхность опоры для руки, как показано на рисунках 18 и 19, с использованием выбранной вогнутой нагрузочной площадки, как указано в 4.8.12.1.

Примечание — На рисунке 17 показана конфигурация нагрузочного оборудования в начале испытания. Эта конфигурация будет меняться по мере того, как испытание деформирует опору руки.

Циклическое приложение усилия может быть применено к обеим опорам одновременно или к каждой поочередно. Циклическое приложение усилия должно быть плавным.

Медленно увеличивают усилие до тех пор, пока усилие F_1 не достигнет значения, указанного в формуле таблицы 6, или большего значения, указанного производителем. Циклическость должна быть менее 20 циклов в минуту.

По окончании испытания снимают усилие.

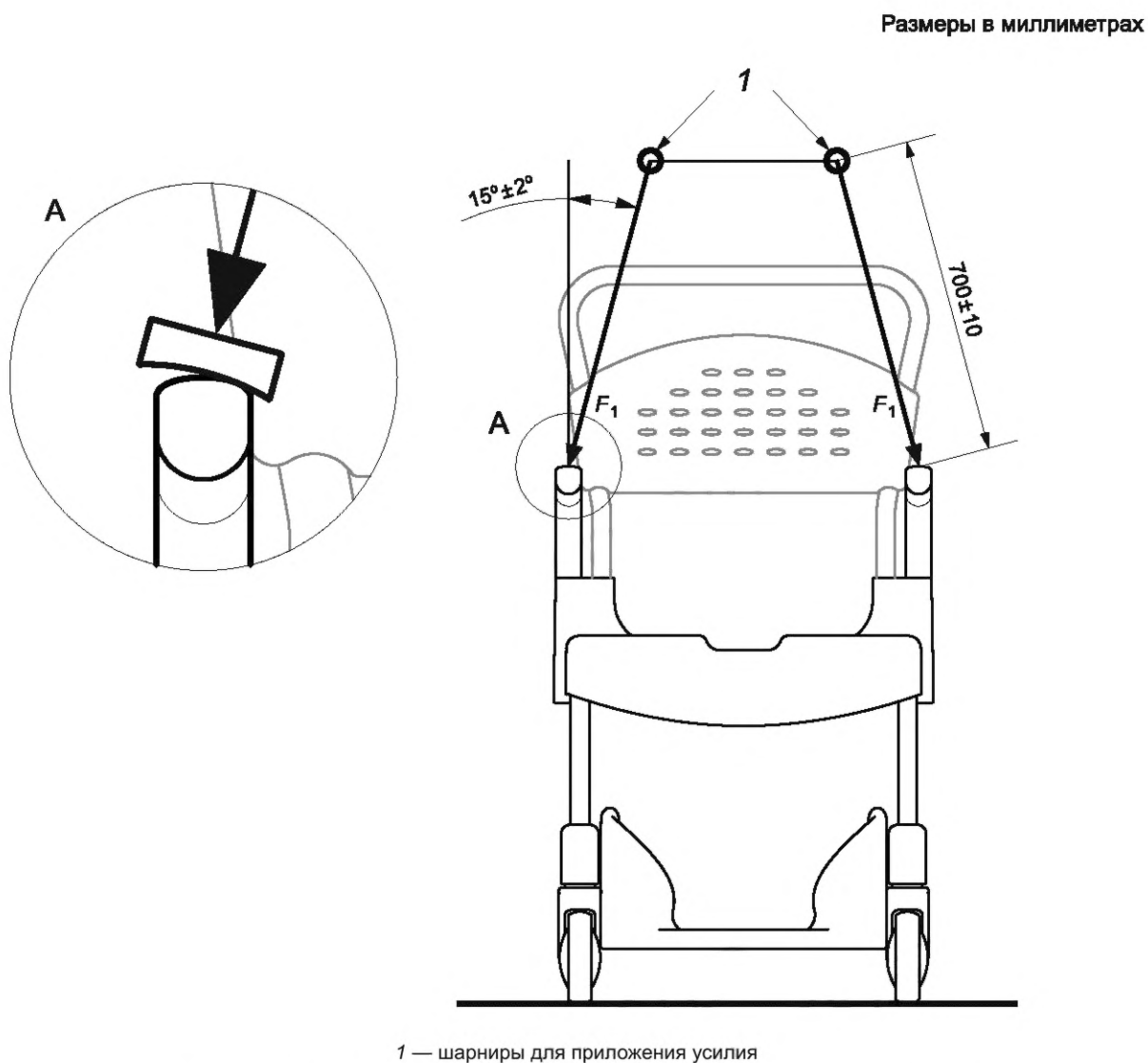


Рисунок 18 — Усилия, направленные вниз на подлокотники (вид спереди)

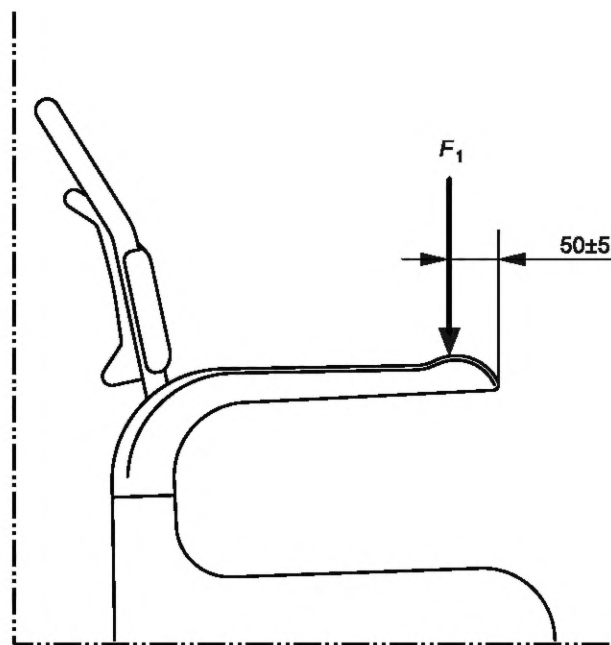


Рисунок 19 — Усилия, направленные вниз на подлокотники (вид сбоку)

16.5.2.2 Прочность поверхности сиденья

АРРН должно быть расположено горизонтально на испытательной плоскости.

Прикладывают усилие, указанное в таблице 6, вертикально к поверхности сиденья в соответствии с рисунком 16.

Используют подходящую нагрузочную площадку (см. 4.8.12.4) для приложения усилия.

Также можно использовать испытательный манекен в соответствии с ИСО 7176-11.

Количество циклов должно быть рассчитано по формуле в 16.3 и по таблицам 7 и 8 относительно предполагаемой области использования.

После испытания снимают усилие.

16.5.2.3 Долговечность механизма регулировки высоты с электроприводом

Помещают АРРН в наиболее нижнее горизонтальное положение на испытательной плоскости. Прикладывают максимальное распределенное усилие, как показано на рисунке 14 для лежащей опорной поверхности или как в 16.4.2.3 (см. рисунок 16) для сидячей поверхности. В соответствии с ИСО 7176-11 также может быть использован испытательный манекен.

АРРН поднимают и опускают в соответствии с процедурой, указанной в инструкции по эксплуатации. Количество испытательных циклов должно быть рассчитано по формуле, приведенной в 16.3, и по таблицам 7 и 8 относительно предполагаемой области использования.

После испытания снимают усилие.

16.5.2.4 Долговечность подвижных секций с механическим приводом

АРРН следует расположить горизонтально на испытательной плоскости.

Прикладывают максимальное усилие, распределенное, как показано на рисунке 14 для лежащей опорной поверхности или как в 16.4.2.3 (см. рисунок 16) для сиденья на подвижной секции. В соответствии с ИСО 7176-11 также может быть использован испытательный манекен.

Каждая из подвижных секций работает в полном диапазоне хода, как и при обычном использовании.

Количество циклов испытаний должно соответствовать формуле в 16.3, а также по таблицам 7 и 8 относительно предполагаемой области использования.

Проводят осмотр продукта через 5 мин после завершения цикла.

После приложения усилия элементы изделия не должны расшатываться, ломаться или не должна быть обнаружена какая-либо опасность. Деформация более 10 мм (после снятия усилия) от соответствующего измерения, проведенного до приложения усилия, недопустима.

16.5.2.5 Прочность рамы АРРН с сиденьем, оборудованным ножками/колесиками

Этот метод испытаний не предназначен для фиксированных продуктов.

АППН следует расположить горизонтально на испытательной плоскости.

Устанавливают колеса/ножки, как показано на рисунке 20, напротив стопора.

Для гидравлического, механического, электрического или другого регулируемого АППН испытание должно быть проведено таким образом, чтобы любое движение системы регулирования не влияло на результат испытания.

Сиденье загружают на 80 % от максимального усилия в ящике при наклонах вперед и назад.

Сиденье загружают на 40 % от максимального усилия в ящике при наклоне в боковых направлениях.


Ящик (шириной 350 мм, глубиной 350 мм и высотой 300 мм) должен быть закреплен по центру сиденья и зафиксирован от скольжения.

Также можно использовать испытательный манекен в соответствии с ИСО 7176-11.

Количество циклов должно соответствовать приведенному в формуле в 16.3 и таблицах 7 и 8 относительно предполагаемой области использования. Оно не должно превышать 10 000 раз в каждом направлении.

Усилие прикладывают перпендикулярно ящику.

АППН наклоняют к ящику (см. рисунок 20) до тех пор, пока две ножки не поднимутся на 30 мм. После этого кресло свободно падает обратно на испытательную плоскость (4.8.7). Испытание 1 выполняют в обратном направлении, испытание 2 — в прямом направлении, а испытания 3 и 4 — в двух боковых направлениях. Каждое испытание проводят отдельно с полным количеством циклов до начала следующего испытания.

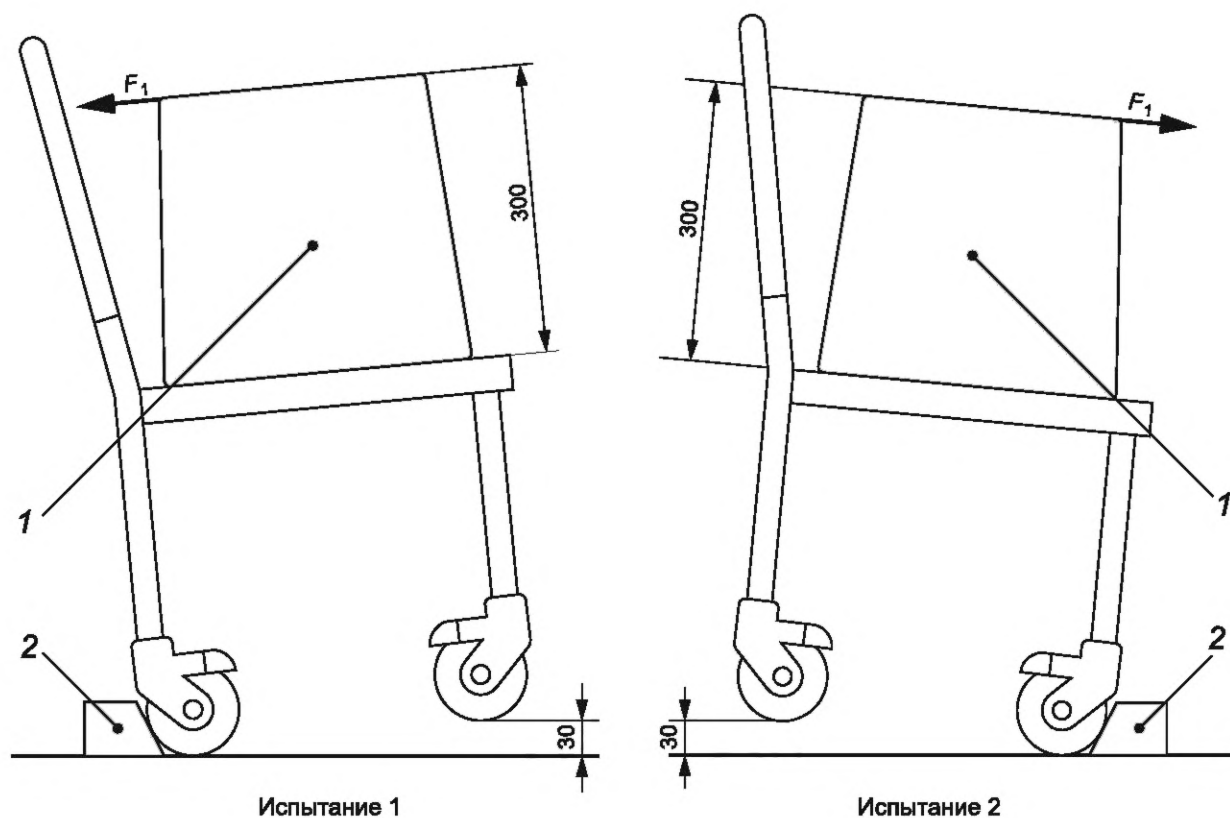

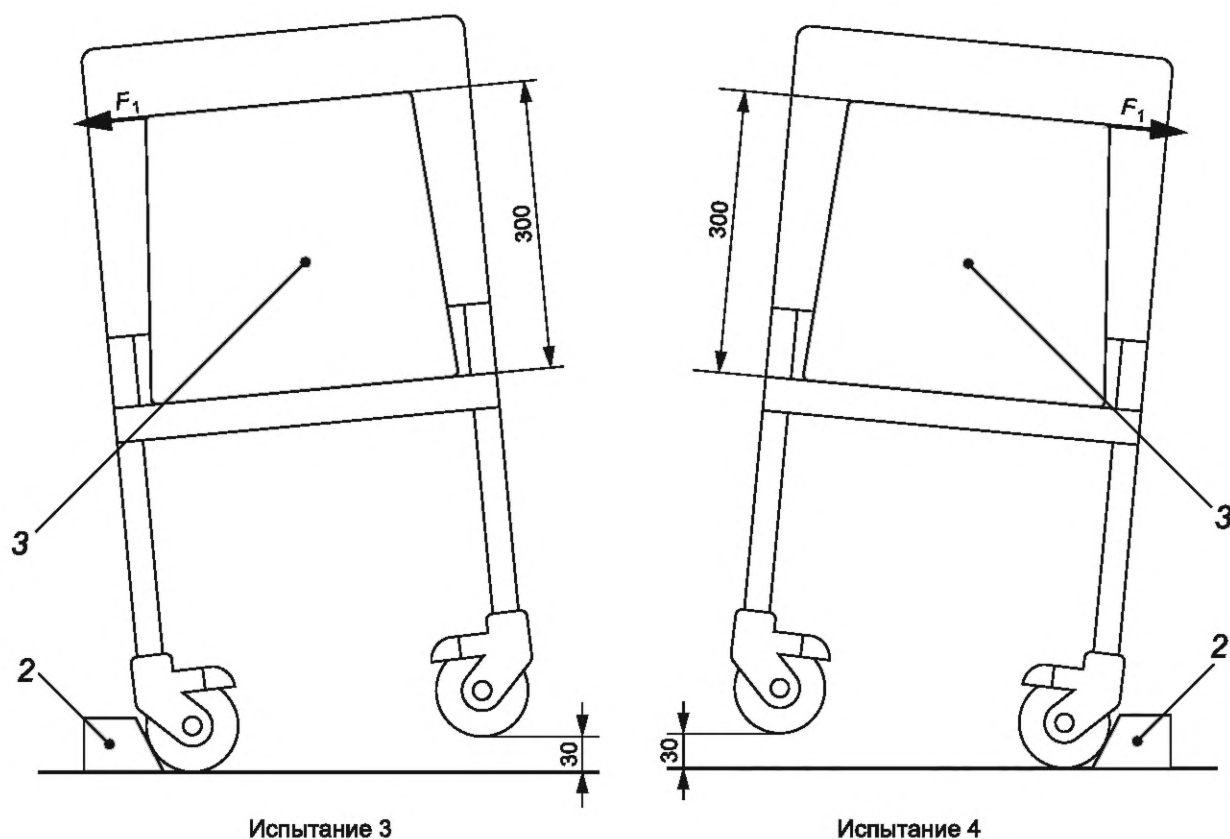


Рисунок 20 — Испытание на прочность рамы АРРН

16.6 Ударное воздействие

16.6.1 Требования

После проведения испытаний по 16.6.2 должны быть выполнены нижеприведенные требования.

а) Ни один компонент не должен быть сломан или отсоединен, за исключением следующего:

- допускается перенастройка постуральных опор;

- повторная затяжка, повторная регулировка или повторная установка компонентов, которые указаны в инструкциях производителя по эксплуатации в качестве компонентов, регулируемых оператором, разрешены; для компонентов, идентифицированных как регулируемые оператором, может потребоваться использование инструментов, которые должны поставляться совместно с вспомогательным изделием;

- повторная затяжка, повторная регулировка или переустановка любого другого компонента не допускается.

б) Трещины в отделке поверхности, например в краске, которые не проникают в конструкционный материал, не являются дефектом.

с) Ни один из видимых снаружи электрических кабелей не должен быть истертым или раздавленным, а также отсоединен.

д) Все детали, которые должны быть съемными, складными или регулируемыми, должны работать в соответствии с описанием производителя.

е) Все системы с силовым приводом должны работать в соответствии с описанием производителя.

ф) Элементы АРРН не должны расшатываться, ломаться или представлять опасность.

г) Фиксаторы не должны смещаться.

h) Компонент или сборка деталей не должны иметь деформации, свободного люфта или потери регулировки, которые неблагоприятно влияют на работу АРРН.

16.6.2 Методы испытаний

16.6.2.1 Метод испытаний для опоры спины

Это испытание применяют к тем изделиям, у которых высота спинки составляет 320 мм или более над сиденьем.

Измерение 320 мм проводят начиная от верхней поверхности основания сиденья под углом 90° от центра сиденья.

В отношении опор для спины, имеющих шарнир, который позволяет им свободно выровняться со спиной пользователя, как показано на рисунке 21, располагают маятник для испытания на удар для опоры спины (см. 4.8.13) с вертикальным стержнем таким образом, чтобы усилие касалось спины, опоры на горизонтальной линии, проходящей через ось задней опоры.

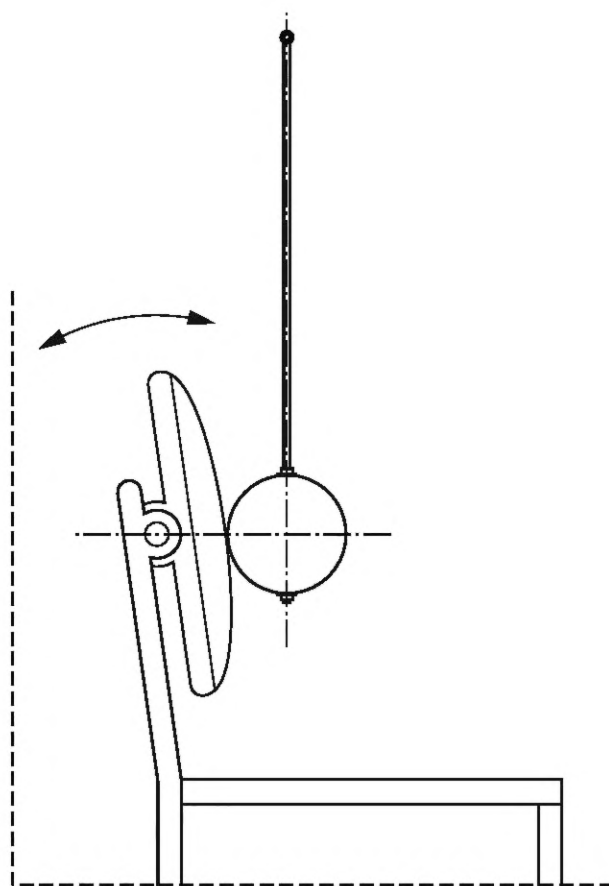


Рисунок 21 — Испытание на удар с поворотной задней опорой

Для изделий с другими типами опор для спины располагают маятник для испытаний на удар таким образом, чтобы стержень находился вертикально и масса касалась центральной линии опоры для спины в точке на 30 мм ниже верхней части опоры для спины, как показано на рисунке 22.

Активируют тормоза (при их наличии).

Устанавливают жесткий стопор (см. 4.8.8) напротив задних колес/ножек изделия и крепят свободный фиксатор, длина которого достаточна для предотвращения опрокидывания АРРН назад за точку равновесия. Поддерживают маятник так, чтобы жесткий стержень находился под углом $(30 \pm 2)^\circ$ к вертикали, как показано на рисунке 22, а затем дают ему свободно упасть один раз и ударить по задней опоре.

Если производитель утверждает, что продукт превышает минимальные требования, используют для испытания угол, заявленный производителем плюс 2° . Если спинка регулируется по высоте, испытание проводят в наихудшем положении.

Для тех изделий, в которых задняя опора установлена на двух опорных элементах, повторяют испытание дважды, переместив маятник таким образом, чтобы он ударялся о центральную линию каждой опоры на 20 мм ниже верхней части опоры.

Для тех изделий, в которых задняя опора установлена на одной центральной опоре, повторяют испытание с маятником, расположенным так, чтобы ударять по задней опоре в точках, расположенных на расстоянии 0,4 максимальной ширины спинки с каждой стороны от ее центральной линии.

Для тех изделий, в которых опора спины установлена на двух опорных элементах, повторяют испытание дважды, переместив маятник таким образом, чтобы он ударялся о центральную линию каждой опоры на 20 мм ниже верхней части опоры.

Для тех изделий, в которых опора спины установлена на одной центральной опоре, повторяют испытание с маятником, расположенным так, чтобы ударять по опоре спины в точках, расположенных на расстоянии 0,4 максимальной ширины спинки от каждой стороны относительно ее центральной линии.

Размеры в миллиметрах

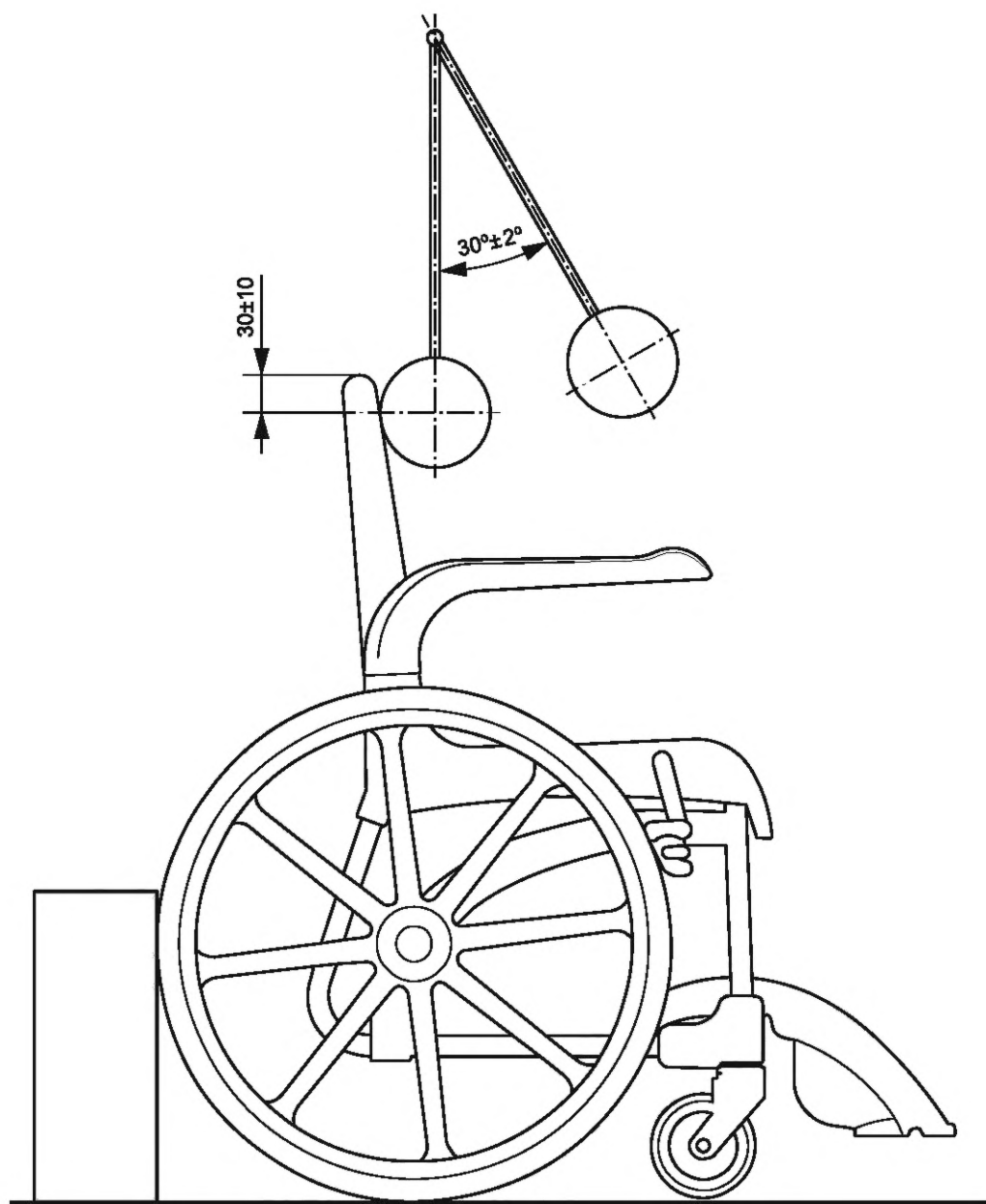


Рисунок 22 — Испытание опоры спины на удар

16.6.2.2 Метод испытания лежащей опорной поверхности

Следующие испытания должны быть проведены в той последовательности, в которой они перечислены.

Размеры в миллиметрах

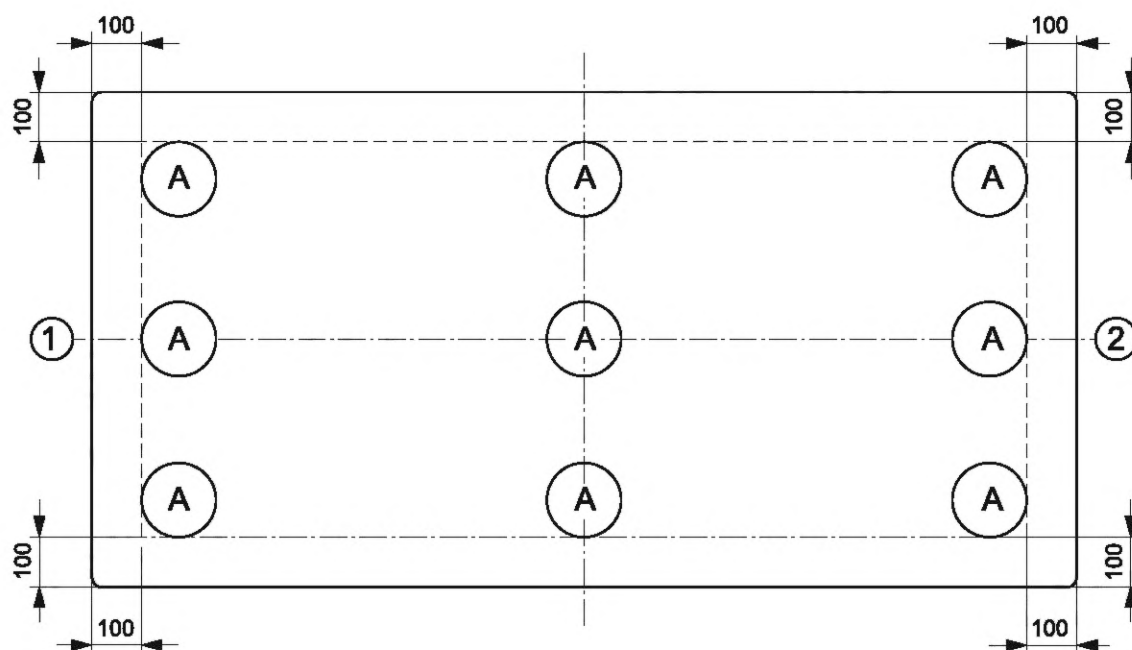


Рисунок 23 — Испытание лежащей опорной поверхности на удар

Помещают матрац, при его наличии, как указано производителем, на лежащую опорную поверхность в том положении, в котором любые движущиеся элементы свободны от опорных элементов и их наклон составляет менее 7° по отношению к горизонтали, и, если он регулируется по высоте, опорная поверхность для лежания должна быть расположена в середине возможного диапазона регулировки.

С высоты 180 мм над опорной поверхностью матраца/лежащей поверхности бросают ударный элемент (4.8.16) на АРРН 20 раз в каждую из точек, отмеченных буквой «А» на рисунке 23. Ударный элемент должен свободно падать, но можно использовать направляющие, чтобы гарантировать, что падения элемента происходили как можно ближе к рекомендуемым местам.

17 Устойчивость

17.1 Требования к статической устойчивости

При испытании на устойчивость по 17.2 подвижные и статические АРРНs, нагруженные максимальным усилием, не должны терять равновесия (баланса) под углом 10° вперед и назад и под углом 5° вбок.

17.2 Метод испытания на статическую устойчивость

Испытания следует проводить в прямом, обратном и боковом направлениях, как указано производителем, на наклонной испытательной плоскости (4.8.7) в соответствии с требуемым углом для каждого испытания. Если для мобильных АРРНs предусмотрено несколько направлений движения (вперед), они должны быть рассмотрены как прямые. Для мобильных АРРНs база находится в положении для движения, как указано производителем.

АРРН должно быть предохранено от скольжения по наклонной поверхности с помощью стопоров (см. 4.8.8 и рисунок 1).

Прикладывают максимальное усилие, распределенное, как показано на рисунке 14, для АРРН с лежащей опорной поверхностью. Для АРРН с сиденьем центр тяжести усилия должно быть расположено согласно рисунку 16, усилие F_1 , но не более 350 мм от переднего края сиденья.

Также можно использовать испытательный манекен в соответствии с ИСО 7176-11.

Для АРРН с лежащей опорной поверхностью испытания повторяют на горизонтальной поверхности с усилиями, распределенными, как показано на рисунке 15, как на концах, так и по бокам, по одному испытанию за один раз. Испытания следует проводить в наиболее неблагоприятном положении АРРН по отношению к положению колес, опорной поверхности, основанию и тормозов, если это применимо.

Примечание — Необходимо оценить риски, связанные с АРРН, если предполагается использовать его на мокром и/или мыльном полу.

18 Поверхности, углы, кромки и выступающие части

Если это не требуется для целевого назначения АРРН, все доступные края, углы и поверхности должны быть гладкими и свободными от заусенцев и острых краев.

Если это не требуется для целевого назначения, АРРН не должно иметь выступающих частей. При возможности, необходимые выступающие части должны иметь защиту для предотвращения травм и/или повреждений.

Примечание — См. указания в В.18.

19 Мелкие детали

АРРН и их детали, предназначенные для использования маленькими детьми, должны быть такого размера, чтобы они не создавали опасность удушения маленьких детей.

Что касается АРРН для детей, то любая деталь, которую можно отсоединить без использования инструмента, не должна полностью помещаться в цилиндр, как указано в 5.4 ЕН 716-2:2008.

Примечание — Маленькими детьми считаются дети в возрасте не старше 5 лет.

20 Усилия в мягких тканях человеческого тела

Опасности, которые могут быть вызваны усилиями, приложенными к мягким тканям тела, должны быть оценены в анализе рисков (см. 4.1).

Примечание — Для руководства см. В.20.

21 Эргономические принципы

АРРН может быть использовано не только тем, для кого оно в первую очередь предназначено, но и помощником. Эргономические принципы, изложенные в ЕН 614-1, следует применять ко всем вовлеченным лицам.

Рукоятки, ручки и педали должны соответствовать функциональной анатомии оператора согласно предполагаемому использованию и следующим требованиям (в определенных случаях АРРН должно быть загружено с максимальным усилием):

а) диаметр поверхности кнопок должен быть минимум 15 мм; любое расстояние между кнопками должно быть более 10 мм.

Примечание 1 — Кнопки могут иметь любую форму, например они не обязательно должны быть круглыми;

б) расстояние между любой ручкой (частью, предназначенной для захвата), требующего воздействия усилия более 10 Н, и любой конструктивной частью АРРН должно быть не менее 35 мм;

с) расстояние между любой верхней поверхностью педали (в любом рабочем положении) и любой другой частью АРРН должно иметь вертикальный зазор между носками не менее 75 мм;

д) диаметры любых рабочих ручек и/или ручек, требующих рабочего усилия более 10 Н, должны составлять от 19 до 43 мм.

Примечание 2 — Ручки и кнопки могут быть любой формы;

е) для АРРН, приводимого в действие из положения стоя, педали должны быть расположены не более чем на 300 мм над поверхностью пола;

f) для АРРН, управляемого из положения стоя, ручные органы управления должны быть расположены на высоте от 800 до 1200 мм над поверхностью пола;

g) для АРРН, управляемого из положения сидя, системы управления, предназначенные для управления сидящим пассажиром, должны находиться в пределах досягаемости пассажира.

Примечание 3 — Что касается перечислений e), f) и g), другим элементам управления могут потребоваться другие положения в зависимости от использования АРРН;

h) рабочие усилия или крутящие моменты, требуемые для тех частей устройства, которые предназначены для управления пальцами, кистями/руками или ногами, не должны превышать значений, указанных в таблице 9.

Таблица 9 — Действующие усилия

Воздействие	Усилия/крутящий момент
Воздействие пальцем	5 Н
Воздействие ладонью/рукой	60 Н
Воздействие ногой	300 Н
Воздействие путем поворота	1,9 Нм
Вращение поверхности сиденья	60 Н

22 Мобильные АРРНs

22.1 Общие положения

В настоящем разделе определены требования и методы испытания для мобильных АРРНs, которые являются дополнительными к тем, которые указаны в разделах 4—21.

Требования и методы испытаний применяют к АРРНs, оснащенным колесами или другими средствами для транспортирования пассажира на месте, в следующих примерах разделов ИСО 9999:2011 (в скобках):

- кресла-стулья туалетные (09 12 03);
- кресла для ванны/душа (на колесиках или без них), доски для ванны, табуретки, спинки и сиденья (09 33 03);
- лежаки для ванны, столы для душа и пеленальные столики (09 33 12).

22.2 Средства, уменьшающие подвижность

22.2.1 Общие положения

Мобильное АРРН или любая из его частей, которые могут представлять опасность для пользователя или находящегося поблизости человека, должны быть оснащены средствами, уменьшающими подвижность любого нежелательного движения.

22.2.2 Требования к стопорным механизмам

Мобильное АРРН не должно приводить к недопустимому риску из-за нежелательного перемещения при испытании в соответствии с 22.2.3 и 22.2.4. Когда АРРН полностью останавливается, в течение 1 мин не должно быть перемещения мобильного АРРН более чем на 50 мм (по отношению к наклонной плоскости).

22.2.3 Методы испытаний стопорных механизмов

Перед проведением испытания мобильное АРРН подготавливают со следующими параметрами в наиболее неблагоприятном положении при обычном использовании:

- высота и длина;
- ролики/колеса.

Мобильное АРРН размещают с максимальным усилием, распределенным на месте, как показано на рисунках 14 и 16, и с включенным блокирующим устройством (например, тормозами) на испытательной плоскости (4.8.7), наклоненной на 6° от горизонтали. Любое первоначальное перемещение не должно приводить к неприемлемому риску, принимая во внимание обычное использование АРРН.

Регулируют блокирующее устройство (например, тормоза) в соответствии с инструкциями производителя по эксплуатации, не превышая требований к рабочему усилию, указанных в таблице 9.

22.2.4 Методы испытаний на долговечность тормозов

Устанавливают мобильное АРРН на горизонтальную поверхность, как указано в 22.2.3.

Испытание на долговечность для тормозов рычажным приводом проводят по циклу испытаний, рассчитанному в соответствии с 16.3 (см. таблицы 7 и 8) в отношении предполагаемой области использования и указанного срока службы изделия. Для ножных тормозов на роликах испытание на долговечность следует проводить в соответствии с ЕН 12527:1998.

После испытаний тормоз должен по-прежнему соответствовать требованиям 22.2.2.

22.2.5 Тормоз, приводимый в действие рычагом

Если мобильное АРРН предназначено для бокового перемещения, то любой тормозной рычаг во включенном положении не должен выступать над незанятым сиденьем.

22.3 Электробезопасность для мобильных АРРНs

22.3.1 Мобильные АРРНs с механическим приводом

Мобильное АРРН с механическим приводом для транспортирования должны иметь средства (например, механизм свободного хода), позволяющие помощнику осуществлять транспортирование при неисправном состоянии системы привода.

Примечание — Мобильное АРРН с механическим приводом включает в себя двигательную установку.

22.4 Грубое обращение и перемещение

22.4.1 Общие положения

Мобильные АРРНs, предназначенные для перевозки пассажиров, должны выдерживать усилия, вызванные грубым обращением и свободным перемещением. Требования не распространяются на мобильные АРРНs, указанные производителем только для перемещения на предельно короткое расстояние, например в пределах помещения, в целях уборки или для обеспечения доступа к жильцу.

22.4.2 Общие требования

После испытаний, указанных в 22.4.3 и 22.4.4, мобильное АРРН, производственные компоненты и комплектующие не должны иметь потерь функций, разблокировки любых боковых направляющих, или физического износа, например износ фиксаторов, фиксированных аксессуаров на мобильных АРРНs (таких как боковые рельсы), которые могут сократить их использование или создать опасность, в частности: появление остаточной деформации, изменение зазора, защемление или ущемление.

Мобильное АРРН должно преодолевать препятствие и не должно опрокидываться при проведении испытания в соответствии с 22.4.3. Мобильное АРРН или детали не должны создавать недопустимый риск, определяемый путем проверки мобильного АРРН, его частей и соответствующей информации, содержащейся в файле управления рисками.

22.4.3 Метод испытания на преодоление порога

Все комплектующие при применении по назначению во время транспортирования должны быть прикреплены к АРРН и с высотой в наихудшем положении, и с распределением максимального усилия на месте, как указано на рисунках 14 и 16. Также может быть использован испытательный манекен в соответствии с ИСО 7176-11.

Устанавливают препятствие, которое фиксируют ровно на полу, с прямоугольным поперечным сечением высотой 10 мм и шириной не менее 80 мм с радиусом 2 мм по верхним краям.

АРРН должно перемещаться со скоростью $(0,8 \pm 0,1)$ м/с, или для мобильных АРРНs с приводом от двигателя для перемещения должна быть использована максимальная скорость, при этом все ролики должны ударяться и проходить через препятствие. Ручные мобильные АРРНs приводят в движение усилием, действующим на его рукоятку(и). Затем мобильное АРРН всеми роликами должно быть перемещено обратно через препятствие и возвращено в исходное положение испытания.

Испытание повторяют 10 раз.

Альтернативный метод испытания: может быть использована двухбарабанная установка (см. ИСО 7176-8) при условии, что она работает циклически взад и вперед и адаптирована к навесному оборудованию и скоростям, указанным выше.

Испытание повторяют 10 000 раз.

Примечание — См. также предложение по альтернативному испытанию в В.22.4.3.

22.4.4 Метод испытания на удар дверной коробки

Все принадлежности, предназначенные для нормального использования во время перемещения, должны быть прикреплены к мобильному АРРН и с максимальным усилием на месте, распределенным, как указано на рисунках 14 и 16, и с высотой в наихудшем положении.

Можно также использовать манекен для испытаний в соответствии с ИСО 7176-11. Устанавливают вертикальное препятствие из твердой древесины шириной и толщиной 40 мм, прикрепленное к вертикальной жесткой опоре (например, бетонной). Высота вертикального препятствия должна быть на том же уровне, что и высота точки (точек) контакта АРРНs. Направление движения перпендикулярно лицевой стороне препятствия. Образец перемещают три раза в нормальном(ых) направлении(ях) движения, как указано производителем, со скоростью $(0,4 \pm 0,1)$ м/с, или для передвижного АРРН с приводом от двигателя для транспортирования с максимальной скоростью, которая может быть поддержана при столкновении с препятствием.

22.5 Эксплуатационные требования к мобильному АРРН

22.5.1 Подставка для ног

Если мобильное АРРН снабжено опорой для ног, она должна быть сконструирована таким образом, чтобы свести к минимуму риск повреждения ног пользователя при вращении колес.

Это должно оцениваться при анализе рисков (см. 4.1).

22.5.2 Положение нажимных рычагов/точек

Ручки для толкания вперед и/или вытягивания назад должны быть установлены на высоте 900 мм над полом.

22.5.3 Диаметр поворота мобильного АРРН

Диаметр и ширина поворота мобильного АРРН должны быть указаны в инструкциях по эксплуатации с точностью плюс 25 мм. Должны быть определены и зарегистрированы следующие измерения:

- а) минимальное расстояние между двумя вертикальными и параллельными стенами, между которыми АРРН может поворачиваться на 180° за один постоянный прямой привод (см. рисунок 9);
- б) диаметр наименьшей цилиндрической оболочки, в которой АРРН может поворачиваться на 360° за один постоянный привод вперед с максимальным эффектом рулевого управления;
- с) минимальное расстояние между двумя вертикальными и параллельными стенами, между которыми АРРН может поворачиваться на 180° в обратном направлении:

Строят коридор с возможностью изменения расстояния между его стенами, используя два параллельных регулируемых барьера. Помещают АРРН в коридор и ориентируют его параллельно стенам.

Разворачивают АРРН в коридоре наиболее подходящим образом. Тест-драйв завершается, когда АРРН поворачивается на 180° .

Постепенно уменьшают ширину коридора и определяют минимальную ширину коридора, в котором АРРН можно развернуть, не касаясь стен.

22.6 Движущее усилие

22.6.1 Требования к движущим усилиям

Максимальные усилия, необходимые для перемещения мобильного АРРН при испытании в соответствии с 22.6.2 с максимальным усилием на мобильное АРРН, направленное так, как указано на рисунках 14 и 16, должны быть следующими:

- а) максимальное страгивающее усилие 160 Н;
- б) приводное (толкающее/тянущее) усилие не более 85 Н.

22.6.2 Методы испытания движущих усилий

Испытание должно проводиться на твердой и горизонтальной испытательной плоскости (4.8.7).

Мобильное АРРН должно быть загружено с максимальным усилием, распределенным на месте, как показано на рисунках 14 и 16 на опорной поверхности.

Для испытания страгивающего усилия в прямом и обратном направлениях колесики должны быть установлены под углом 180° к направлению толкания/вытягивания.

Начальное усилие постепенно прикладывают к нажимной ручке до тех пор, пока мобильное АРРН не начнет двигаться. Повторяют пять раз в каждом направлении. Среднее максимальное усилие для каждого направления, отмеченное в ходе этих испытаний, регистрируют в качестве страгивающего усилия.

Поддерживают постоянное усилие при скорости перемещения 1 м/с на расстоянии 1 м до тех пор, пока мобильное АРРН движется, и измеряют усилие, необходимое для движения.

Страгивающее усилие следует регистрировать:

- а) в прямом направлении;
- б) обратном направлении.

Движущее усилие следует регистрировать:

- а) в прямом направлении;
- б) обратном направлении.

23 Стационарные АРРНs

23.1 Общие положения

В настоящем разделе определены требования и методы испытаний для стационарных АРРНs, которые являются дополнительными к требованиям, указанным в разделах 4—21.

Требования и методы испытаний применяют только к стационарным АРРНs, приведенным в следующих разделах ИСО 9999:2011 (в скобках):

- сиденья для душа (09 33 03);
- кресла для ванны/душа (без колесиков), доски для ванны, табуретки, спинки и сиденья (09 33 03);
- лежаки для ванны, столы для душа и пеленальные столики (09 33 12);
- туалетные поднимающиеся сиденья (09 12 12/09 12 18);
- поручни и опорные перила (18 18 03);
- съемные поручни и перила (18 18 10);
- поручни и подлокотники, установленные на шарнирах (18 18 11);
- опоры и кронштейны, регулируемые по высоте (18 15 06).

Требования и методы испытаний не учитывают крепление АРРН или конструкцию здания. Во время испытания АРРН должно быть закреплено на соответствующем испытательном стенде/стене таким образом, чтобы испытанию подвергалось только АРРН, а не его крепление.

Примечание — При установке АРРН учитывают национальные строительные нормы и правила.

Количество циклов испытаний на долговечность стационарных АРРНs должно соответствовать указанному в 16.3 (см. таблицы 7 и 8) в отношении предполагаемой области использования и указанного срока службы АРРН и с соответствующими интервалами.

В случае АРРН с шарнирным соединением метод испытания должен включать складывание из строго вертикального положения в полностью сложенное положение.

23.2 Требования

После и во время проведения испытаний на статическую прочность и долговечность должны быть выполнены требования, указанные в 16.4.1 и 16.5.1.

Во время испытания АРРНs на долговечность допускается вносить коррективы в соответствии с инструкциями по эксплуатации производителя.

Способ крепления к стене/ванне/полу/другому оборудованию должен быть рекомендован производителем и включен в инструкции по эксплуатации. Изготовитель должен указать, какое усилие должно выдерживать каждый крепежный элемент.

Дополнительные требования (при их наличии) к каждой группе АРРН можно найти в соответствующем пункте.

Необходимо также использовать ИСО 21542 для соответствующих частей при испытании стационарных АРРНs.

23.3 Сиденья для душа (09 33 03)

23.3.1 Описание

Сиденья для крепления на стене или на полу в ванных комнатах могут быть откидными, оснащенными опорой для спинки, подлокотниками и/или опорными ножками. Испытания опор для спины и рук, если применимо, проводят в соответствии с разделом 16.

23.3.2 Методы испытаний сидений для душа на статическую прочность, долговечность и ударопрочность

23.3.2.1 Метод испытания на статическую прочность

К сиденью прикладывают вертикальное усилие F_1 в течение 60 с в соответствии с таблицей 6 с центром тяжести, находящимся на расстоянии $1/3$ до переднего края (см. рисунок 24). Усилие следует прилагать с помощью загрузочной площадки (см. 4.8.12.4).

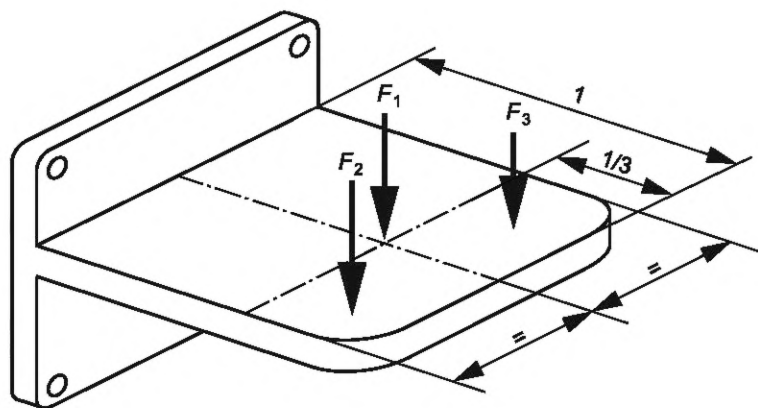


Рисунок 24 — Статическая прочность сиденья для душа

Для проведения испытаний обеих сторон сиденья загрузочную площадку поочередно размещают с левой F_2 и правой F_3 сторон сиденья как можно ближе к краю (см. рисунок 24).

23.3.2.2 Метод испытания на долговечность

К сиденью прикладывают усилие в соответствии с рисунком 16, равное максимальной массе пользователя, как указано в 16.5.2.2.

Усилие следует прилагать с помощью загрузочной площадки (4.8.12.4) в положении, предназначенном для использования.

Если сиденье складное, то его следует складывать из полностью собранного положения в полностью опущенное столько раз, сколько указано в формуле в 16.3 и в таблицах 7 и 8, и через соответствующие промежутки времени.

23.3.2.3 Метод испытания на ударопрочность

Сиденье для душа должно выдерживать горизонтальные боковые удары. Испытание проводят с использованием испытательного маятника массой 25 кг (см. 4.8.13 и рисунок 6) и с усилием F_1 , который расположен на расстоянии 50 мм спереди, в соответствии с рисунком 25.

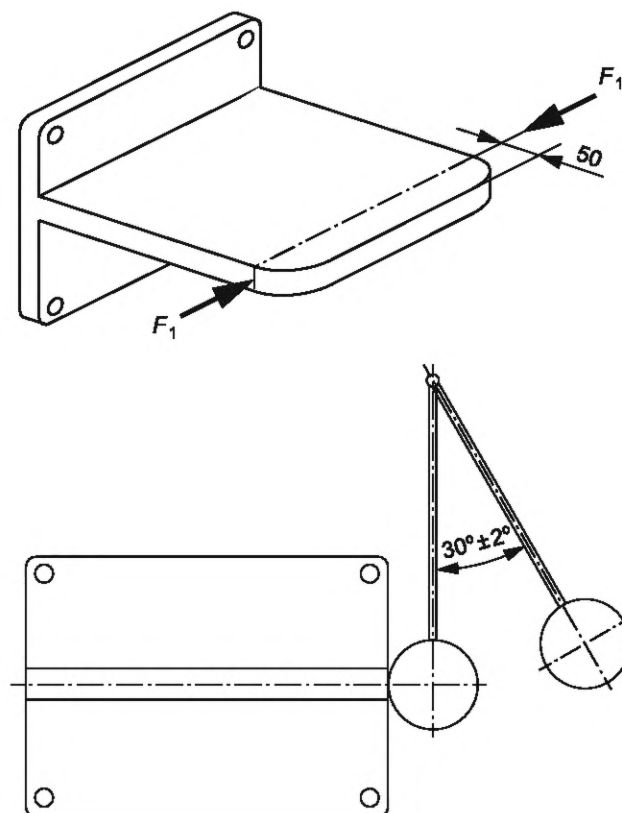


Рисунок 25 — Ударопрочность сиденья для душа

23.4 Лежаки для ванны, столы для душа и пеленальные столики (09 33 12)

23.4.1 Описание

Стационарные столики, на которых человек лежит во время купания, принятия душа или смены подгузников, регулируют по высоте.

23.4.2 Методы испытаний на статическую прочность и долговечность лежаков для ванны, столов для душа и пеленальных столиков

23.4.2.1 Методы испытаний на статическую прочность

К опорной поверхности прикладывают усилие в соответствии с таблицей 6 в течение не менее 60 с. Усилие F_1 распределяют по опорной поверхности в соответствии с рисунками 14 и 16. Затем испытание под усилием повторяют с прикладыванием асимметричного усилия F_1 (в соответствии с рисунком 26), в котором все усилия прикладывают на каждую сторону стола по одному разу, в наихудшем положении. Если предполагается, что стол также будет содержать воду, когда на нем лежит человек, вместо максимальной массы пользователя следует применить максимальное усилие.

Также может быть использован испытательный манекен в соответствии с ИСО 7176-11.

Испытание повторяют для обеих сторон.

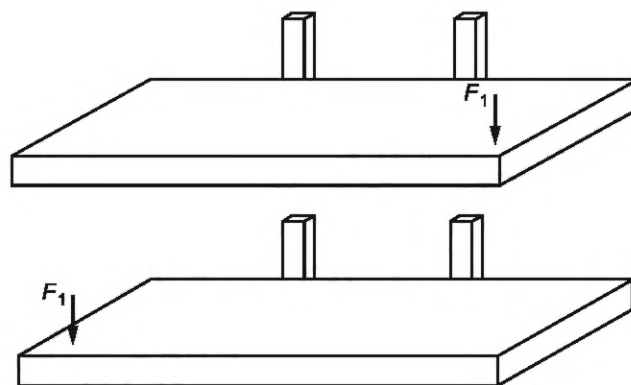


Рисунок 26 — Испытание на асимметричную статическую прочность

23.4.2.2 Испытание на долговечность опорной поверхности и механизма складывания

К опорной поверхности прикладывают вертикальное усилие, соответствующее указанному максимальному усилию или не менее 100 кг, как указано в 4.7.

Усилие должно быть приложено к столу в соответствии с рисунком 14 (на лежащей поверхности).

Если АРРН является складным, его следует складывать из полностью собранного положения в полностью сложенное положение столько раз, сколько указано в формуле в 16.3 и таблицах 7 и 8, и через соответствующие промежутки времени.

Также может быть использован испытательный манекен в соответствии с ИСО 7176-11.

23.5 Кресла для ванны/душа (без колесиков), доски для ванны, табуретки, спинки и сиденья (09 33 03)

23.5.1 Описание

АРРНs предназначены для обеспечения сидения во время купания или принятия душа. Сиденья без опоры для спинки располагают на бортах ванны и находятся на уровне края ванны. Сиденья расположены на бортах ванны или внизу. Они могут иметь прочную или съемную заднюю опору.


Некоторые из них могут иметь функцию поворота, чтобы помочь человеку с ограниченными возможностями входить/выходить из ванны.

23.5.2 Метод испытаний на долговечность

К сиденью/доске прикладывают максимальное вертикальное усилие в соответствии с 16.5.2.2, как указано в таблице 6 (см. рисунок 27). Усилие следует прилагать с помощью загрузочной площадки, описанной в 4.8.12.4.

Усилие F_1 в соответствии с 4.8.12.2 должно быть приложено к сидению.

Вращающиеся сиденья испытывают, как указано выше. Сиденье должно иметь возможность поворачиваться с помощью усилия, указанного в таблице 9, при усилении с максимальным весом пользователя.

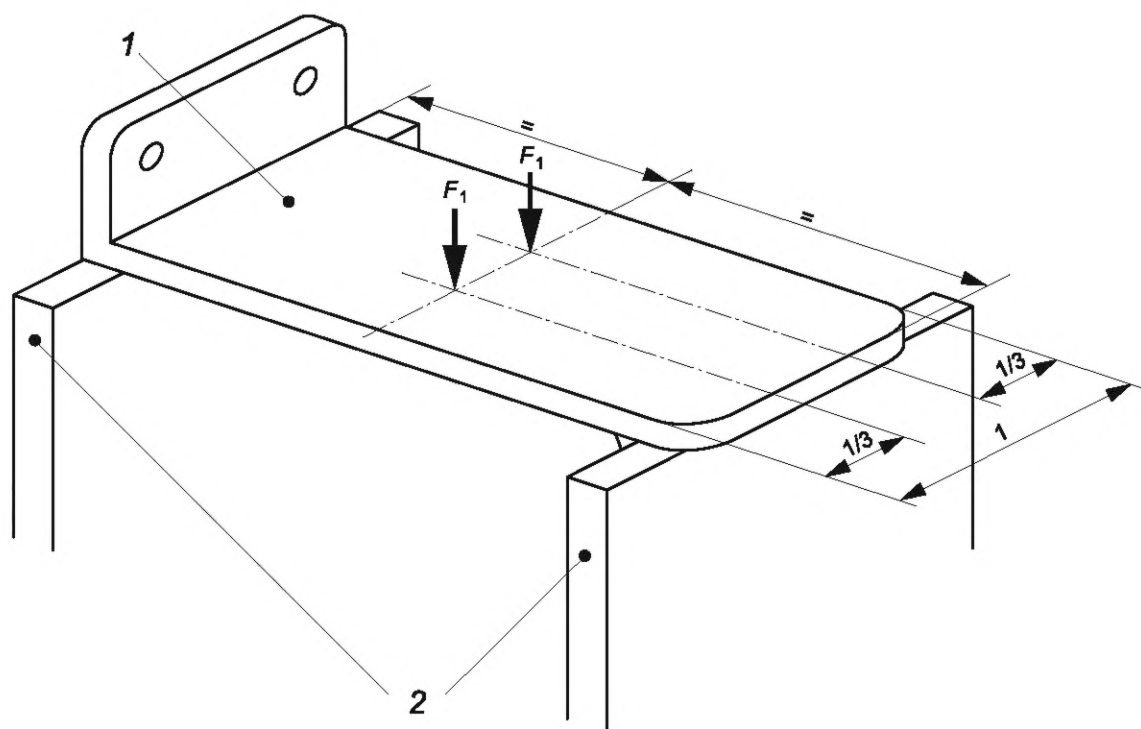

1 — АРПН; 2 — поддерживающая стойка

Рисунок 27 — Испытание на прочность сиденья/бортики для ванны

23.6 Туалетные поднимающиеся сиденья (09 12 18)

23.6.1 Описание

АРПН применяют для увеличения высоты сиденья унитаза (без подъема унитаза), чтобы облегчить опускание и подъем с унитаза. Он может быть закреплен через стандартные отверстия в унитазе или другими способами.

23.6.2 Требования к статической прочности туалетных поднимающихся сидений


В дополнение к условиям 23.2 поднимающаяся туалетная вставка должна быть оснащена приспособлениями, которые надежно удерживают туалетное поднимающееся сиденье на унитазе и предохраняют его от соскальзывания (например, соединение по форме/посадка с натягом). Производитель должен указать, на какие унитазы будет установлено туалетное поднимающееся сиденье. После проведения испытания туалетное поднимающееся сиденье не должно отрываться от унитаза.

23.6.3 Метод испытания на статическую прочность и долговечность туалетных поднимающихся сидений

23.6.3.1 Метод испытания на статическую прочность

АРПН должно быть закреплено на подходящей поверхности с характеристиками, соответствующими стандартным унитазам по форме и текстуре поверхности.

К сиденью прикладывают вертикальное усилие в соответствии с таблицей 6 в течение не менее 60 с. Усилие F_1 должно быть приложено в центре с помощью загрузочной площадки (4.8.12.4) по всей поверхности (см. рисунок 28). Сиденье, если оно регулируется, должно быть поднято в наиболее неблагоприятное положение.

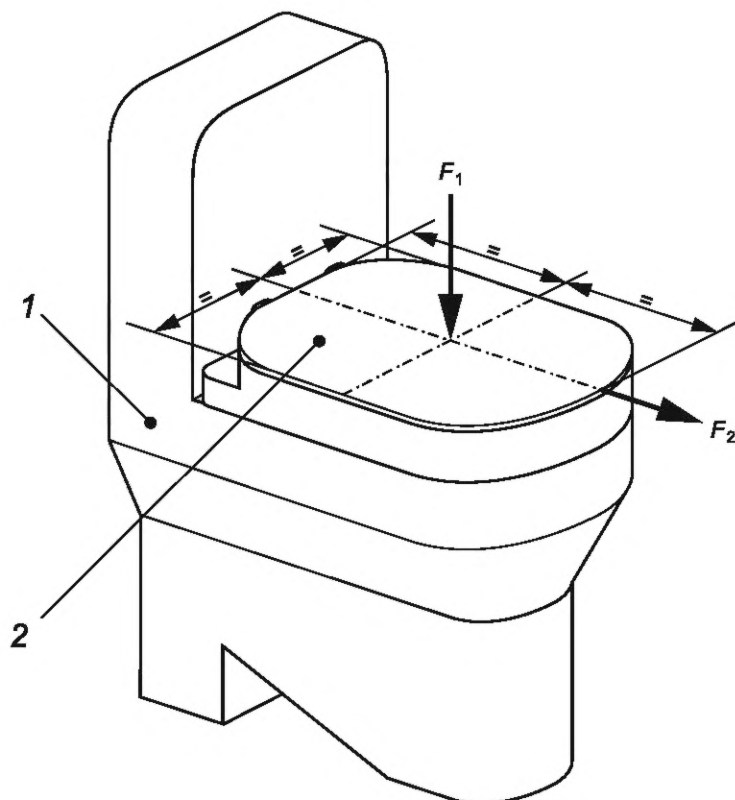

1 — стул-комод или другое средство удержания приподнятого сиденья унитаза; 2 — сиденье

Рисунок 28 — Статическая прочность туалетных поднимающихся сидений

23.6.3.2 Метод испытаний на долговечность

Дополнение к 16.5.2.2.

Испытание необязательно проводить в туалете.

Погрузочная площадка в соответствии с 4.8.12.2 должна быть расположена на сиденье или крышке, если она предусмотрена.

23.7 Поручни, опорные перила и фиксаторы (18 18 03 и 18 18 06)

23.7.1 Описание

Поручни и фиксаторы предназначены для поддержания равновесия и предотвращения падения слабых или неустойчивых людей.

Фиксированные опорные брусья обычно имеют цилиндрическую форму, прикреплены к стене, полу или другой устойчивой конструкции, чтобы обеспечить человеку возможность поддерживать или стабилизировать себя с помощью рук или руки, находясь в ванной.

23.7.2 Эргономические принципы поручей, опорных перил и фиксаторов

Дополнение к разделу 21 «Эргономические принципы».

Поручень/ручка могут быть круглыми диаметром от 25 до 45 мм. Если захват не осуществляется вокруг поручня/ручки, он должен иметь эквивалентную площадь захвата. Расстояние между точками крепления должно быть определено изготовителем, поскольку оно зависит от материалов. Поручень/ручка не должны обладать чрезмерной гибкостью. Зазор между стеной и поручнем/ручкой захвата должен составлять не менее 35 мм и, кроме того, соответствовать требованиям таблицы 4.

Насадки с присосками должны быть испытаны и соответствовать тем же требованиям, что и для вышеперечисленных насадок.

Примечание — Местные строительные нормы и правила могут предъявлять различные требования к размеру зазора.

23.7.3 Метод испытания поручней, опорных перил и фиксаторов на статическую прочность и долговечность

23.7.3.1 Метод испытания на статическую прочность

К прикрепленному к стене поручню прикладывают вертикальное усилие F_1 с использованием формулы для статического усилия на поверхности сиденья в таблице 6 в течение не менее 60 с в наиболее неблагоприятном положении, а затем горизонтальное, используя 50 % статического усилия, указанного в таблице 6. См. рисунок 29.

Поручень должен быть прикреплен к прочной стене из материала, достаточно прочного, чтобы выдерживать усилие при испытаниях. Крепление должно быть достаточно прочным, чтобы поручень не ослабевал во время испытания.

Примечание — Расположения по вертикали и горизонтали не имеют значения.

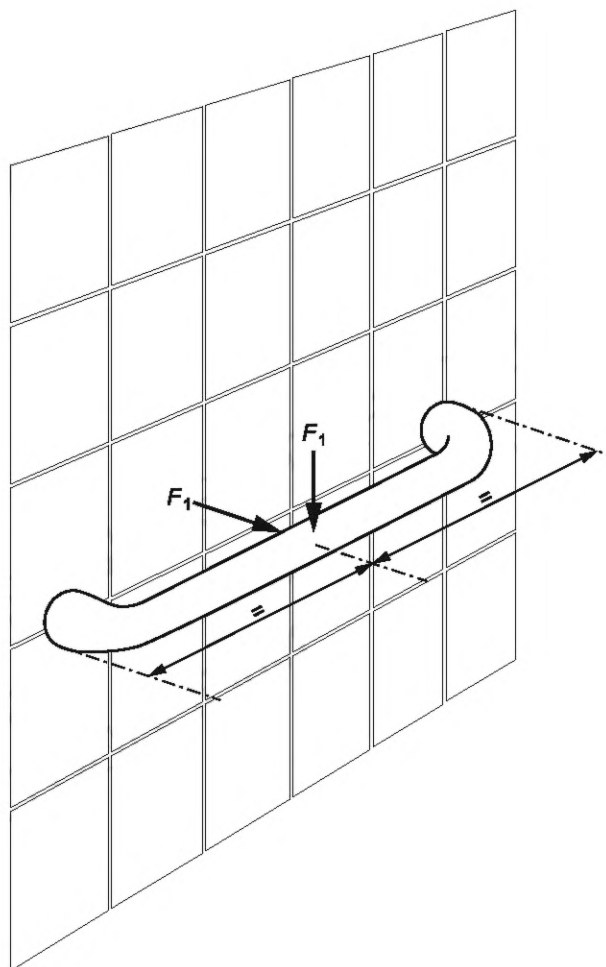


Рисунок 29 — Поручни, опорные перила

23.7.3.2 Метод испытания на долговечность

К поручню, прикрепленному к стене, прикладывают вертикальное и горизонтальное усилия, равные 40 % от усилия, приложенного к поверхности сиденья, указанного в таблице 6. Количество циклов указано в соответствии с формулой и таблицами 7 и 8 в 16.3 (см. рисунок 29).

Поручень должен быть прикреплен к сплошной стене из материала, достаточно прочного, чтобы выдерживать усилия, возникающие при испытаниях. Крепление должно быть достаточно прочным, чтобы поручень не ослабевал во время испытания.

Примечание — Расположения по вертикали и горизонтали не имеют значения.

23.8 Съёмные фиксаторы и поручни для временного использования (18 18 10)

23.8.1 Описание

APPHs, прямые или угловые стержни, которые можно временно прикрепить к стенам, полу, потолку или мебели (например, кроватям) с помощью, допустим, зажимов или присосок и удалить без инструментов; они обеспечивают поддержку человеку при изменении положения.

23.8.2 Эргономические принципы съёмных поручней и фиксаторов

Дополнение к разделу 21 «Эргономические принципы».

Ручка может быть круглой формы диаметром от 25 до 45 мм. Если она не круглая, то стержень должен иметь эквивалентную площадь захвата. Расстояние между точками крепления должно быть определено изготовителем, так как оно зависит от конструкции ручки и материалов, на которых они могут быть закреплены. Зазор между стенкой и поручнем должен составлять не менее 35 мм и, кроме того, соответствовать требованиям таблицы 4.

Ручки с присоской должны быть оснащены индикатором безопасности. Например, дисплеем, показывающим остаточное усилие (= максимальная масса пользователя).

Ручки — держатели для ванны должны быть надёжно закреплены на ванне без повреждения ванны и основания.

Ручки с присоской и ручки держатели для ванны не должны ослабевать во время испытания.

Примечание 1 — Разные материалы и разные усилия трения приведут к разным результатам.

Примечание 2 — Национальные строительные нормы и правила могут содержать различные требования к размеру зазора.

23.8.3 Метод испытания на статическую прочность съёмных поручней и фиксаторов

23.8.3.1 Метод испытания на статическую прочность

Устанавливают испытательное оборудование на опорные стойки (4.8.15).

К ручкам с присоской прикладывают горизонтальное усилие F_1 , равное 75 % от максимального усилия, и вертикальное усилие, равное 50 % от максимального усилия, под углом 90° к стене и параллельно стене в наихудшем положении (см. рисунок 29 в качестве примера).

К ручкам — держателям для ванны прикладывают горизонтальное усилие F_1 , равное 75 % от максимального усилия, и вертикальное усилие, равное 50 % от максимального усилия, под углом 90° к ванне и параллельно ванне в верхней части ручки (см. рисунок 29 в качестве примера).

Испытательная поверхность должна быть размером не менее испытываемого изделия, изготовлена из нержавеющей стали и плотно зафиксирована.

23.8.3.2 Метод испытаний на долговечность

Устанавливают испытательное оборудование на опорные стойки (4.8.15).

К ручкам с присоской прикладывают усилия к середине рукоятки под углом 15° наружу вверх и наружу вниз, равные 40 % от максимального усилия, используя таблицу 7 и таблицу 8 в 16.3 (см. рисунок 30 в качестве примера).

К ручкам — держателям для ванны прикладывают усилие в верхней части ручки, направленное параллельно ванне, равное 40 % от массы пользователя в соответствии с формулой и таблицей 7 и 8 в 16.3 (см. рисунок 29).

Примечание 1 — Расположения по вертикали и горизонтали не имеют значения.

Примечание 2 — «Наружу» означает направление от стены.

Испытательная поверхность должна быть размером не менее испытываемого изделия, изготовлена из нержавеющей стали и плотно зафиксирована.

23.9 Поручни и подлокотники, установленные на шарнирах (18 18 11)

23.9.1 Описание

APPHs, обеспечивающие поддержку человеку при изменении положения его тела, прикрепляются к стене или полу и могут быть сложены вверх, вбок или опущены вниз для обеспечения доступа или в случае их ненадобности.

23.9.2 Общие положения

Поручни и подлокотники, установленные на шарнирах, следует закрепить для предотвращения непреднамеренного складывания.

Примечание — Это может быть сделано с помощью трения или механического запирающего устройства.

23.9.3 Метод испытания поручней и подлокотников, установленных на шарнирах, на статическую прочность

К поручням и подлокотникам, установленным на шарнирах, прикладывают усилие F_1 , равное испытательному усилию, указанному в таблице 6, в отношении опоры для рычагов вниз, на расстоянии (50 ± 5) мм от переднего края под углом $(15 \pm 2)^\circ$ наружу и вниз в течение не менее 60 с (см. рисунок 30).

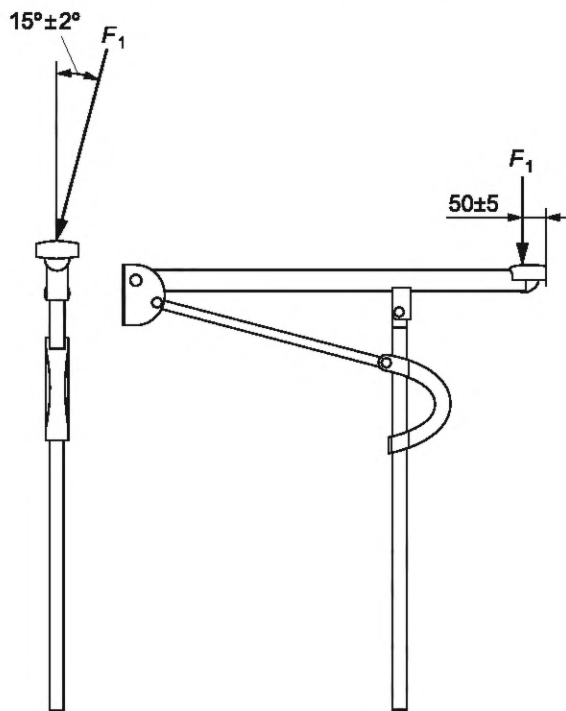


Рисунок 30 — Статическое испытание складных поручней/подлокотников

23.9.3.1 Метод испытания поручней и подлокотников, установленных на шарнирах, на долговечность

К поручням и подлокотникам, установленным на шарнирах, прикладывают вертикальное усилие F_1 на расстоянии (50 ± 10) мм от переднего края под углом $(15 \pm 2)^\circ$ наружу, равную 40 % от максимального заданного усилия в соответствии с формулами в таблице 6 в 16.3, а также согласно данным таблиц 7 и 8 (см. рисунок 30).

23.10 Опоры и кронштейны, регулируемые по высоте (18 15 06)

23.10.1 Описание

Опоры и кронштейны, регулируемые по высоте, используют в ванной комнате в качестве подставки для установки гигиенических средств. Они могут управляться как вручную, так и электрически. Их можно использовать, например, для регулировки высоты умывальников или унитазов.

23.10.2 Метод испытания опор и кронштейнов, регулируемых по высоте, на статическую прочность и долговечность

23.10.2.1 Метод испытания на статическую прочность

Кронштейн/плинт, используемый для регулировки высоты АРРН, предназначенный для поддержки веса человека, загружается вертикально в соответствии с таблицей 6 в течение 60 с максимально близко к переднему краю. См. рисунок 31.

Усилие следует прилагать с помощью загрузочной площадки (см. 4.8.12.4).

Кронштейн/плинт, используемые для регулировки высоты, должны выдерживать усилие, указанное изготовителем. Кроме того, кронштейн/плинт должен выдерживать вес пользователя, поддерживающего себя. Для этого проводят испытания, прикладывают к переднему краю вертикальное усилие, равное 75 % от максимального веса пользователя в течение 60 с.

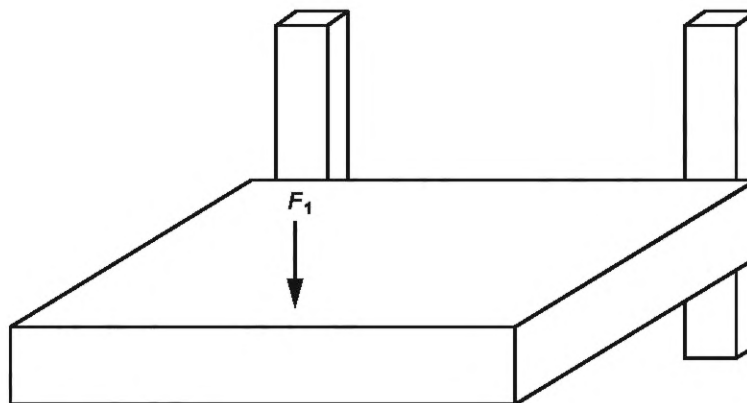


Рисунок 31 — Испытание на статическую прочность опор и кронштейнов, регулируемых по высоте

23.10.2.2 Метод испытаний на долговечность

Кронштейн/плинт, предназначенный для поддержания человека с ограниченными возможностями, испытывают, прикладывая максимальное усилие в соответствии с формулой в 16.3, а также согласно данным таблиц 7 и 8 (см. рисунок 31).

Кронштейн/плинт, используемый для регулировки высоты АРПН, испытывают, прикладывая максимальное усилие в соответствии с формулой в 16.3, таблицей 7 и таблицей 8 (см. рисунок 31).

24 Статические АРПН

24.1 Общие положения

Настоящий раздел определяет требования и методы испытания для статических АРПН в дополнение к тем, которые указаны в разделах 4—21.

Требования и методы испытаний для АРПН в этом разделе применяют к следующим разделам ИСО 9999:2011 (в скобках):

- сиденья туалетные поднимающиеся, монтируемые на раме (09 12 12);
- сиденья туалетные, вставные (09 12 15);
- сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом для облегчения вставания и посадки (приставные) (09 12 21);
- стулья для ванны/душа (без колесиков), банные доски, табуреты, опоры для спинок и сиденья (09 33 03).

24.2 Испытания на устойчивость и прочность для статических АРПН

Общие условия для соответствующих испытаний в дополнение к общей части должны быть следующими:

- а) при испытаниях на устойчивость и прочность прикладывают постоянное усилие или усилие постепенно увеличивают;
- б) при испытаниях на прочность усилие следует прилагать с незначительным динамическим усилием;
- с) АРПН, имеющее механизм регулировки размеров, необходимо перевести в наиболее неблагоприятное положение перед испытанием.

24.3 Сиденья туалетные, вставные (09 12 15)

24.3.1 Описание

Туалетные вставные сиденья (слабина в креплении) устанавливают непосредственно на поддон унитаза/сиденье унитаза, где АРПН можно легко снять с поддона унитаза/сиденья унитаза.

24.3.2 Ударное усилие

24.3.2.1 Требования

АРРН должно соответствовать требованиям 16.6.1 и 24.2.

В дополнение к требованиям 16.6.1 АРРН не должно выходить из положения предполагаемого использования.


Если изделие смещается из положения предполагаемого использования, оно должно возвратиться в положение предполагаемого использования после размещения испытательной массы весом 60 кг на переднем крае изделия, как описано ниже (см. рисунок 34).

24.3.2.2 Методы испытаний

Ниже описан один из методов испытаний для оценки устойчивости вкладыша туалетного сиденья, который не имеет фиксации к унитазу, при перемещении пользователя на АРРН из положения стоя. Поскольку этот метод испытаний не является валидированным, риски, связанные с неплотно прикрепленным приподнятым туалетным сиденьем, следует учитывать при анализе рисков (см. 4.1).


Устанавливают АРРН в предполагаемом положении на подходящей поверхности с характеристиками, соответствующими стандартным унитазом по форме и текстуре поверхности. Располагают маятник для испытания на удар приподнятого туалетного сиденья (см. 4.8.14 и 4.8.15) так, чтобы край маятника соприкасался с поверхностью АРРН спереди или сбоку (см. рисунок 33).

Поддерживают маятник так, чтобы жесткий стержень находился под углом $(30 \pm 2)^\circ$ к вертикали, а затем дают ему свободно упасть один раз и ударить с усилием F_1 по АРРН. Ударное усилие следует прикладывать к передней части АРРН и к одной из его сторон (см. рисунок 32).

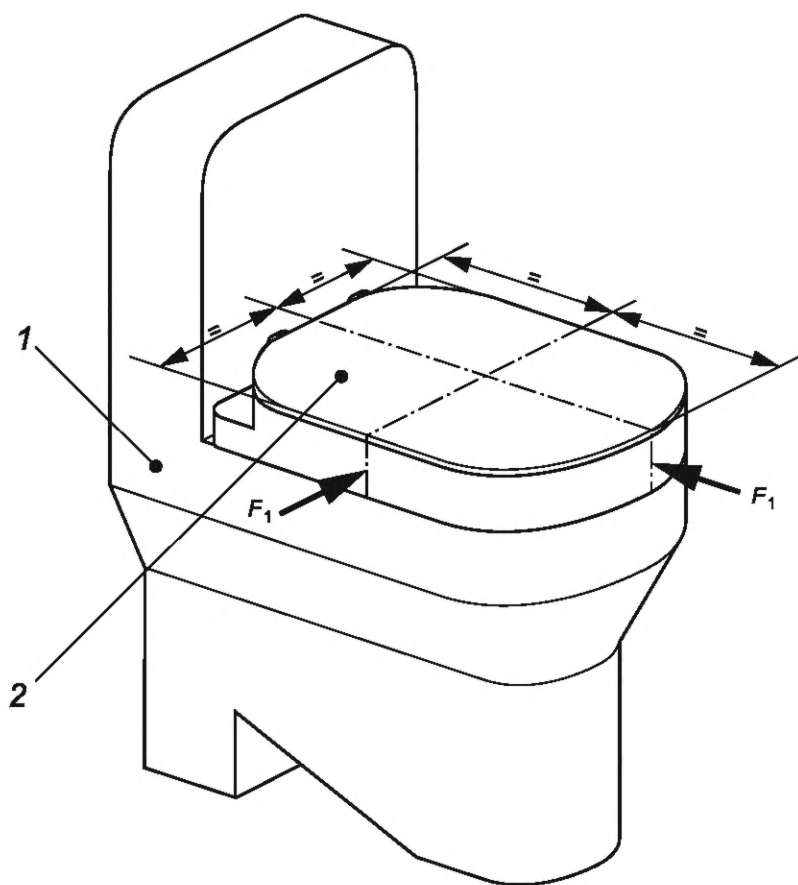

1 — стандартный туалет; 2 — сиденье унитаза

Рисунок 32 — Испытание сиденья на прочность

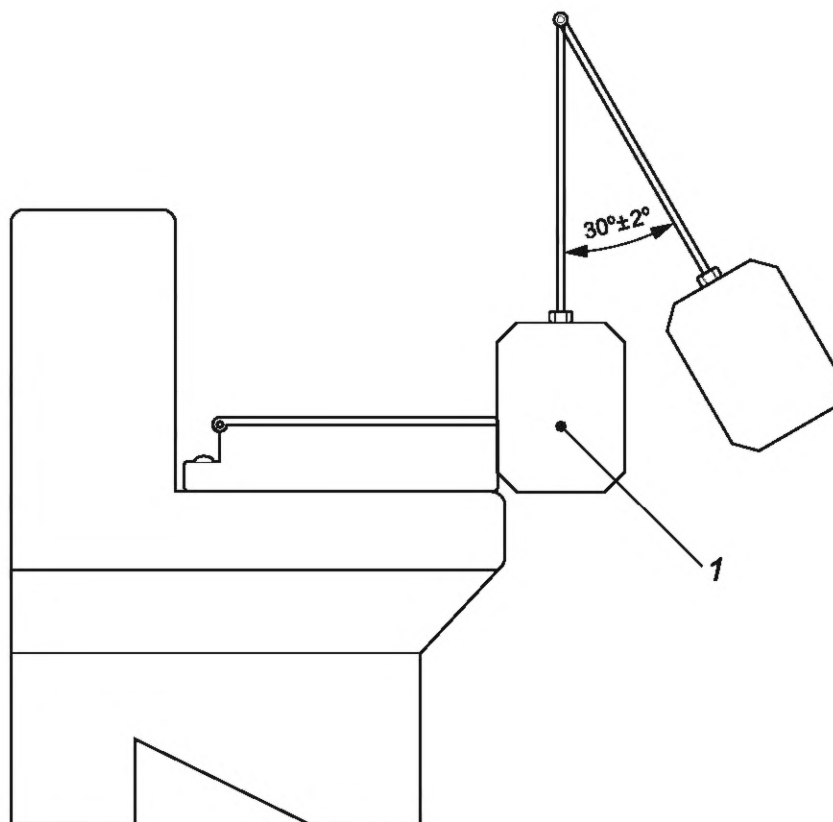

1 — испытательный маятник

Рисунок 33 — Маятник для испытаний на прочность при ударе

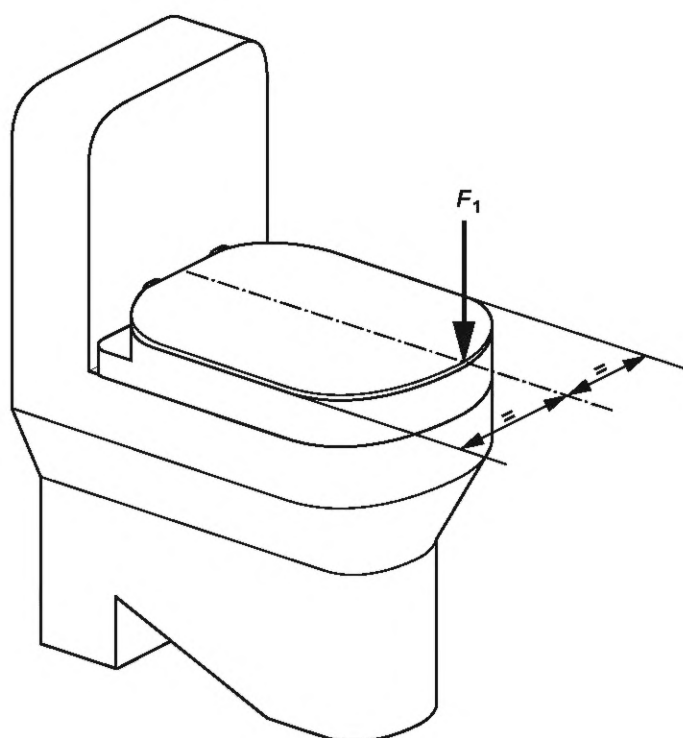


Рисунок 34 — Указатель смещения положения

24.4 Туалетные сиденья со встроенным подъемным механизмом для облегчения вставания и посадки (приставные) (09 12 21)

24.4.1 Описание

Сиденья для унитазов имеют встроенный подъемный механизм, помогающий человеку садиться на унитаз и вставать с него.

24.4.2 Долговечность

Восходящие и нисходящие движения подъемного механизма будут рассмотрены как один цикл (два движения за цикл). Количество циклов указано в формуле в 16.3 и таблицах 7 и 8.

Испытания следует проводить в соответствии с 16.5.2.3 и требованиями, изложенными в 16.5.1.

24.5 Стулья для ванны/душа (без колесиков), банные доски, табуреты, опоры для спинок и сиденья (09 33 03)

24.5.1 Описание

APPHs для поддержки сидения во время купания или душа.

24.5.2 Материалы

Сиденья для ванн не должны плавать в воде.

24.5.3 Устойчивость

APPHs, предназначенные для размещения на полу, такие как стулья и табуретки для душа, должны соответствовать требованиям к устойчивости, изложенным в разделе 17.

APPHs, которые предназначены для опоры на стенки ванны, такие как бортики/сиденья для ванны и скамейки для переноса, должны соответствовать требованиям к устойчивости в 24.5.4. Кроме того, такие APPHs, которые также имеют опору для спины, должны соответствовать требованиям испытания на устойчивость в обратном направлении (см. 24.5.4.5).

APPHs, предназначенные для размещения на полу ванны, такие как вставки для сидения в ванне, должны соответствовать требованиям к устойчивости, изложенным в разделе 17.

24.5.4 Испытания на устойчивость для APPHs, опирающихся на стенки ванны

24.5.4.1 Требования


APPH не должно опрокидываться после воздействия на него усилия.

24.5.4.2 Метод испытания на устойчивость в прямом направлении

Этот тест не распространяется на установленные на ободке скамейки для ванн или доски для ванн.

Переносная скамья или бортик/сиденье для ванны должны быть установлены на опорной стойке (4.8.15) в положении, предназначенном для использования. Угол наклона опорных стоек будет отрегулирован, если потребуется, в соответствии с предполагаемым использованием APPH. Усилие F_1 600 Н должно быть приложено вертикально к сиденью с помощью загрузочной подушки сиденья (4.8.12.4). Кроме того, для проверки на опрокидывание необходимо приложить усилие F_2 60 Н в горизонтальном направлении от сиденья вперед (см. рисунок 35).

В APPHs с регулируемой по высоте ножками высота должна быть установлена на максимальный уровень или в наиболее неблагоприятное положение.

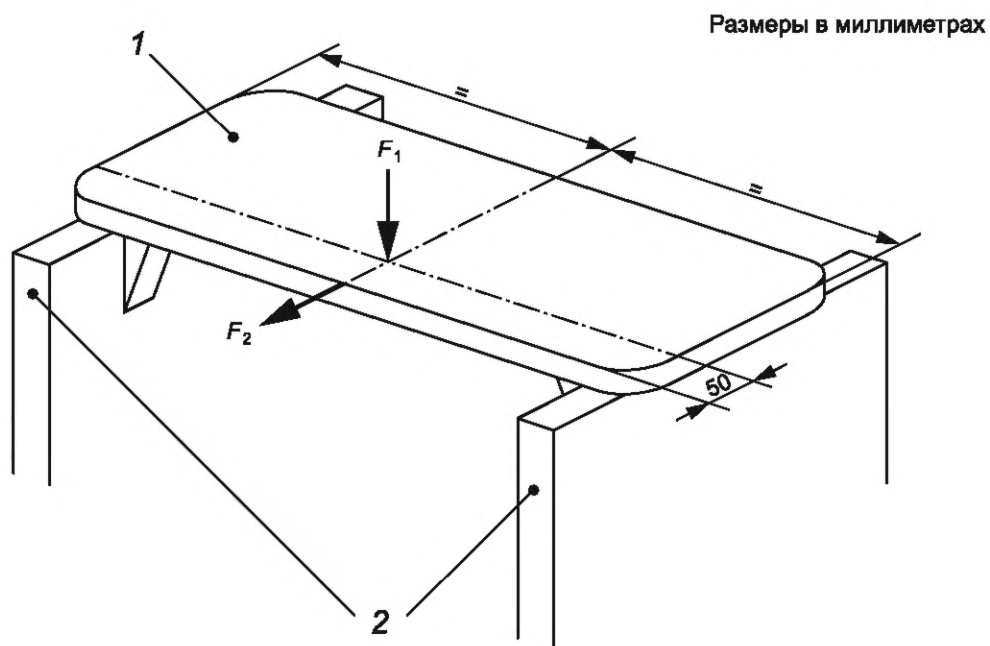

1 — установленная на бортике скамейка для ванны или доска для ванны; 2 — опорные стойки


Рисунок 35 — Испытание переносной скамьи для ванны, доски для ванны и сиденья на устойчивость при движении вперед

24.5.4.3 Метод испытания переносной скамьи для ванны без ручки на боковую устойчивость

Переносная скамья или доска для ванны/сиденье без ручки должны быть установлены на опорную стойку (4.8.15) в положении предполагаемого использования. Угол наклона опорных стоек будет отрегулирован, если потребуется, в соответствии с предполагаемым использованием АРРН. Усилие F_1 600 Н должно быть приложено вертикально к сиденью с помощью загрузочной подушки сиденья (4.8.12.4) в соответствии с рисунком 36. Кроме того, для проверки на опрокидывание необходимо приложить усилие F_2 60 Н горизонтально, направленное в сторону от сиденья (см. рисунок 36).

В АРРНs с регулируемыми по высоте ножками высота должна быть установлена на максимальном уровне или в наиболее неблагоприятном положении.

Размеры в миллиметрах

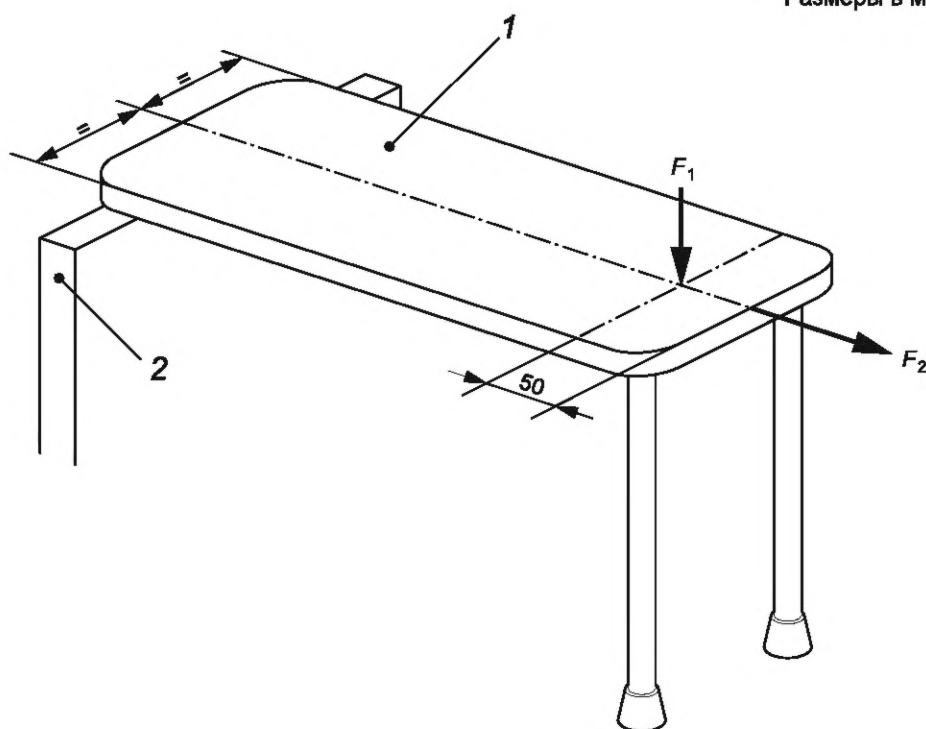

1 — переносная скамья для ванны; 2 — опорная стойка


Рисунок 36 — Испытание переносной скамьи для ванны без ручки на боковую устойчивость

24.5.4.4 Испытание переносной скамьи для ванны с ручкой на боковую устойчивость

Переносная скамья или доска для ванны/сиденье с ручкой должна быть установлена на опорную подставку (см. 4.8.15) в положении предполагаемого использования. Угол наклона опорных стоек будет отрегулирован, при необходимости, в соответствии с предполагаемым использованием АРРН. Усилие F_1 250 Н должно быть приложено вертикально к сиденью с помощью загрузочной подушки сиденья в положении для применения по назначению (4.8.12.4) в соответствии с рисунком 37. Затем усилие F_2 350 Н должно быть приложено вертикально к центру рукоятки с помощью загрузочной площадки (см. 4.8.12.4). Кроме того, для испытания на опрокидывание необходимо приложить усилие 60 Н горизонтально, направленное в сторону от сиденья, для проверки на опрокидывание (см. рисунок 37 для горизонтальной ручки и рисунок 38 для вертикальной ручки).

АРРНs с регулируемыми по высоте ножками должны иметь высоту, установленную на максимальном уровне или в наиболее неблагоприятном положении.


Размеры в миллиметрах

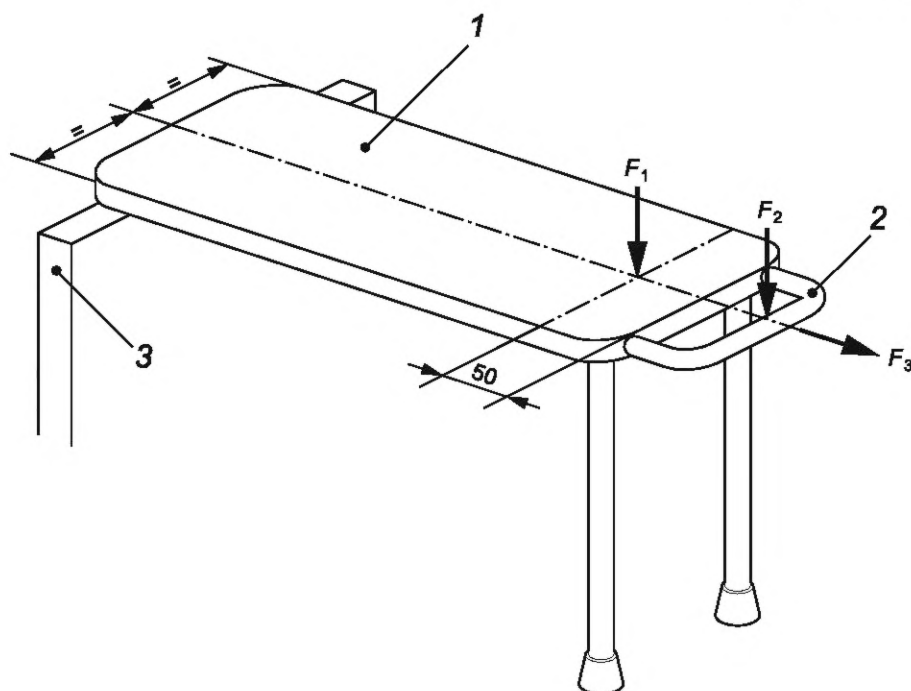

1 — переносная скамья для ванны; 2 — ручка; 3 — опорная стойка

Рисунок 37 — Испытание переносной скамьи для ванны с горизонтальной ручкой на боковую устойчивость

Размеры в миллиметрах

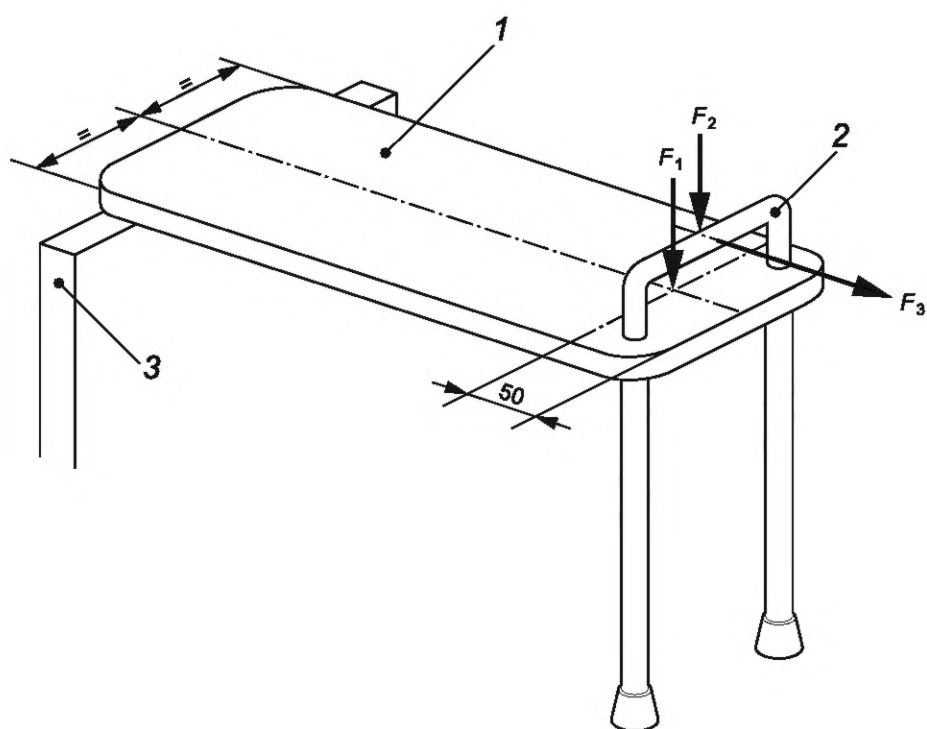

1 — переносная скамья для ванны; 2 — ручка; 3 — опорная стойка


Рисунок 38 — Испытание переносной скамьи для ванны с вертикальной ручкой на боковую устойчивость

24.5.4.5 Метод испытания на устойчивость в обратном направлении (при наличии задней опоры для тела)

Переносная скамья или бортик/сиденье для ванны должны быть установлены на опорной стойке (4.8.15) в положении, предназначенном для использования. Угол наклона опорных стоек регулируют, при необходимости, в соответствии с предполагаемым использованием АРПН. Усилие весом F_1 60 кг устанавливают в положении 175 мм вперед от центра заднего края сиденья в соответствии с рисунком 39. Усилие F_2 140 Н прикладывается горизонтально в обратном направлении от центра верхнего края задней опоры (см. рисунок 39) для проверки на опрокидывание.

АРПН с регулируемыми по высоте ножками должны иметь высоту, установленную на максимальном уровне или в наиболее неблагоприятном положении.

Размеры в миллиметрах

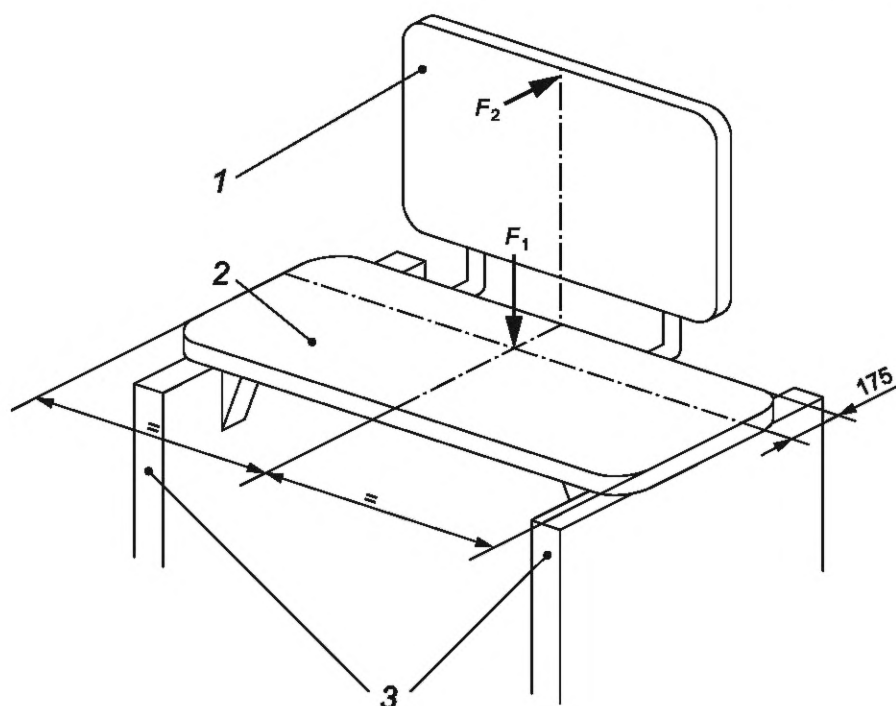

1 — переносная скамья для ванны; 2 — ручка; 3 — опорная стойка

Рисунок 39 — Метод испытания на устойчивость в обратном направлении (при наличии задней опоры для тела)

24.5.5 Испытание держателей на прочность


24.5.5.1 Требования

См. 16.4.1.

24.5.5.2 Метод испытаний


Переносная скамья, бортик/сиденье для ванны или полка для ванны настольного типа должны быть установлены на опорной(ых) стойке(ах) (4.8.15) в положении, предназначенном для использования. Угол наклона опорных стоек при необходимости регулируют в соответствии с предполагаемым использованием АРПН. Усилие F_1 200 Н следует прикладывать вертикально к центру сиденья с помощью подушки для загрузки сиденья (4.8.12.4). Затем усилие F_2 400 Н должно быть приложено горизонтально по длине АРПН и повторено 10 раз в альтернативных направлениях. Усилие следует поддерживать каждый раз в течение не менее 10 с. После снятия испытательного усилия АРПН и его части должны соответствовать требованиям, перечисленным в 16.4.1 (см. рисунок 40, рисунок 41 и рисунок 42).

АРПН с регулируемыми по высоте ножками должны иметь максимальную высоту.

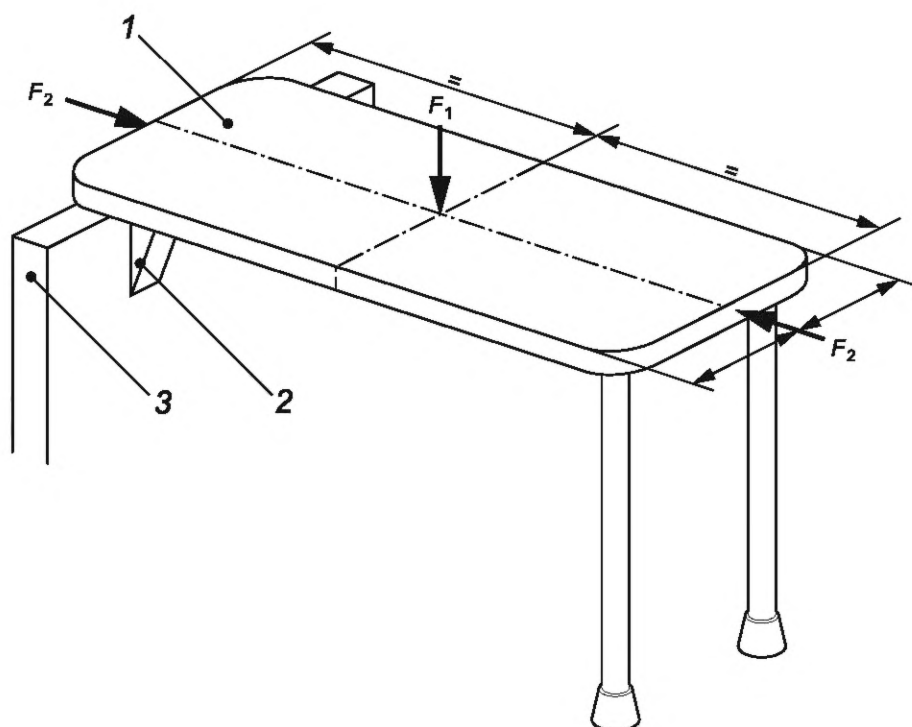


1 — переносная скамья для ванны; 2 — держатель; 3 — опорная стойка

Рисунок 40 — Метод испытания держателей для переносной скамьи на прочность

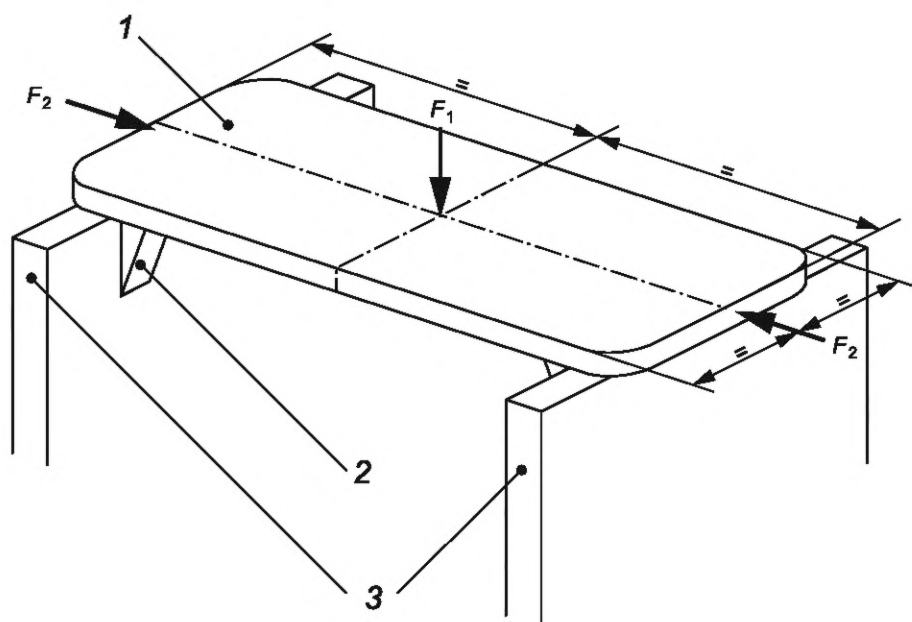

1 — переносная скамья для ванны; 2 — держатель; 3 — опорная стойка

Рисунок 41 — Метод испытания держателей для бортиков/сидений для ванны на прочность

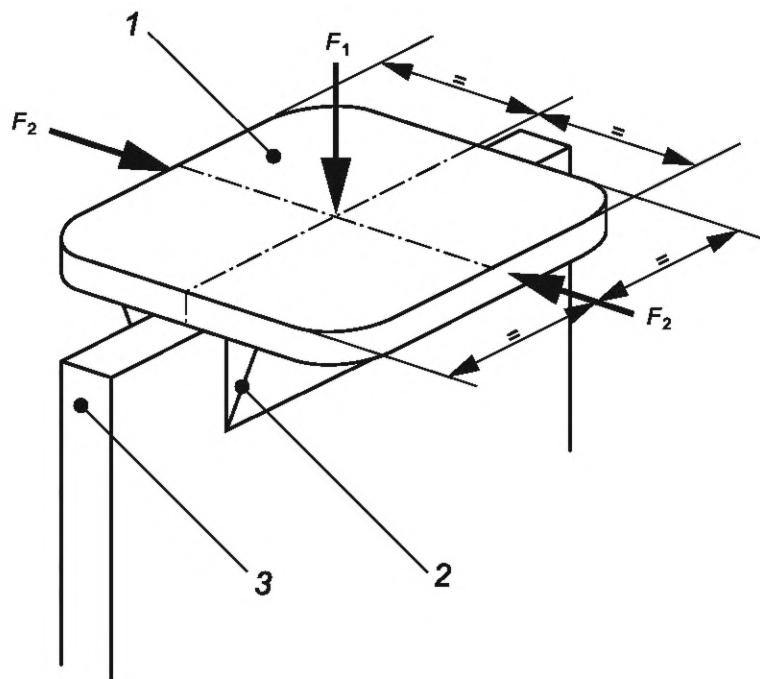

1 — переносная полка для ванны; 2 — держатель; 3 — опорная стойка

Рисунок 42 — Метод испытания держателей полки для ванны настольного типа на прочность

24.5.6 Испытание бортиков/сидений для ванны на трение

24.5.6.1 Требования

Коэффициент статического трения должен составлять 0,3 или более.

24.5.6.2 Метод испытаний


Бортик/сиденье для ванны должны быть установлены на опорную(ые) стойку(и) (4.8.15) в положении, предназначенном для использования. Угол наклона опорных стоек регулируют, при необходимости, в соответствии с предполагаемым использованием АРРН. Усилие F_1 200 Н прикладывают вертикально к сиденью с помощью подушки для загрузки сиденья (4.8.12.4) в соответствии с рисунком 43. Усилие F_2 прикладывают горизонтально в обратном направлении (см. рисунок 44). Измеряют не менее трех раз усилие, с которой бортик/сиденье для ванны начинает скользить по опорной стойке. Коэффициент трения μ рассчитывают с использованием среднего значения, вычисленного из трех результатов, в соответствии со следующей формулой:

$$\mu = \frac{F}{9,8 \cdot W},$$

где F — среднее значение усилия в начале скольжения, Н;

W — общая масса, кг.

Размеры в миллиметрах

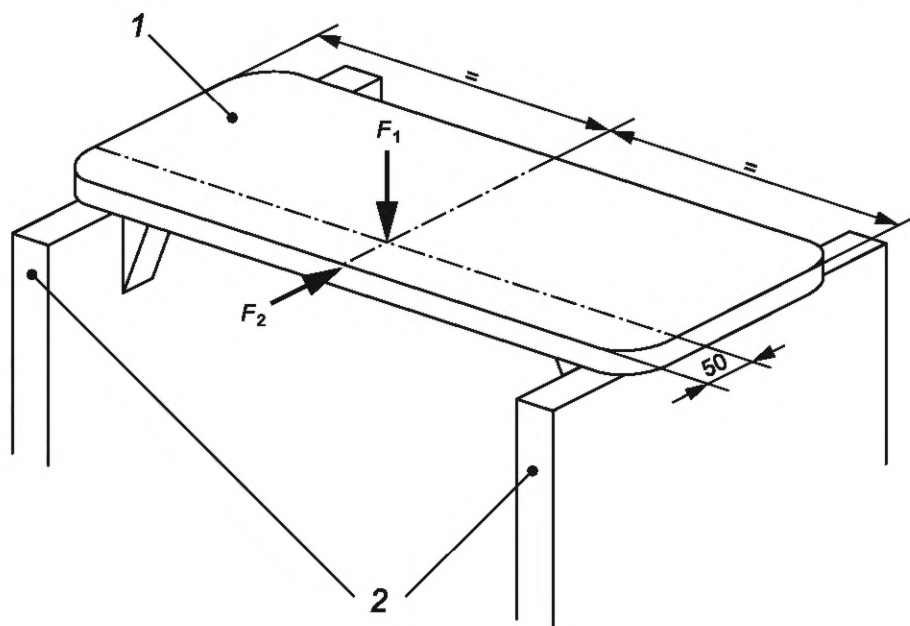

1 — переносная скамья для ванны; 2 — опорные стойки


Рисунок 43 — Испытание доски для ванны на сопротивление скольжению

24.5.7 Испытание рукоятки на действие статического горизонтального усилия**24.5.7.1 Требования**

См. 16.4.1.

24.5.7.2 Метод испытаний

Переносная скамья или бортик/сиденье для ванны должны быть установлены на опорной стойке (4.8.15) в положении, предназначенном для использования, и не должны перемещаться. Угол наклона опорных стоек регулируют, при необходимости, в соответствии с предполагаемым использованием АРРН. Усилие F_1 400 Н прикладывает горизонтально в центр рукоятки с помощью загрузочной площадки (4.8.12.1) 10 раз в соответствии с рисунком 43. Горизонтальное усилие следует поддерживать каждый раз в течение не менее 10 с. После прекращения испытательного усилия АРРН и его ручка должны соответствовать требованиям, перечисленным в 16.4.1. АРРНs с регулируемой по высоте ножками должны иметь максимальную высоту.

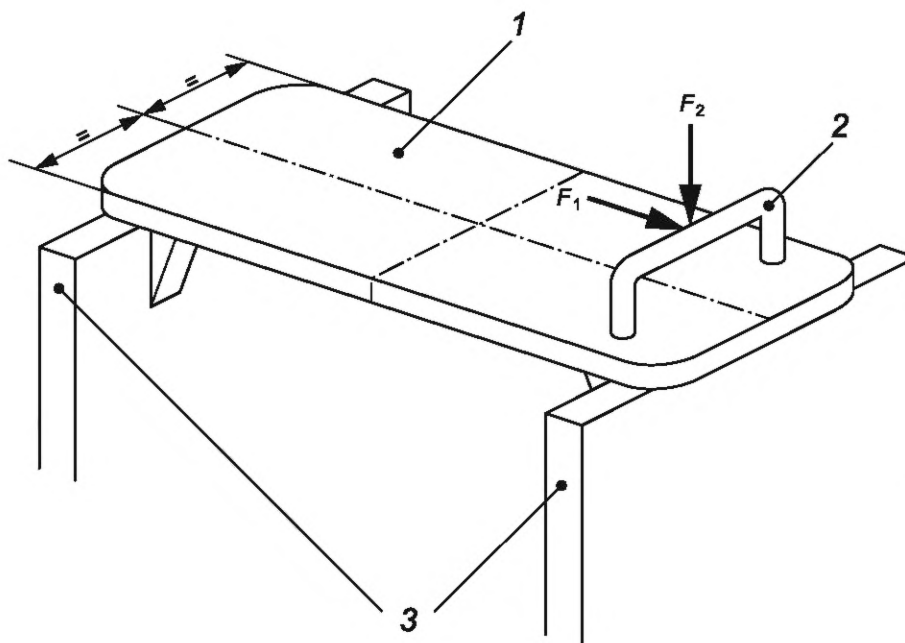

1 — переносная скамья для ванны; 2 — рукоятка; 3 — опорная стойка

Рисунок 44 — Испытание рукоятки переносной скамьи на действие статического горизонтального и вертикального усилия

24.5.8 Испытание ручки ванны и переносной доски на статическое вертикальное усилие

24.5.8.1 Требования

См. 16.4.1.

24.5.8.2 Метод испытаний

Переносная скамья или бортик/сиденье для ванны должны быть установлены на опорной стойке (4.8.15) в положении, предназначенном для использования, и не должны перемещаться. Угол наклона опорных стоек регулируют, при необходимости, в соответствии с предполагаемым использованием АРРН. Усилие F_2 800 Н прикладывают вертикально в центр рукоятки с помощью загрузочной площадки (4.8.12.1) 10 раз с помощью загрузочной площадки (см. 4.8.12.4) в соответствии с рисунком 44. Вертикальное усилие следует поддерживать каждый раз в течение не менее 10 с. После снятия испытательного усилия АРРН и его ручка должны соответствовать требованиям, перечисленным в 16.4.1. АРРН с регулируемыми по высоте ножками должны иметь максимальную высоту.

25 Требования к информации, предоставляемой производителем

25.1 Общие положения

Информация, предоставленная производителем, включает данные, содержащиеся в инструкции по эксплуатации, и сведения на этикетке.

Информация, относящаяся к АРРН и поставляемая в комплекте с ним, должна соответствовать ЕН 1041.

В дополнение к ИСО 17966 АРРН, на которые распространяются требования конкретного стандарта, должны соответствовать пункту, содержащему информации об электрических аспектах продукта, если это применимо.

Любые средства предоставления информации, относящиеся к АРРН, должны учитывать предполагаемых пользователей, условия использования и любые затруднения, характерные для отдельных типов АРРН, которые необходимы для безопасного и эффективного применения продукта.

Производителям рекомендуется информировать пользователей о любых проведенных испытаниях. Особое внимание должно быть уделено информации о пользователе, в частности инструкциям по эксплуатации и дизайну этикеток, а также дизайну и оформлению предупреждений.

Дополнительные рекомендации по требованиям, предъявляемым к лицам с различными типами патологий, приведены в приложении А.

Кроме того, информация в инструкции по эксплуатации должна быть представлена в трех отдельных разделах: предпродажная информация, информация о пользователе и информация об обслуживании, как указано в 25.2.1, 25.2.2 и 25.2.3. Эти виды информации могут предоставляться в виде отдельных печатных документов или на других носителях для удовлетворения потребностей отдельных пользователей или их помощников.

Все требования в рамках трех различных пунктов применяются только в том случае, если это применимо.

Дополнительные указания по подготовке инструкций по эксплуатации приведены в МЭК 82079-1.

25.2 Инструкции по эксплуатации

25.2.1 Предпродажная информация

В дополнение к требованиям 25.1 предпродажная информация должна включать следующее:

Примечание — Предпродажная информация необязательно должна быть представлена в печатном виде, а также может быть на веб-сайте в формате PDF;

- a) информацию о предполагаемом пользователе;
- b) информацию о том, как получить данные о пользователе в формате, подходящем для использования людьми с нарушениями зрения, чтения или когнитивных способностей;
- c) всю информацию, доступную на пиктограммах, насколько это возможно;
- d) описание предполагаемого использования и предполагаемой среды;
- e) инструкции по техническому обслуживанию, если применимо;
- f) если АРРН подлежит очистке, описание метода и подходящих материалов для очистки, включая меры предосторожности, необходимые для предотвращения коррозии, если применимо;
- g) если АРРН предназначено для дезинфекции, описание метода и подходящих материалов, включая любые меры предосторожности, необходимые для предотвращения коррозии, если применимо;
- h) габаритные размеры (ширина, длина и высота) АРРН, выраженные в миллиметрах, и его масса, выраженная в килограммах, когда оно готово к использованию и, если применимо, когда он сложен или демонтирован;
- i) диаметр поворота и минимальное расстояние, на которое АРРН можно повернуть на 180° для мобильного устройства;
- j) масса АРРН, выраженная в килограммах (если АРРН может быть демонтировано или имеет какие-либо съемные части, масса которых превышает 10 кг, должна быть указана масса этих частей);
- k) если предполагается, что АРРН будет использовано в сочетании с другими изделиями, производитель должен указать, для каких изделий и как это можно сделать безопасным способом;
- l) инструкции по воздействию на стену для изделий, прикрепленных к стене при нормальном использовании;
- m) если применимо, предупреждение об опасных сочетаниях устройств (например, подушки для предотвращения травм от давления часто работают только на правильной поверхности сиденья) и комбинациях огнестойких и негорючих материалов;
- n) перечень аксессуаров, съемных частей и материалов, которые производитель определил как предназначенные для использования с АРРН;
- o) если установлен программируемый контроллер, информация о методе программирования, компетентности, необходимой для выполнения программирования, и о влиянии на производительность (если он программируется только изготовителем, это должно быть указано);
- p) предупреждение, если АРРН может нарушить работу устройств в своей среде, которые излучают электромагнитные поля;
- q) предупреждение, если на производительность АРРН могут влиять электромагнитные поля (например, излучаемые портативными телефонами, генераторами электроэнергии или источниками высокой мощности);
- r) регулировку управления оператором;
- s) можно ли и как можно собрать или разобрать АРРН для облегчения хранения или транспортирования;
- t) инструкции по транспортированию АРРН (например, в автомобиле или самолете);

- u) измеренный уровень звукового давления;
- v) ожидаемый срок службы АРРН;
- w) максимальную массу пользователя и максимальное усилие.

25.2.2 Информация о пользователе

Информация о пользователе должна быть предоставлена производителем в комплекте с каждым АРРН и содержать все предпродажные предупреждения и информацию, а также следующее, если применимо, для каждого АРРН:

- a) местоположение и тип идентификационного номера/слова в АРРН, которые должны быть указаны для уникального идентификационного номера АРРН;
- b) любые наладки или настройки, необходимые для использования АРРН, и информацию о том, как наладки или настройки влияют на АРРН;
- c) информацию о возможности наладки и компетентности, необходимой для выполнения наладки;
- d) инструкции по эксплуатации всех элементов управления;
- e) тип батареи и номинальное напряжение;
- f) инструкции по техническому обслуживанию аккумулятора;
- g) инструкции по эксплуатации зарядного устройства, включая предупреждения о любых потенциальных опасностях для безопасности (например, о возможности накопления газа в зоне зарядки);
- h) инструкции по демонтажу и повторной сборке АРРН или любых съемных деталей;
- i) положения тех точек, в которых составные части могут быть захвачены для безопасного перемещения и обработки, и/или способ обработки во время демонтажа, сборки или переноски;
- j) предупреждение, если температура поверхности может повышаться/понижаться при воздействии внешних источников тепла или холода (например, солнечного света, внешней среды);
- k) если предполагаемое назначение АРРН не может быть выполнено без опасности (например, отверстия, V-образные отверстия), предупреждение и инструкции о том, как безопасно эксплуатировать АРРН;
- l) если предполагаемое назначение АРРН не может быть выполнено без опасности из-за движущихся частей, таких как сдавливание, предупреждение и инструкции о том, как безопасно управлять АРРН;
- m) уровень устойчивости к воспламенению материалов и узлов;
- n) информацию о переработке использованных батареек и других частей АРРН.

Для удобства использования рекомендуется включать инструкции о том, как решать простые задачи (устранять неисправности).

25.2.3 Информация по обслуживанию

Информация по обслуживанию должна содержать всю предпродажную информацию, информацию о пользователе и инструкции, необходимые для обслуживания, настройки и ремонта АРРН, а также для замены деталей.

Информация по обслуживанию должна содержать всю предпродажную информацию и информацию о пользователе в том случае, если она не указана в трех разных документах.

Информация по обслуживанию должна быть достаточно подробной в отношении профилактического осмотра, технического обслуживания и калибровки, включая частоту такого технического обслуживания.

Для периодической проверки см. также приложение D.

Информация по обслуживанию должна содержать информацию для безопасного выполнения планового технического обслуживания, необходимого для обеспечения дальнейшего безопасного использования АРРН.

Кроме того, в информации по обслуживанию должны быть указаны детали, подлежащие профилактическому осмотру и техническому обслуживанию, включая применяемые периоды и подробную информацию о фактическом выполнении такого технического обслуживания.

25.3 Этикетка

В дополнение к требованиям 25.1 производитель должен наносить на изделие несмываемые этикетки с указанием года выпуска.

На съемных частях АРРН массой более 10 кг должна быть нанесена фактическая масса. Символы, используемые при маркировке медицинских изделий, должны соответствовать символам, приведенным в ИСО 15223-1.

Этикетки должны сниматься только с помощью инструмента или значительного усилия и должны быть достаточно прочными, чтобы оставаться четко читаемыми в течение назначенного срока службы АРРН. При рассмотрении долговечности этикетки следует принимать во внимание последствия нормального использования.

Прикрепляют уникальный серийный номер к изделиям, при возможности.

26 Упаковка

Опасности, которые могут быть вызваны неадекватной защитной упаковкой, должны быть оценены в ходе анализа рисков (см. 4.1).

Примечание — Для руководства см. В.26.

27 Протокол испытаний

Протокол испытания должен содержать, по крайней мере, следующую информацию:

- а) уникальный номер отчета;
- б) наименование, адрес и конкретный аккредитационный номер испытательного учреждения, если применимо;
- с) дату выдачи протокола испытания;
- д) ссылку на настоящий стандарт, т. е. ИСО 17966:2015;
- е) наименование и адрес производителя АРРН;
- ф) описание образца, включая торговую марку производителя или поставщика, модель или тип, серийный номер и установленные варианты или аксессуар;
- г) источник образца;
- h) температуру окружающей среды, при которой проводилось каждое испытание;
- і) если контроллер является программируемым, настройки, использованные при испытании;
- ј) фотографию образца, оборудованного так, как во время испытания;
- к) результаты испытаний, включая отчет о техническом обслуживании, при их наличии;
- l) заявление о том, соответствовал ли испытанный образец всем применимым требованиям настоящего стандарта и список всех невыполненных требований;
- т) значения устойчивости с точностью до 0,5°, округленные в меньшую сторону;
- п) любые отклонения от стандартизированной процедуры испытаний.

Приложение А
(справочное)

Когнитивное расстройство

ISO/TC 173 в настоящее время разрабатывает общее руководство по когнитивным расстройствам.

Дополнительную информацию можно найти в Руководстве ИСО/МЭК 71:2014, *Руководство по обеспечению доступности в стандартах*.

Приложение В (справочное)

Общие рекомендации

Нумерация подпунктов в этом приложении соответствует номерам подпунктов в основном тексте, к которому применяется руководство (например, В.5.2 относится к подразделу 5.2).

В.5.2 Воспламеняемость

При расчете огнестойкости АРРН производителям следует учитывать, что инвалиды могут подвергаться большему риску, чем трудоспособные люди, поскольку они могут оказаться неспособными спастись от огня.

Опасности, на которые следует обратить внимание, включают:

- материалы для курильщика;
- камины и другие обогреватели помещений;
- электростатические заряды.

Предельная осторожность необходима, если АРРН может быть использовано вблизи или в сочетании с легковоспламеняющимися веществами.

В.5.4.1 Очистка и дезинфекция

АРРН должно легко очищаться и не должно содержать тех элементов, которые будут удерживать пыль, жидкость и/или загрязненный материал, за исключением случаев, когда предполагаемая функция АРРН заключается в удержании такого материала.

АРРН, кроме одноразовых АРРНs, которые могут вступать в контакт с жидкостями организма, должны подлежать многократному дезинфицированию легкодоступными дезинфицирующими средствами без повреждения вспомогательного АРРН.

Пример маркировки вспомогательных АРРНs для автоматической машинной стирки показан на рисунке В.1.



Рисунок В.1 — Пример маркировки для машинной стирки АРРН

Пример маркировки АРРНs, предназначенных для ручной струйной или паровой очистки, показан на рисунке В.2.

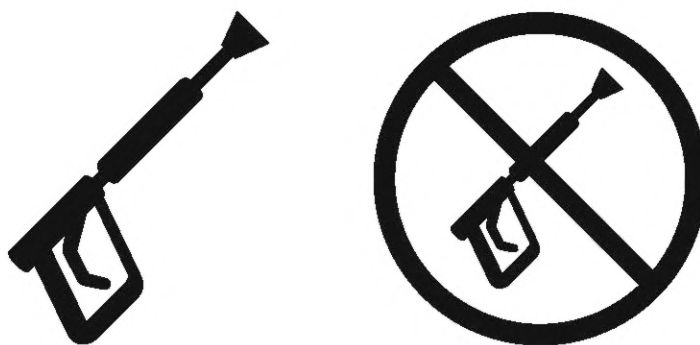


Рисунок В.2 — Пример маркировки для АРРН, предназначенного для ручной струйной или паровой очистки

АРРН, предназначенное для машинной стирки, должно нормально функционировать после испытания.

Изменения в процедуре испытаний, касающиеся цикла испытаний, температуры, времени и чистящих жидкостей, должны быть описаны в файле управления рисками производителя.

Настоящий метод испытаний представляет собой базовую процедуру дезинфекции АРРН в стиральной машине.

Соответствие требованиям проверяют проведением нижеприведенных испытаний.

а) Если изготовителем не указано иное, детали и крышки для доступа, которые могут быть отсоединены/открыты без использования инструмента, должны быть отсоединены/открыты следующим образом:

1) проводят предварительную температурную обработку в течение 10 дней при температуре $(65 \pm 2)^\circ\text{C}$ или при максимальном значении номинальной температуры хранения, если она выше;

2) затем АРРН следует выдержать при комнатной температуре не менее 16 ч.

б) 50 циклов испытаний в соответствии с процедурой, описанной производителем в инструкции по эксплуатации или состоящей:

1) из промывки в течение 2 мин водой температурой 70°C при значении pH от 5 до 8 и 0,5 %-ным чистящим и дезинфицирующим раствором, как указано производителем;

2) промывки в течение 20 с водой температурой 85°C при значении pH от 5 до 8 и 0,2 %-ным прозрачным промывочным раствором в соответствии с данными производителя;

3) охлаждение в течение 10 мин при температуре окружающей среды 20°C .

Критерии соответствия следующие:

а) непосредственно после циклов испытания АРРН повторно подключают к источнику питания. При этом не должно возникать непроизвольных движений;

б) сразу после циклов испытаний АРРН должно функционировать в соответствии с использованием по назначению согласно следующим интервалам времени:

- 5 мин (± 1 мин) после циклов испытаний,
- 60 мин (± 5 мин) после циклов испытаний,
- 24 ч (± 30 мин) после циклов испытаний;

с) проводят испытания на диэлектрическую прочность и остаточный ток в соответствии с МЭК 60601-1 со следующими интервалами:

- сразу после циклов испытаний,
- 24 ч (± 30 мин) после циклов испытаний;

д) проводят визуальный осмотр на предмет попадания воды, которая может привести к неприемлемому риску (например, короткое замыкание изолирующих барьеров и нарушение расстояний утечки).

П р и м е ч а н и е — Для некоторых АРРНs применяют не все критерии приемлемости (например, для АРРН с ручным управлением не используют электрические критерии приемлемости).

В.5.4.3 Животная ткань

Производители должны учитывать, что такие АРРНs могут переносить инфекцию и микробное загрязнение, поэтому необходимо их проверять на наличие признаков заболевания или загрязнения. Это особенно важно, когда существует возможность контакта с поврежденной кожей.

Типичными материалами и АРРНs, подвергающимися воздействию, являются:

- кожа (обувь, подставка для рук);
- овчина (опорные поверхности);
- свиная щетина (щетки).

В.6.1 Шум и вибрация

Производителям следует оценивать любые шумы и вибрации, возникающие от работающих АРРНs при использовании по назначению в определенной среде. Необходимо принять во внимание возможную чувствительность домашних животных.

В тех случаях, когда конкретные стандарты отсутствуют, производителям следует определить, какие соответствующие методы испытаний доступны в других стандартах, и дополнить их комиссией, состоящей из пользователей с ограниченными возможностями, лиц, осуществляющих уход, и соответствующих специалистов для оценки приемлемости шума и вибрации.

Уровни шума должны быть связаны с теми обстоятельствами, в которых использовано АРРН.

Шум должен быть максимально уменьшен у его источника.

Производителям необходимо учитывать следующие стандарты, касающиеся воздействия вибрации:

- ИСО 2631-1;
- ИСО 5349-1;
- ИСО 5349-2.

В.7.4 Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты

При определении характеристик электромагнитной совместимости АРРН производителям рекомендуется учитывать широко распространенные среды:

- жилые, коммерческие и небольшие складские помещения;
- промышленного назначения;
- другие (обычно это означает более суровые условия и некоторые конкретные места, такие как хирургические кабинеты или вблизи определенного оборудования, например передатчиков).

Пользователь должен иметь возможность использовать АРРН во всех средах, предназначенных производителем для этого, с минимальными ограничениями. Производитель должен доступным языком разъяснить, в каких

случаях действуют ограничения и сопутствующие обстоятельства, которых следует избегать, и наступают последствия воздействия на АРРН потенциально опасной среды, например радиопередатчиков. Если возможно, следует представить соответствующие действия, предприняв которые можно устранить любую опасность.

В.8.9 Защита цепи

В случае перегрузки АРРН, в результате чего устройства защиты цепи могут подвергнуть пользователя опасности, следует рассмотреть возможность использования переключаемых автоматических выключателей, расположенных в пределах досягаемости пользователя, или автоматических выключателей сброса.

Если АРРН включает в себя независимые цепи со значительно различающимися уровнями тока, каждая цепь или группа цепей должна иметь отдельную защиту цепи.

В.9.1 Попадание жидкостей

АРРНs, такие как АРРНs для ванн, которые при использовании многократно погружают в воду или другие жидкости, сконструированы так, чтобы выдерживать многократное погружение, не создавая угрозы безопасности, например коррозии.

В.18 Поверхности, углы, кромки и выступающие детали

Следует применять требования, установленные в 6.1.3 ЕН 1888:2003.

Рекомендации по методам испытаний выступающих деталей см. в 5.9 ЕН 716-2:2008.

В.20 Воздействия в мягких тканях человеческого тела

Люди с ограниченными возможностями, приводящими к потере чувствительности мягких тканей и нарушению подвижности, особенно подвержены развитию пролежней. В целом наблюдается высокая распространенность пролежней среди пациентов больниц, пациентов домов престарелых и лиц, за которыми осуществляют уход на дому.

Пролежни могут вызывать острый дискомфорт и страдания и приводить к существенному снижению качества жизни. Они также являются тяжелым экономическим бременем для служб здравоохранения в частности и общества в целом.

а) Обзор причин

Как правило, пролежни возникают в результате длительной деформации мягких тканей, препятствующей артериальному и венозному кровотокам, что в конечном итоге приводит к некрозу тканей (смерти).

Существует множество внешних по отношению к организму факторов, способствующих развитию пролежней. Давление, сдвиг и трение определены в качестве основных факторов наряду с температурой, влажностью и влажностью окружающей среды непосредственно рядом с тканями. Время, в течение которого эти условия сохраняются, также влияет на возникновение и тяжесть пролежней.

При разработке АРРНs необходимо учитывать их влияние, в первую очередь, на тяжесть внешних факторов, вызывающих пролежни, нижеприведенным образом.

б) Влияние положения

Пролежни чаще всего возникают в областях высокого давления, т. е. над костными выступами тела, которые несут вес тела. При лежании такими областями являются крестец, большие вертела, пятки и локти, а во время сидения — крестец и седалищный бугор.

с) Давление

Гравитация является основной причиной давления на ткани тела. Как правило, она действует перпендикулярно плоскости тканей.

Один из способов уменьшить давление на определенные части тела — распределить его по как можно большей площади. Как правило, это предполагает использование мягких соответствующих материалов, которые позволяют телу погружаться в материал. Для этой цели часто используют пенопластовые или заполненные жидкостью гибкие прокладки. Альтернативно, усилия могут быть перераспределены на те ткани, которые могут быть более устойчивыми к давлению, например: в конструкциях подушек, которые отсекают области под седалищными бугорками и создают поверхности под бедрами.

П р и м е ч а н и е — Поскольку пролежни вызваны широким спектром факторов, не существует единого порога давления, ниже которого не возникнут пролежни.

д) Время

Время приложения усилий к тканям обычно ограничено за счет обеспечения того, чтобы люди регулярно меняли позу и перемещались между различными опорными поверхностями через равные промежутки времени. Некоторые опорные поверхности изменяют свой профиль поверхности, чтобы ограничить время приложения усилий к определенным тканям. Другие опорные поверхности изменяют давление на части тела в течение коротких промежутков времени, например чередующиеся надувные матрасы.

е) Усилие сдвига

Основной причиной возникновения пролежней также считаются усилия сдвига, и в сочетании с давлением риск будет возрастать. Они действуют параллельно плоскостям тканей и могут вызвать сильную деформацию. Это может произойти, когда кожа остается неподвижной на опорной поверхности, в то время как основная структура тела движется, например: когда человек соскальзывает с наклонной лежащей опорной поверхности или стула.

Одним из способов уменьшения усилия сдвига является удержание пациента в горизонтальном положении на 180°. Однако такое положение может быть недопустимо для людей с затрудненным дыханием.

При ограничении высоты объема опоры передней/задней секции АРРН менее чем на 20° усилия сдвига будут уменьшены. Но в положениях, когда секция для головы/спины приподнята более чем на 20°, необходимо приподнять колени (верхнюю часть голени) в положение не менее чем на 10° выше горизонтали, чтобы уменьшить влияние усилия сдвига от подъема спины и смещение тела.

Одновременное сгибание коленей за счет опускания нижней части голени уменьшит давление на пятки и обеспечит более удобное положение сидя (расслабляя мышцы и сухожилия подколенного сухожилия).

Аналогичным образом системы сидений должны быть спроектированы так, чтобы их подушки препятствовали постоянному сползанию сиденья вниз. Следует соблюдать осторожность при увеличении угла откидывания опоры спинки, так как это увеличит тенденцию к возникновению сдвиговых усилий из-за скольжения.

f) Трение

Повреждения кожи, похожие на пролежни, могут возникать, когда люди скользят по опорным поверхностям, например матрасам и мягким деталям. Обычно это происходит при переносе с одной опорной поверхности на другую. Большинство травм от трения можно избежать при использовании соответствующих методов перемещения, при которых полностью отсутствует контакт кожи и опорной поверхности.

Произвольные и непроизвольные движения людей могут привести к травмам от трения, в особенности на локтях и пятках. АРРНы могут быть изготовлены из тех материалов, которые уменьшают этот контакт или трение между кожей и опорной поверхностью.

g) Температура

Более высокие температуры приводят к увеличению скорости метаболизма тканей вместе с соответствующим увеличением потребности в кровоснабжении. Они также усиливают потоотделение и повышают риски, связанные с влажностью и влагой.

В идеале опорные поверхности должны отводить тепло от тела, чтобы свести к минимуму этот риск. Многие материалы, такие как пенопласт, которые являются качественными распределителями давления, как правило, являются общепризнанными изоляторами и вызывают повышение температуры.

h) Влажность и влага

Считают, что влажность и влага в окружающей среде повышают риск образования пролежней ввиду их влияния на механическую прочность тканей. Эти состояния могут усугубляться потоотделением, вызванным высокими температурами, или наличием недержания мочи.

i) Оценка риска

При создании и проектировании любых АРРН, предназначенных для поддержки тела или приложения усилий к телу, следует учитывать риски возникновения пролежней. Данные АРРН должны минимизировать эти риски надлежащим образом с учетом восприимчивости тех пользователей, для которых они предназначены, и уравновесить их с рисками других неблагоприятных последствий использования устройства.

j) Для получения дополнительной информации по этим вопросам также следует ознакомиться с работами:

- Европейской консультативной группой по пролежневим язвам;
- Австралийской ассоциацией по профилактике и лечению ран;
- Национальной консультативной группой по травмам при давлении в США.
- Пантхоокеанского альянса по травмам от давления (PPPIA);
- [17] и [18].

B.21 Эргономические принципы

Руководство по проектированию и расположению органов управления для квалифицированных специалистов в промышленности приведено в ЕН 894-3. Данное руководство следует использовать с предельным вниманием, поскольку пользователям могут потребоваться специальные устройства, соответствующие их группе инвалидности. В большинстве случаев прикладываемые усилия не должны превышать следующих:

- усилие срабатывания рычагов, используемых для активации или разблокировки устройства вручную, не более — 60 Н;
- усилие срабатывания рычагов, используемых для удержания или перемещения устройства в течение значительного времени, не более — 13 Н;
- рабочее усилие рычагов, используемых для активации или разблокировки устройства ногой, не более — 60 Н в «направлении тяги» и 100 Н в «направлении толкания»;
- усилие срабатывания устройств, используемых для активации или отключения устройства нажатием пальца, не более — 5 Н.

Состояние лица с ограниченными возможностями, вероятнее всего, будет сопровождаться слабостью и отсутствием контроля над своими конечностями. Для облегчения работы определенного устройства, а также во избежание случайных срабатываний следует учитывать определенные эргономические критерии: рекомендуемый минимальный порог рабочего усилия, прилагаемого пользователем; соответствующие размер, положение и расстояние между механизмами управления. Пользователь должен получать обратную связь от механизма (например, по свету, щелчку, шуму) для того, чтобы убедиться в том, что он действительно работает.

В.22.4 Грубое обращение и перемещение

Предлагается дополнительный метод оценки напряжений, вызванных недопустимым обращением для преодоления порога. Поскольку данный метод не был подтвержден, он может быть только дополнением к нормативным требованиям согласно 22.4.2 и методам испытаний по 22.4.3.

В.22.4.2 Дополнительные требования для перемещения через порог

После испытаний, указанных в 22.4.3, мобильное АРРН, детали и аксессуары не должны терять свои функции, быть разблокированными любые боковые направляющие или иметь ухудшения физического состояния [в частности, износ фиксаторов, разъединение аксессуаров, если они закреплены на мобильное АРРН (как боковые рельсы), которые могут сократить нормальное использование или создать опасность, например завал, или остаточная деформация, изменение зазора для защемление либо ущемление].

Мобильное АРРН не должно преодолевать 40-миллиметровое препятствие согласно В.22.4.3, перечисление а).

Мобильное АРРН должно преодолеть препятствие, указанное в В.22.4.3, перечисление б).

Колесики мобильных средств гигиены должны соответствовать требованиям ЕН 12530:1998 и ЕН 12527.

В.22.4.3 Дополнительный метод испытаний для перемещения через порог

Испытания АРРН проводят в состоянии перемещения в соответствии с инструкциями по эксплуатации с максимальным усилием и в наиболее неблагоприятных условиях, допустимых при нормальной эксплуатации, или в соответствии с рисунками 14 и 16.

а) Восходящий ударный разрыв

АРРН трижды толкают в нормальном направлении движения со скоростью $(0,4 \pm 0,1)$ м/с против препятствия твердой древесины с вертикальной поверхностью 40 мм, которое жестко прикреплено к плоскому полу. Направление движения перпендикулярно поверхности препятствия.

б) Нисходящий ударный разрыв

АРРН трижды толкают в нормальном направлении движения со скоростью $(0,4 \pm 0,1)$ м/с, чтобы упасть с вертикальной ступеньки высотой 40 мм, закрепленной плоско на жестком основании (например, бетон). Направление движения перпендикулярно поверхности нисходящей ступени. Во время проведения испытания на удар при спуске, если какая-либо деталь, отличная от колеса, соприкасается с препятствием до того, как колесо коснется земли, изделие продолжают толкать до тех пор, пока оно полностью не опустится.

В.26 Упаковка

Упаковка АРРН предназначена для обеспечения надлежащей защиты от повреждений, порчи или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования. Поэтому следует рассмотреть различные формы хранения и виды транспортирования, которые имеют место, и проверить эффективность упаковки.

Приложение С (справочное)

Экологические и потребительские требования

С.1 Оценка опасных веществ в составе APPNs для лиц с ограниченными возможностями. Общие аспекты

В этом приложении представлены некоторые общие рекомендации по минимизации использования опасных химических веществ, содержащихся в APPNs для людей с ограниченными возможностями. Оно призвано дополнить юридические обязательства, предоставляя некоторые практические рекомендации, учитывающие, но выходящие за рамки минимальных требований законодательства.

Раздел С.2 фокусируется на тех классах химических веществ, использование которых требует предельного внимания с точки зрения здоровья человека или окружающей среды (CMR, PBT, vPvB и подобного рода вещества) и которые могут быть обнаружены во всех материалах и продуктах.

Разделы С.3—С.6 содержат рекомендации, касающиеся текстиля, пластмасс, металлов и дерева.

С.2 Опасные вещества во всех материалах или изделиях

С.2.1 Вещества, вызывающие особое опасение (SVHC): европейский подход к химическим веществам

С.2.1.1 Общие положения

В 2006 г. принята новая нормативная база ЕС, касающаяся регистрации, оценки, разрешения и ограничения химических веществ (REACH, 1907/2006). REACH требует разрешения для веществ, вызывающих «предельную» (для других веществ требуется просто регистрация), среди которых химические вещества CMR (канцерогенные, мутагенные и токсичные для размножения), PBT/vPvB (стойкие, биоаккумулирующие и токсичные/высокостойкие и наиболее биоаккумулирующие вещества) и вещества, идентифицированные как вызывающие существенные и необратимые последствия для людей или окружающей среды, эквивалентные последствиям, упомянутым в каждом конкретном случае. Данные вещества будут идентифицированы в сотрудничестве с государствами-членами. Они включены в так называемый «список кандидатов», который публикуется и периодически обновляется Европейским агентством по химическим веществам (ECHA). Наконец, вещества, требующие разрешения, будут включены в приложение XIV соответствующей Директивы.

С.2.1.2 Химические вещества CMR

Химические вещества CMR могут принадлежать к одной из трех различных категорий. Для канцерогенных веществ это описано следующим образом:

- категория 1: вещества, которые, как известно, являются канцерогенными для человека. Имеется достаточно доказательств для установления причинно-следственной связи между воздействием на человека того или иного вещества и развитием рака;
- категория 2: вещества, которые следует рассматривать как канцерогенные для человека. Имеется достаточно доказательств для обоснованного предположения о том, что воздействие какого-либо вещества на человека может привести к развитию рака, как правило, на основе:
 - определенных долгосрочных исследований на животных,
 - другой соответствующей информации;
- категория 3: вещества, которые вызывают опасение из-за возможного канцерогенного воздействия на человека, но в отношении которых имеющейся информации недостаточно для проведения удовлетворительной оценки. Представлены некоторые данные соответствующих исследований на животных, но они не являются достаточными для отнесения этих веществ к категории 2.

Мутагенные вещества и вещества, токсичные для репродукции, категории 1, 2 и 3 описаны аналогичным образом (приложение VI Директивы 67/548/ЕЭС).

Применимые кодовые обозначения риска (R-фразы) для химических веществ CMR перечислены в таблице С.1.

Таблица С.1 — Кодовые обозначения риска, охватывающие химические вещества CMR (Приложение VI к Директиве 67/548/ЕЕС)

Канцерогенные вещества R40 Ограниченные доказательства канцерогенных эффектов (категория 3). R45 Может вызывать рак (категория 1 и 2). R49 Может вызывать рак при вдыхании (категория 1 и 2) Мутагенные вещества R46 Может вызывать наследуемое генетическое повреждение (категория 1 и 2). R68 Возможный риск необратимых последствий (категория 3)	Вещества, токсичные для репродуктивной функции R60 Может ухудшить фертильность (категория 1 и 2). R61 Может причинить вред нерожденному ребенку (категория 1 и 2). R62 Возможный риск нарушения фертильности (категория 3). R63 Возможный риск причинения вреда нерожденному ребенку (категория 3)
--	--

В 2008 г. Европейский союз принял Глобально согласованную систему классификации и маркировки химических веществ (GHS, 1272/2008). В ближайшие годы она постепенно заменит нынешнюю схему классификации и маркировки, упомянутую выше.

Химические вещества CMR категорий 1, 2 и 3 будут заменены категориями 1A, 1B и 2 с тем же значением. R-фразы будут заменены новыми H-фразами.

H-фразы для химических веществ CMR перечислены в таблице С.2.

Таблица С.2 — H-фразы, охватывающие химические вещества CMR (Приложение I к Регламенту 1272/2008)

Канцерогенные вещества H350 Может вызывать рак (категории 1A и 1B). H351 Предположительно вызывает рак (категория 2) Мутагенные вещества H340 Может вызывать генетические дефекты (категории 1A и 1B). H341 Предположительно вызывает генетические дефекты (категория 2)	Вещества, токсичные для репродуктивной функции H360 Может нанести ущерб фертильности или нерожденному ребенку (категория 1A и 1B). H361 Подозрение на нарушение фертильности или нерожденного ребенка (категория 2). H362 Может нанести вред детям, находящимся на грудном вскармливании (дополнительная категория воздействия на лактацию или через нее)
---	--

С.2.1.3 Вещества PBT и vPvB

Критерии идентификации PBT (стойкие, биоаккумулирующие и токсичные) и vPvB (высокостойкие и высокобиоаккумулирующие) вещества включены в приложение XIII документа REACH. Вещество, которое соответствует определенным заданным критериям стойкости, биоаккумуляции и токсичности, является веществом PBT. Вещество, отвечающее определенным заданным критериям стойкости и биоаккумуляции, — это веществом vPvB.

С.2.1.4 Вещества, вызывающие эквивалентное опасение

Вещества, обладающие свойствами, разрушающими эндокринную систему, или вещества, обладающие стойкими, биологически накопительными и токсичными свойствами или высокостойкими, биоаккумулирующими свойствами, которые не соответствуют критериям, изложенным в приложении XIII и которые имеют научные доказательства вероятного существенного воздействия на здоровье человека или окружающую среду, вызывающие эквивалентный уровень опасности, поскольку вещества CMR, PBT и vPvB идентифицируют в каждом конкретном случае.

С.2.2 Рекомендации

С.2.2.1 Общие положения

Несмотря на то что внедрение REACH, включая разрешение SVHS, займет много лет, в качестве меры предосторожности рекомендуется по возможности как можно скорее отказываться от использования таких веществ. Паспорта безопасности веществ, используемых при производстве APPH, предоставляют необходимую информацию. Также рекомендуется регулярно проверять «список кандидатов» на веб-сайте ECHA, чтобы иметь представление о нововведениях: <http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table>

С.2.2.2 Химические вещества CMR

Предлагается избегать использования химических веществ CMR из трех категорий. Минимальным уровнем использования признается 0,1 % массы. Однако некоторые вещества CMR представляют опасность на более низких уровнях. Поэтому рекомендуется снизить уровни веществ CMR, насколько это технически возможно, с использованием подхода, основанного на принципе осторожности.

С.2.2.3 Вещества РВТ и vPvB

Продукция не должна содержать веществ РВТ и vPvB в соответствии с критериями, перечисленными в приложении XIII REACH, в количествах, превышающих 0,1 % по массе.

С.2.2.4 Вещества, вызывающие эквивалентное опасение

Поскольку эти вещества идентифицируют в каждом конкретном случае, рекомендуется избегать использования веществ, однажды включенных в «список кандидатов», в количествах, превышающих 0,1 % по массе, за исключением тех случаев, когда более низкие уровни кажутся оправданными.

С.3 Опасные вещества в текстиле

С.3.1 Соответствующие вещества

Касательно текстиля на европейском и национальном уровнях существует несколько критериев экологической маркировки, которые следует учитывать при установлении требований к текстильным компонентам АРРНs для людей с ограниченными возможностями.

Последний стандарт Оеко-Тех®¹⁾ 100 получил широкое признание на рынке готовых текстильных изделий.

Предельные значения включены:

- для формальдегида;
- тяжелых металлов;
- пестицидов;
- хлорированных фенолов;
- фталатов;
- органических соединений олова;
- прочих химических остатков;
- красителей;
- бензолов и толуолов;
- биологически активных продуктов;
- огнезащитных материалов;
- стойкости цвета;
- выброса летучих веществ;
- запахов.

Ассоциация Оеко-Тех разработала различные критерии для текстильных изделий: для младенцев, для изделий с прямым контактом с кожей и без него, а также для отделочных материалов.

С.3.2 Рекомендация

Текстильные изделия или компоненты должны соответствовать требованиям Оеко-Тех 100. Другие экомаркировки могут содержать более жесткие требования (например, к органическому текстилю), которые также следует учитывать.

С.4 Опасные вещества в пластичных материалах

С.4.1 Соответствующие вещества

Различные национальные и европейские спецификации содержат критерии для пластиковых материалов или компонентов, которые могут быть взяты за основу при установлении требований к пластиковым компонентам АРРН для лиц с ограниченными возможностями. Ключевые критерии включают в себя:

- вещества на основе свинца, кадмия, ртути и их соединений;
- галогенированные органические материалы;
- фталаты.

С.4.2 Рекомендация

С.4.2.1 Вещества на основе свинца, кадмия, ртути и их соединения или органические соединения олова

Директива Европейского совета об упаковке и упаковочных отходах (94/62/ЕС) установила ограничение в 100 частях на миллион (ppm) для суммы свинца, кадмия, ртути и шестивалентного хрома в пластиковой упаковке. Для того чтобы установить ограничение на содержание тяжелых металлов в пластике, используемом в АРРНs для людей с ограниченными возможностями, предлагается соблюдать ограничение, используемое в Европейской директиве по упаковке.

С.4.2.2 Органические галогенированные соединения

Органические галогенированные соединения в качестве антипиренов могут быть добавлены к пластиковым деталям. Некоторые из галогенированных антипиренов оказывают опасное воздействие на здоровье и окружающую среду, являются стойкими и биоаккумулирующими. Полибромированные дифенилы (РВВ), полибромированный дифениловый эфир (РВДЕ) и хлорпарафины с короткой цепью (все они являются органическими галогенированными соединениями) могут быть добавлены к пластиковым деталям. РВВ и РВДЕ относятся к группе бромированных антипиренов и оказывают опасное воздействие на здоровье и окружающую среду. Многие хлори-

¹⁾ Эта информация предоставлена для удобства пользователей настоящего стандарта и не является одобрением ИСО данного продукта.

рованные парафины обладают стойкостью и способностью к биоаккумуляции. Не рекомендованы к использованию PBB, PBDE или хлорированный парафин.

С.4.2.3 Фталаты

Эти вещества используют в качестве пластификатора в ПВХ, и они могут оказывать репротоксическое действие, поэтому предпочтительно исключить фталаты. Что касается медицинских изделий, то на рынке существуют альтернативы фталатам. Однако заменители фталата могут снизить функциональность устройства или при использовании в пакетах для крови даже повлиять на здоровье пациентов. Поэтому предлагается, чтобы пластиковые детали APHs для людей с ограниченными возможностями не содержали фталатов в количествах, превышающих 0,1 промилле, если отсутствуют доказательства того, что фталаты необходимы по техническим соображениям и не могут быть заменены другими пластификаторами или продукт не может быть изготовлен с применением других пластмассовых материалов.

С.5 Металлы

С.5.1 Соответствующие вещества

Особое значение имеют критерии для металлических покрытий, включающих:

- кадмий;
 - хром;
 - никель
- и их соединения.

Такие покрытия необходимы в местах предельного физического износа или для деталей, требующих особо плотных соединений. Для деталей, предназначенных для частого контакта с кожей, следует избегать данных покрытий. Кадмий вообще не следует использовать.

С.5.2 Рекомендации

Металлические детали не должны быть покрыты кадмием, хромом, никелем и их соединениями. В исключительных случаях в местах предельного физического износа металлические поверхности и детали, требующие особо плотного соединения, могут быть обработаны хромом или никелем. Это исключение не распространяется на детали, предназначенные для частого контакта с кожей, и обработанные детали должны быть пригодны для вторичной переработки.

П р и м е ч а н и е — Критерии для других покрытий, таких как краски, будут рассмотрены в последующем.

С.6 Древесина

С.6.1 Соответствующие вещества

Различные национальные и европейские спецификации содержат критерии для формальдегида, раздражающего и канцерогенного вещества, в древесных панелях.

С.6.2 Рекомендации

Должно быть выполнено одно из двух следующих требований:

- а) содержание свободного формальдегида, измеренное в соответствии с ЕН 120 с использованием перфоратора, должно быть:
 - в случае единичных значений: ≤ 8 мг формальдегида/100 г продукта,
 - при среднем значении за 6 мес: $\leq 6,5$ мг формальдегида/100 г продукта;
- б) эмиссия формальдегида, измеренная в испытательной камере в соответствии с ЕН 717-1, должна быть $< 0,13$ мг формальдегида/м³ воздуха.

П р и м е ч а н и е — Критерии для других веществ, содержащихся в покрытиях или консервантах для древесины, будут рассмотрены в последующем.

Приложение D
(справочное)

Периодический контроль

D.1 Периодический контроль следует проводить через промежутки времени, указанные производителем, желательно раз в год. Периодический контроль представляет собой визуальный осмотр (в частности, несущей конструкции и подъемного механизма с навесным оборудованием, тормозами, органами управления, с устройствами безопасности и устройствами для поддержки человека) и любые функциональные испытания, включая меры по техническому обслуживанию, которые могут потребоваться, например регулировка тормозов, затяжка крепежных элементов. Это следует делать в соответствии с инструкциями производителя по эксплуатации.

D.2 Периодический контроль должно проводить лицо, имеющее соответствующую квалификацию и подробно ознакомленный с конструкцией, использованием и обслуживанием АРРН. Объем периодического контроля должен быть включен в прилагаемые инструкции по эксплуатации.

D.3 Любые замечания, имеющие важное значение для безопасности, должны быть зафиксированы предпочтительно в журнале регистрации, который должен храниться у лица (лиц), ответственного(ых) за обслуживание/техническое обслуживание.

Дата принятия корректирующих мер в ответ на отмеченные замечания также должна быть отмечена в журнале регистрации.

D.4 Запись о дате результата проверки должна быть зафиксирована в журнале регистрации вместе с подписью инспектора.

D.5 Если периодический контроль выявляет какие-либо дефекты, износ или другие повреждения, которые ставят под угрозу безопасность, владелец обязан немедленно уведомить об этом. В случае непосредственной угрозы безопасности АРРН должно быть немедленно выведено из эксплуатации. Его не используют до тех пор, пока недостаток не будет устранен.

D.6 Дефекты и повреждения, имеющие важное значение для безопасности, которые произошли между контролями и уже привели к корректирующим действиям, должны быть занесены в журнал регистрации.

D.7 О дефектах и повреждениях следует сообщать производителю для принятия соответствующих мер. Этот отзыв должен быть отражен в журнале регистрации.

D.8 Если применимо, периодический контроль узла нежесткой опоры кузова следует проводить через определенные промежутки времени, указанные производителем, предпочтительно каждые 6 мес.

D.9 Протокол контроля должен быть надежно сохранен для изучения в случае инцидента.

D.10 Протокол контроля должен содержать следующую информацию:

- дата проведения контроля;
- идентификационные данные и серийный номер АРРН;
- идентификационные данные и серийный номер АРРН;
- информацию о состоянии АРРН;
- дату следующей проверки;
- удостоверение личности и подпись инспектора.

Приложение ДА
(обязательное)

**Сведения о соответствии ссылочных международных и европейских стандартов
межгосударственным и национальным стандартам**

Таблица ДА.1

Обозначение ссылочного международного и европейского стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного и национального стандарта
CISPR 11	IDT	ГОСТ CISPR 11—2017 «Электромагнитная совместимость. Оборудование промышленное, научное и медицинское. Характеристики радиочастотных помех. Нормы и методы испытаний»
ISO 3746	IDT	ГОСТ Р ИСО 3746—2013 «Акустика. Определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с использованием измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью»
ISO 8191-1	—	*
ISO 8191-2	—	*
ISO 9227	—	*
ISO 9999:2011	IDT	ГОСТ Р ИСО 9999—2019 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»
ISO 10993-1	IDT	ГОСТ ISO 10993-1—2021 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования в процессе менеджмента риска»
ISO 12100	IDT	ГОСТ ISO 12100—2013 «Безопасность машин. Основные принципы конструирования. Оценки риска и снижения риска»
ISO 13850	—	*
ISO 14155	IDT	ГОСТ Р ИСО 14155—2014 «Клинические исследования. Надлежащая клиническая практика»
ISO 14971	IDT	ГОСТ ISO 14971—2011 «Изделия медицинские. Применение менеджмента риска к медицинским изделиям»
ISO 15223-1	IDT	ГОСТ Р ИСО 15223-1—2020 «Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании медицинских изделий, на этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования»
ISO 22442-1	IDT	ГОСТ Р ИСО 22442-1—2011 «Изделия медицинские, использующие ткани и их производные животного происхождения. Часть 1. Менеджмент риска»
IEC 60335-1	IDT	ГОСТ IEC 60335-1—2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования»
IEC 60529	—	*
IEC 60601-1:2005+A1:2012	—	*
IEC 60601-1-2:2014	IDT	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2—2014 «Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания»

Окончание таблицы ДА.1

Обозначение ссылочного международного и европейского стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного и национального стандарта
IEC 60601-2-35	MOD	ГОСТ 30324.35—2002 (МЭК 60601-2-35:1996) «Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к одеялам»
IEC 61000-3-2	—	*
IEC 61000-3-3	IDT	ГОСТ IEC 61000-3-3—2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных систем»
IEC 61000-4-3	IDT	ГОСТ IEC 61000-4-3—2016 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-3. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к излучаемому радиочастотному электромагнитному»
IEC 61000-4-8	IDT	ГОСТ IEC 61000-4-8—2013 «Электромагнитная совместимость. Часть 4-8. Методы испытаний и измерений. Испытания на устойчивость к магнитному полю промышленной частоты»
IEC 60695-11-10	—	*
EN 614-1	IDT	ГОСТ Р EN 614-1—2003 «Безопасность оборудования. Эргономические принципы конструирования. Часть 1. Термины, определения и общие принципы»
EN 1041	—	*
EN 12527:1998	—	*
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного, европейского стандарта. П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты; - MOD — модифицированный стандарт.		

Библиография

- [1] ISO 2631-1 Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 1: General requirements
- [2] ISO 5349-1 Mechanical vibration — Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration — Part 1: General requirements
- [3] ISO 5349-2 Mechanical vibration — Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration — Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace
- [4] ISO 7176-11 Wheelchairs — Part 11: Test dummies
- [5] ISO 7176-8 Wheelchairs — Part 8: Requirements and test methods for static, impact and fatigue strengths
- [6] ISO 13732-1 Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 1: Hot surfaces
- [7] ISO 21542 Building construction — Accessibility and usability of the built environment
- [8] ISO/IEC Guide 71:2014¹⁾ Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with disabilities
- [9] IEC 60068-2-31:2008 Environmental testing — Part 2-31: Tests — Test Ec: Rough handling shocks, primarily for equipment-type specimens
- [10] IEC 60127 Miniature fuses — Part 1-6
- [11] IEC 60730-1 Automatic electrical controls for household and similar use — Part 1: General requirements
- [12] IEC 82079-1 Preparation of instructions for use — Structuring, content and presentation — Part 1: General principles and detailed requirements
- [13] EN 716-2:2008 Furniture — Children's cots and folding cots for domestic use — Part 2: Test methods
- [14] EN 894-3 Safety of machinery — Ergonomics requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators
- [15] EN 1888:2003 Child care articles — Wheeled child conveyances — Safety requirements and test methods
- [16] EN 12530 Castors and wheels — Castors and wheels for manually propelled institutional applications
- [17] 2014 Guideline on Prevention and Treatment for Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline
- [18] <http://www.npuap.org/resources/educational-and-clinical-resources/prevention-and-treatment-of-pressure-ulcers-clinical-practice-guideline/>
- [19] Oeko-Tex 100 <https://www.oeko-tex.com>
- [20] ISO 845 Cellular plastics and rubbers — Determination of apparent density
- [21] ISO 2439 Cellular plastics and rubbers — Determination of apparent density

¹⁾ Заменяет ISO/IEC Guide 71:2001.

УДК 615.477.22:006.354

ОКС 11.180.01
11.180.99

Ключевые слова: вспомогательные средства для личной гигиены, лица с физическими недостатками, эргономические принципы, принципы поручней, опорных перил и фиксированных опорных брусьев

Редактор *Л.С. Зимилова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *С.И. Фирсова*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 25.11.2022. Подписано в печать 13.12.2022. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 10,70. Уч.-изд. л. 8,56.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении в ФГБУ «Институт стандартизации»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru